

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LAB DISTILLATION APPARATUS USER MANUAL

MODEL:BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODEL:BZ-323

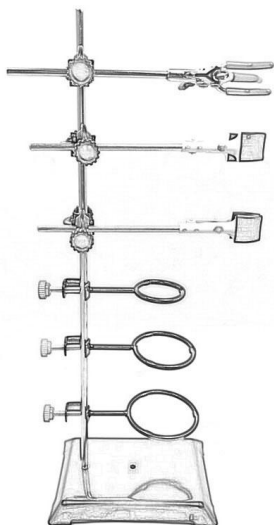

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE TESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this model. Plastic fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts name	Number of parts	Description
Iron support stand	1	With 58cm supporting pole
Circular ring	3	1 of 5.0cm; 1 of 6.8cm; 1 of 8.5cm
Flask clamp	2	/
Claw clamp	1	red
Cross clamp	3	/

PRODUCT PARAMETER


Model	BZ-323
Number of Kits	1
Product Size	580*210*155mm

OPERATION


1. Assemble the iron support stand;




2. Install the circular ring at appropriate height;

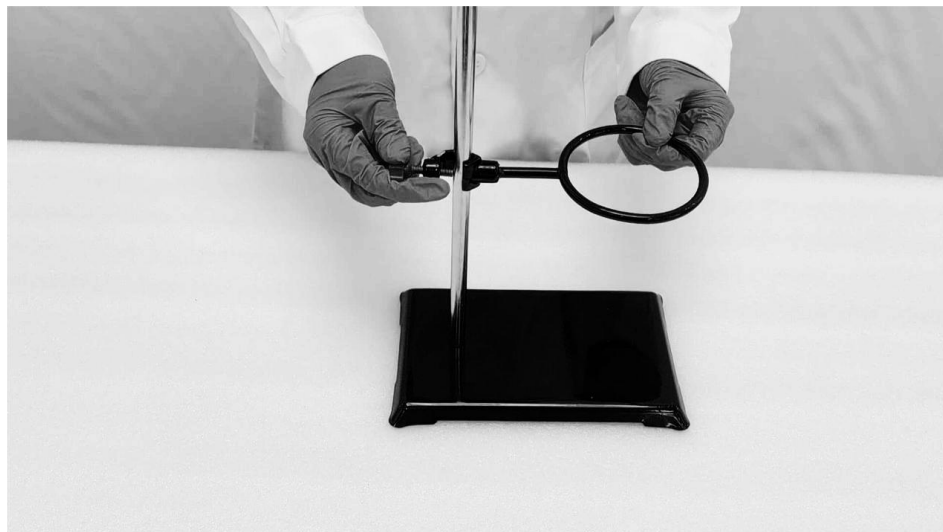


3. Install the remaining two circular ring at the appropriate height;

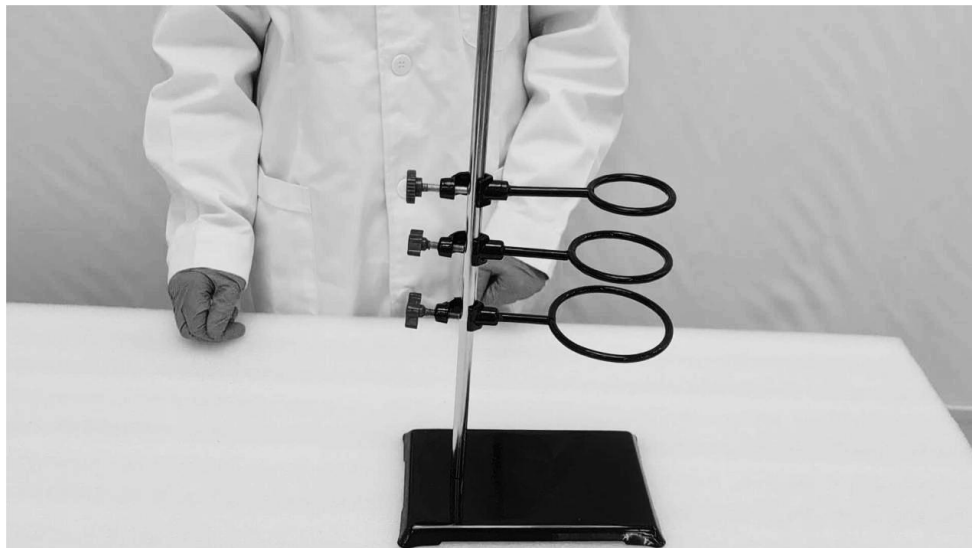


4. Install a cross clamp and the claw clamp at appropriate height;

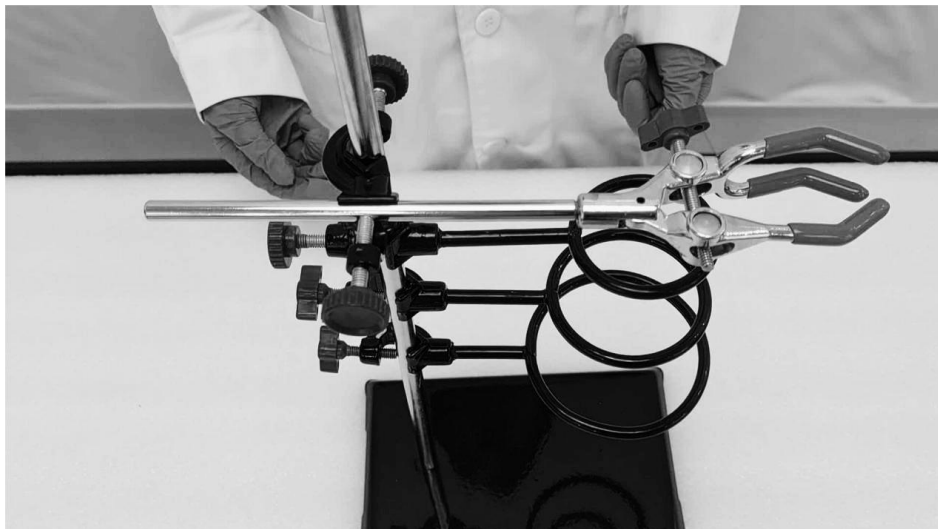

5. Install a cross clamp and the flask clamp at appropriate height;

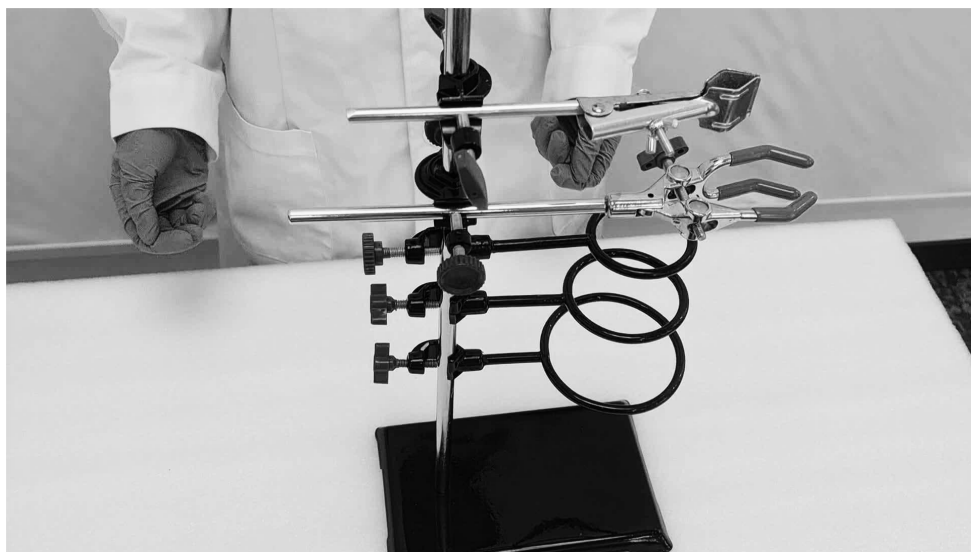

6. Repeat the previous step.

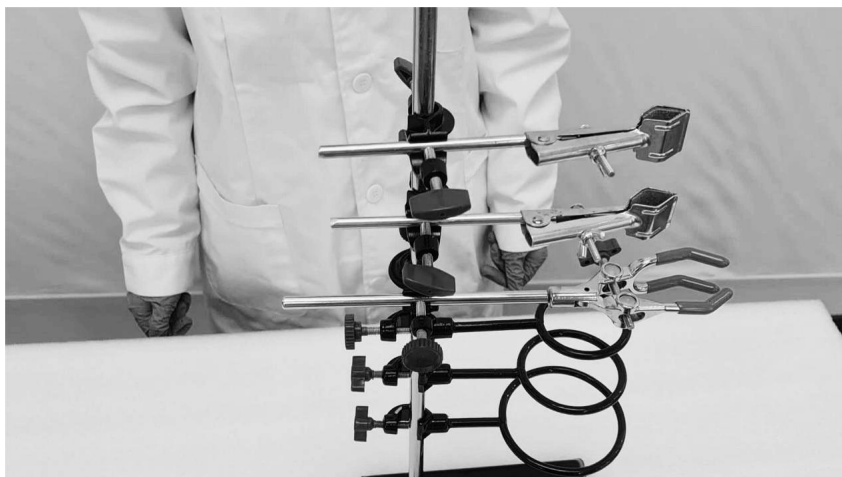

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

APARATURA DO DESTYLACJI LABORATORYJNEJ INSTRUKCJA obsługi MODELE: BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODELE: BZ-323

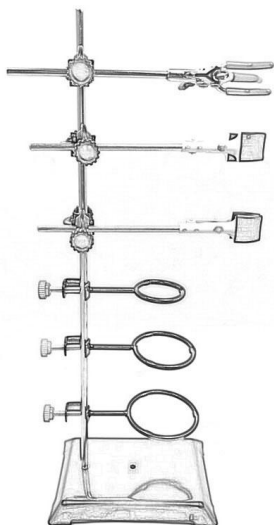

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.
Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.**

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
7. Zmontować na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać laboratoryjny aparat destylacyjny .
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru.
4. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany laboratoryjny aparat do destylacji .
5. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ INSTRUKCJE

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tego modelu . Złączki plastikowe należy zawsze obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

Nazwa części	Liczba części	Opis
Podstawa żelazna	1	Z drążkiem podporowym o długości 58 cm
Pierścień okrągły	3	1 z 5,0 cm ; 1 z 6,8 cm ; 1 z 8,5 cm
Zacisk do kolby	2	/
Zacisk pazurowy	1	czerwony
Zacisk krzyżowy	3	/

PRODUCT PARAMETER

Model	BZ-323
Liczba K to	1
Rozmiar produktu	580*210*155mm

OPERATION


1. Złóż stojak pod żelazko;




2. Zamontuj pierścień okrągły na odpowiedniej wysokości;




3. Zamontuj pozostałe dwa pierścienie okrągłe na odpowiedniej wysokości;

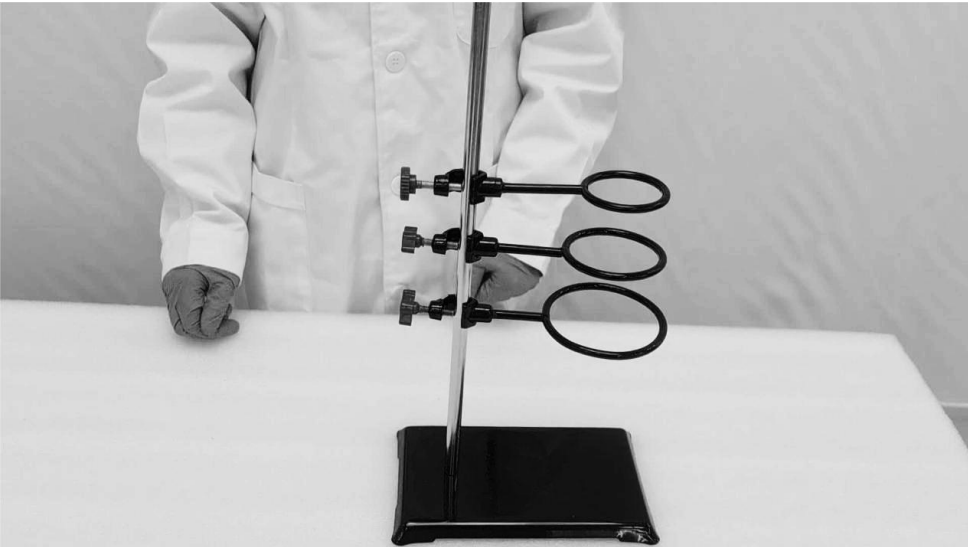


4. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk pazurowy na odpowiedniej wysokości;

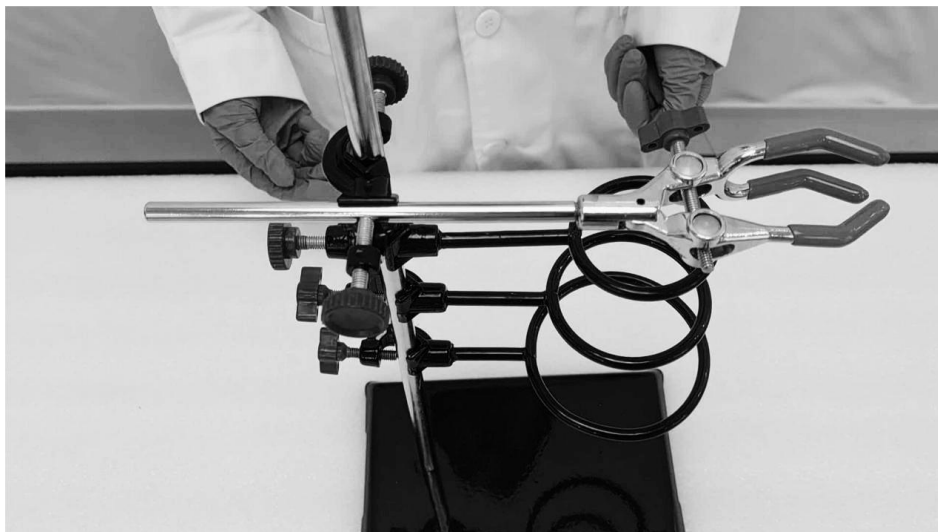

5. Zamontuj zacisk poprzeczny i zacisk kolby na odpowiedniej wysokości;

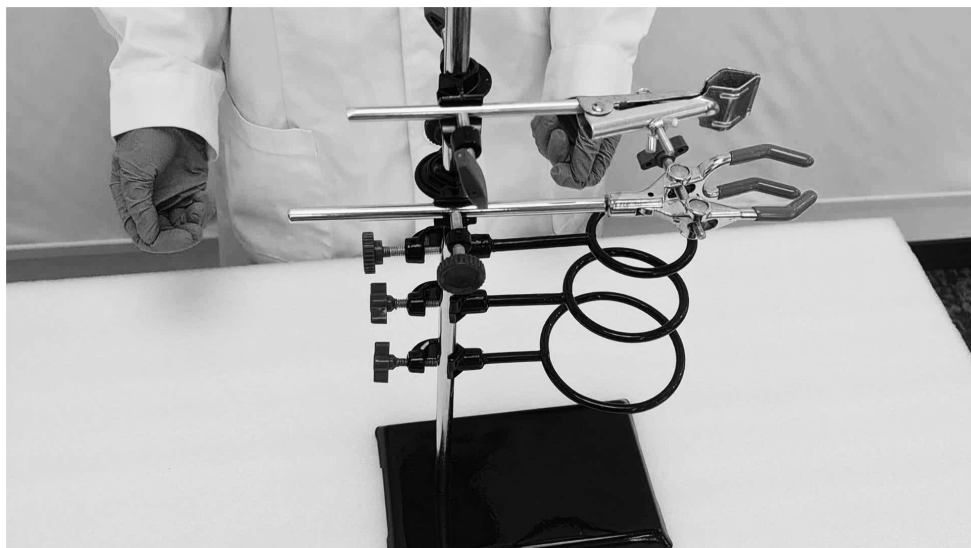

6. Powtórz poprzedni krok.

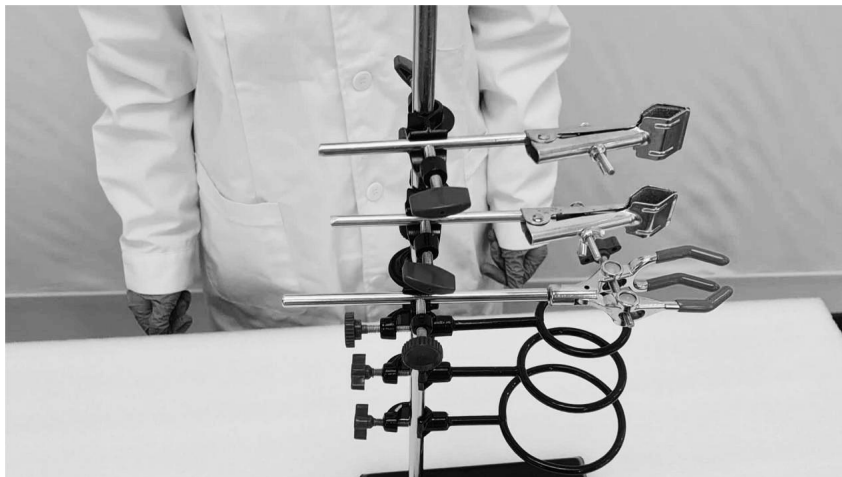

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LABORDESTILLATIONSGERÄT

Benutzerhandbuch

MODELL: BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODELL: BZ-323

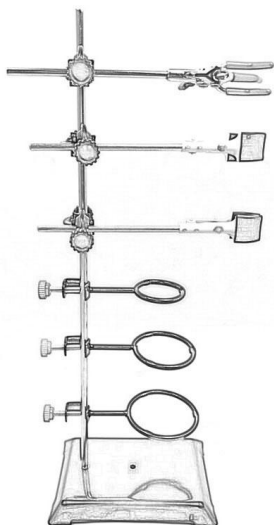

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Labordestillationsgerät sicher stehen kann .
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. SETZEN ODER STELLEN SIE SICH NICHT AUF DIESEN GEGENSTAND.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
3. Die Gewichtskapazität darf nicht überschritten werden.
4. Labordestillationsgerät sicher tragen kann .
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben . Kunststoffarmaturen sollten grundsätzlich mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Teilename	Anzahl der Teile	Beschreibung
Bügeleisen-Ständer	1	Mit 58 cm Standrohr
Kreisring	3	1 von 5,0 cm ; 1 von 6,8 cm ; 1 von 8,5 cm
Kolbenklemme	2	/
Klauenklemme	1	Rot
Kreuzklemme	3	/

PRODUCT PARAMETER

Modell	BZ-323
Anzahl der Kits	1
Produktgröße	580 x 210 x 155 mm

OPERATION


1. Montieren Sie den Bügeleisenständer.



2. Installieren Sie den Kreisring in der entsprechenden Höhe.




3. Installieren Sie die verbleibenden zwei Kreisringe in der entsprechenden Höhe.

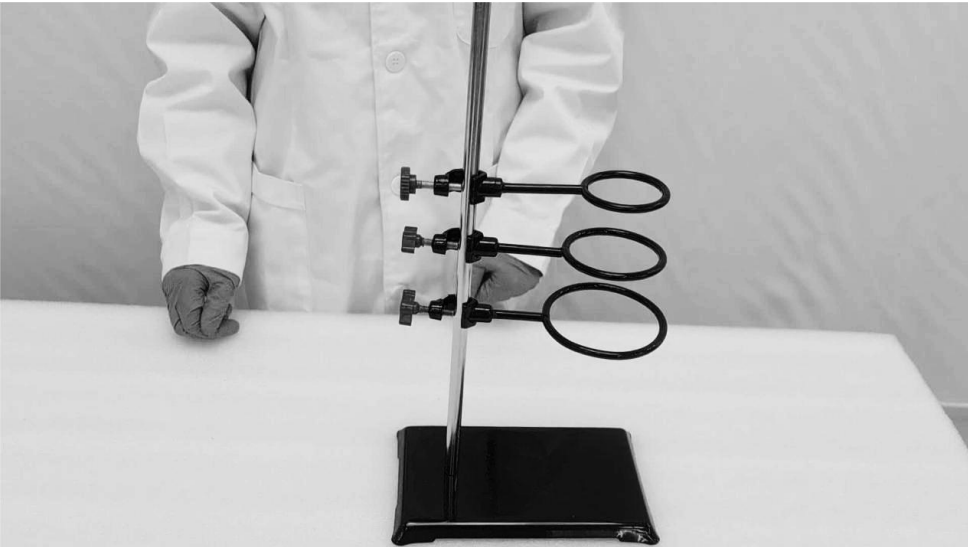


4. Installieren Sie eine Querklemme und die Klauenklemme in der entsprechenden Höhe;



5. Installieren Sie eine Querklemme und die Kolbenklemme in der entsprechenden Höhe;

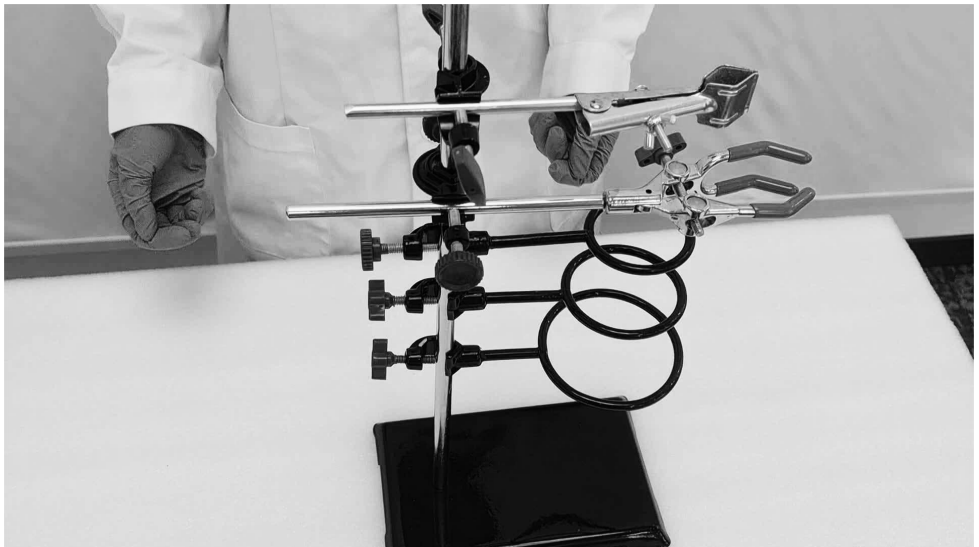

6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt.

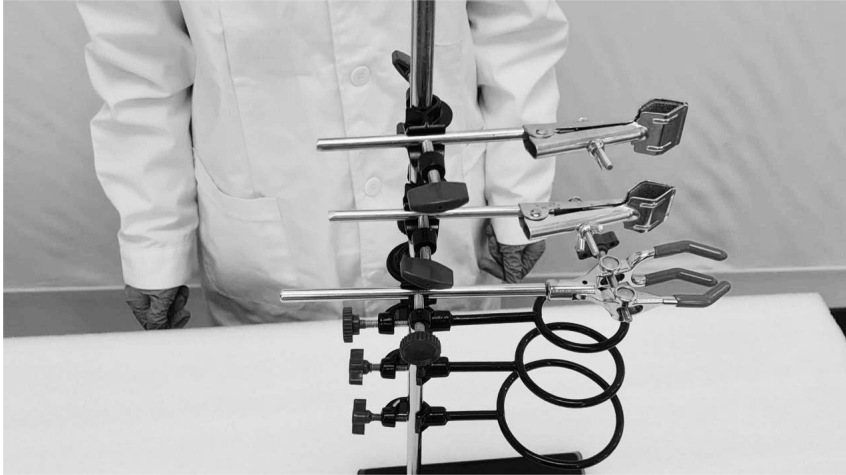

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

APPAREIL DE DISTILLATION DE LABORATOIRE

MANUEL D' utilisation

MODÈLE : BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODÈLE : BZ-323

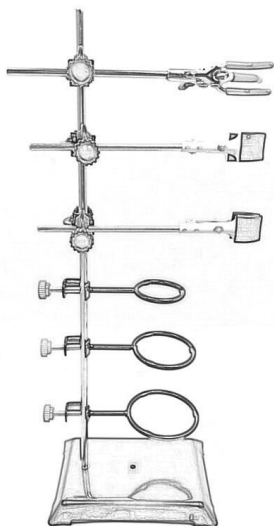

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l'appareil de distillation de laboratoire.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un appareil de distillation de laboratoire entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.

6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce modèle . Les raccords en plastique doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.


Nom des pièces	Nombre de pièces	Description
Support de fer	1	Avec poteau de support de 58 cm
Anneau circulaire	3	1 sur 5,0 cm ; 1 sur 6,8 cm ; 1 sur 8,5 cm
Pince à fiole	2	/
Pince à griffes	1	rouge
Serre-joints en croix	3	/

PRODUCT PARAMETER

Modèle	BZ-323
Nombre de K ses	1
Taille du produit	580*210*155mm

OPERATION


1. Assembler le support du fer ;

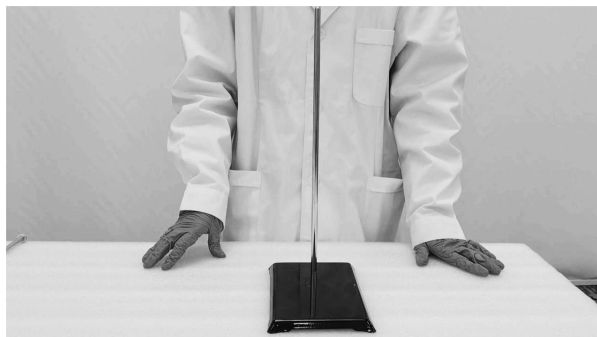

2. Installer l' anneau circulaire à la hauteur appropriée ;




3. Installez les deux anneaux circulaires restants à la hauteur appropriée ;

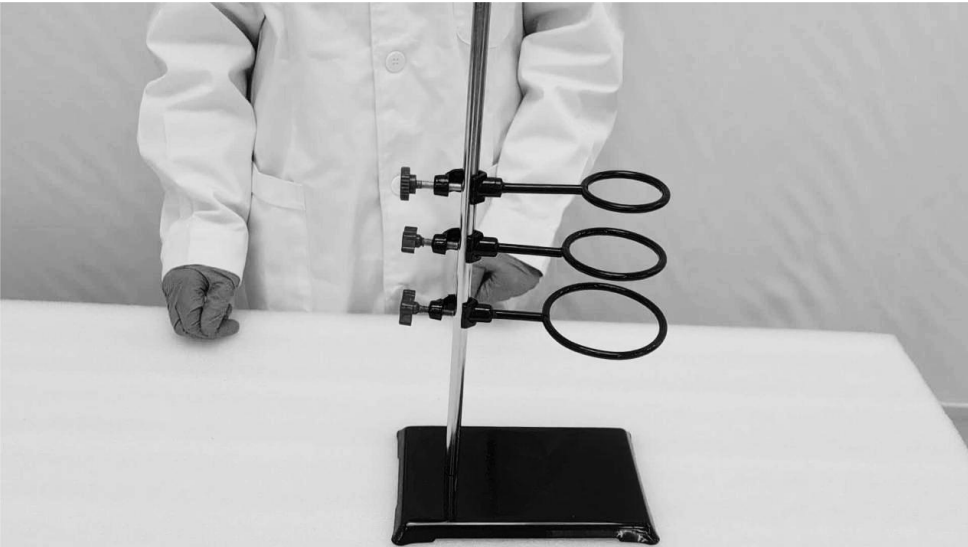


4. Installer une pince transversale et la pince à griffes à la hauteur appropriée ;



5. Installer une pince transversale et la pince à flacon à une hauteur appropriée ;

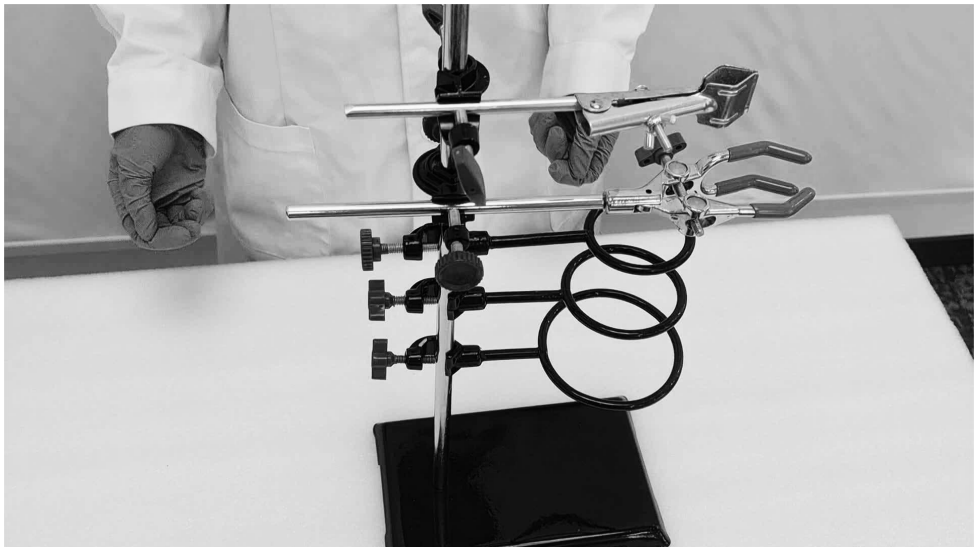

6. Répétez l'étape précédente.

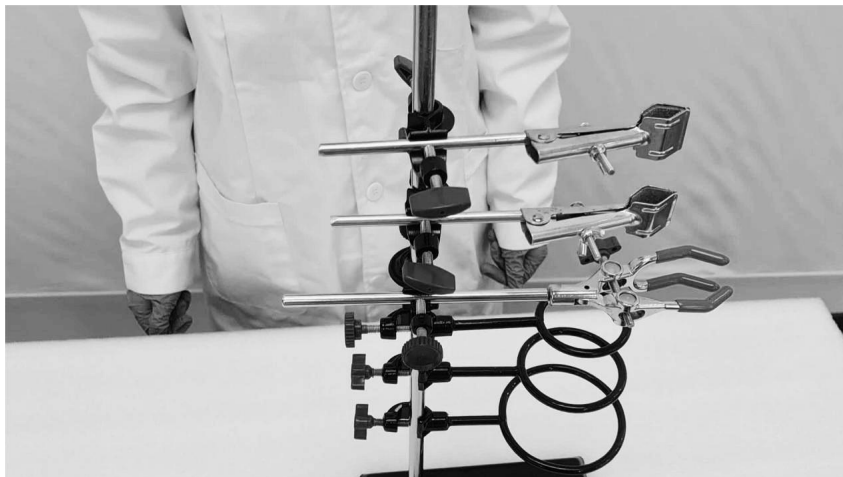

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LABORATORIUM DESTILLATIE-APPARATUUR Gebruikershandleiding

MODEL: BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODEL: BZ-323

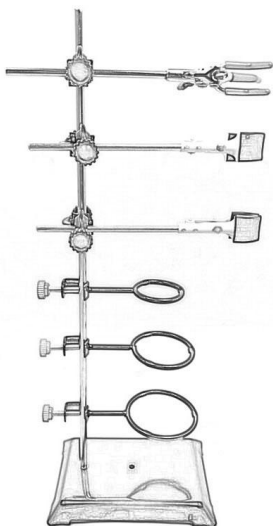

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Overschrijd het toegestane gewicht niet.
4. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
5. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor het kiezen van dit model . Kunststof fittingen moeten altijd met zorg worden behandeld. Lees alle instructies voordat u ze gebruikt. De informatie zal u helpen om de best mogelijke resultaten te bereiken.

Onderdelen naam	Aantal onderdelen	Beschrijving
IJzeren steunstandaard	1	Met 58 cm steunpaal
Cirkelvormige ring	3	1 van 5 .0 cm; 1 van 6. 8 cm; 1 van 8 .5 cm
Flesklem	2	/
Klauwklem	1	rood
Kruisklem	3	/

PRODUCT PARAMETER

Model	BZ-323
Aantal K zijn	1
Productgrootte	580*210*155mm

OPERATION


1. Monteer de ijzeren standaard;




2. Plaats de cirkelvormige ring op de juiste hoogte;




3. Plaats de overige twee cirkelvormige ringen op de juiste hoogte;

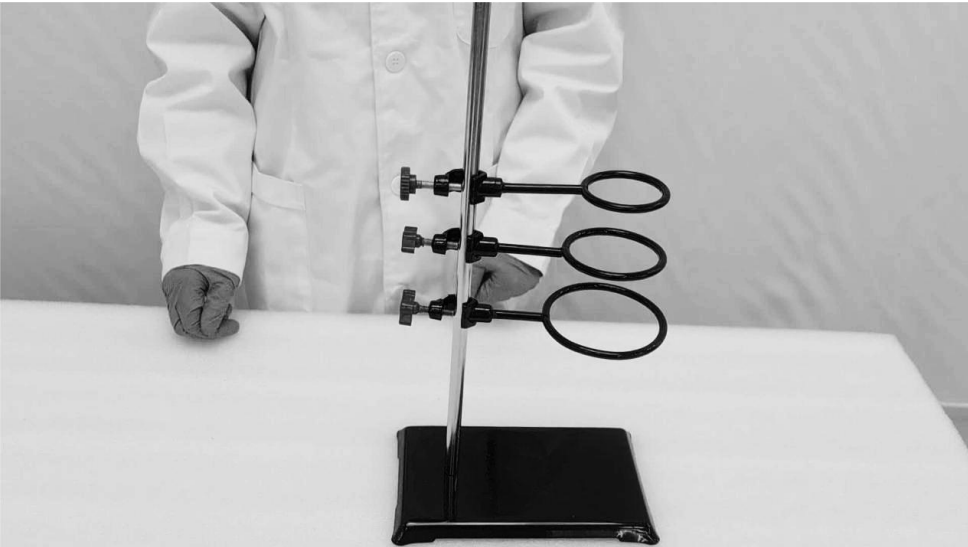


4. Plaats een kruisklem en de klauwklem op de juiste hoogte;

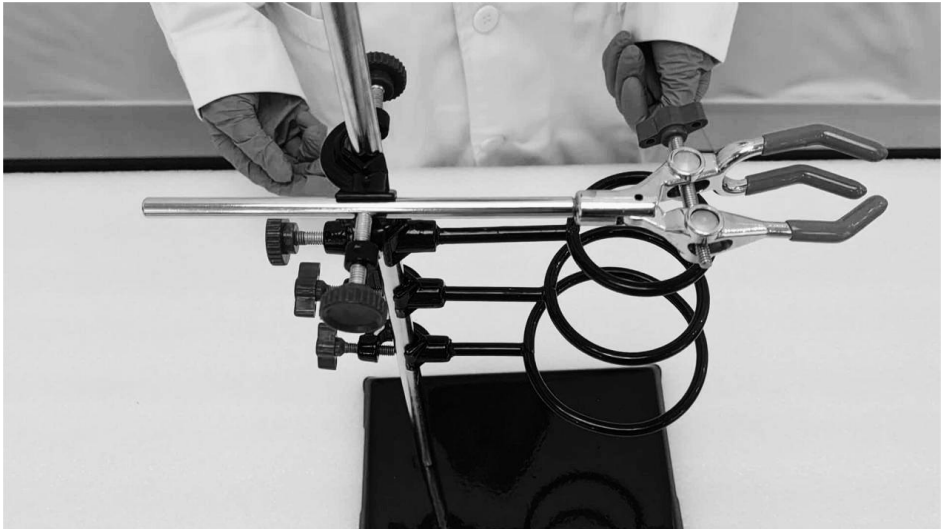

5. Plaats een kruisklem en de kolfklem op de juiste hoogte;

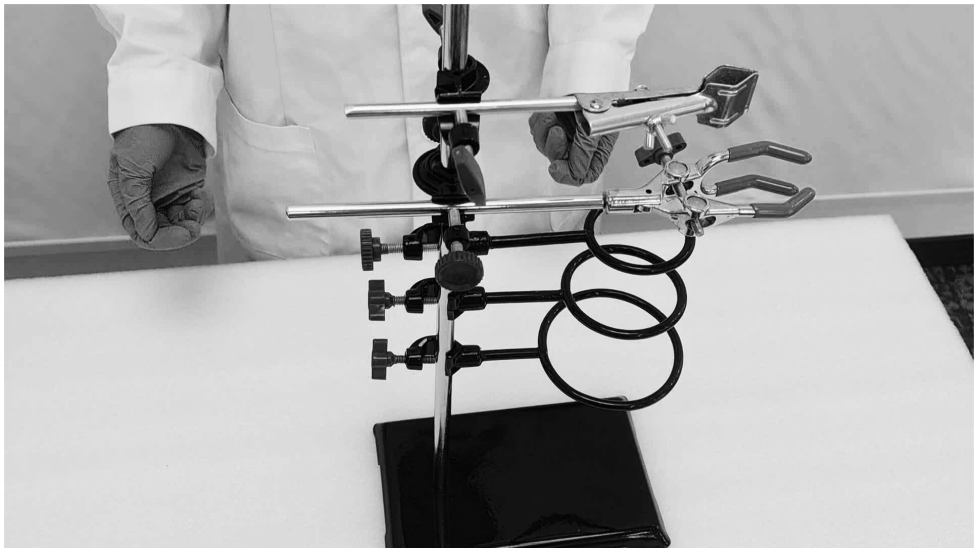

6. Herhaal de vorige stap.

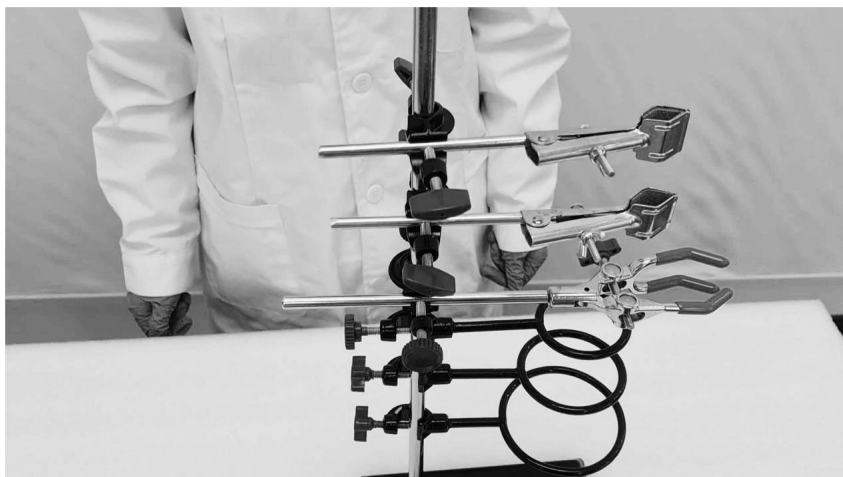

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LAB-DESTILLATIONSAPPARAT

Användarmanual

MODELL: BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODELL: BZ-323

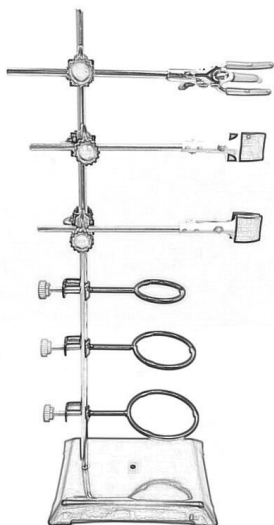

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produkttegenskaperna gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja labbdestillationsapparaten .
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fulladdad labbdestillationsapparat .
5. Använd endast som avsett.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA TESE INSTRUKTIONER

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna modell . Plastbeslag ska alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.


Delarnas namn	Antal delar	Beskrivning
Stöd för järn	1	Med 58 cm stödstång
Cirkulär ring	3	1 av 5,0 cm ; 1 av 6, 8 cm; 1 av 8,5 cm
Kolvklämma	2	/
Kloklämma	1	röd
Tvärklämma	3	/

PRODUCT PARAMETER

Modell	BZ-323
Antal K dess	1
P roduktstorlek	580*210*155mm

OPERATION


1. Montera järnstödet;

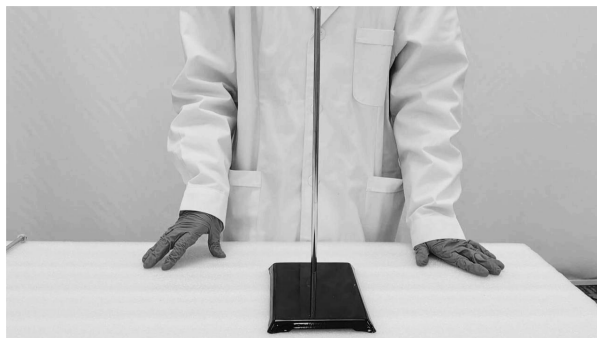


2. Installera den cirkulära ringen på lämplig höjd;




3. Installera de återstående två cirkulära ringen på lämplig höjd;

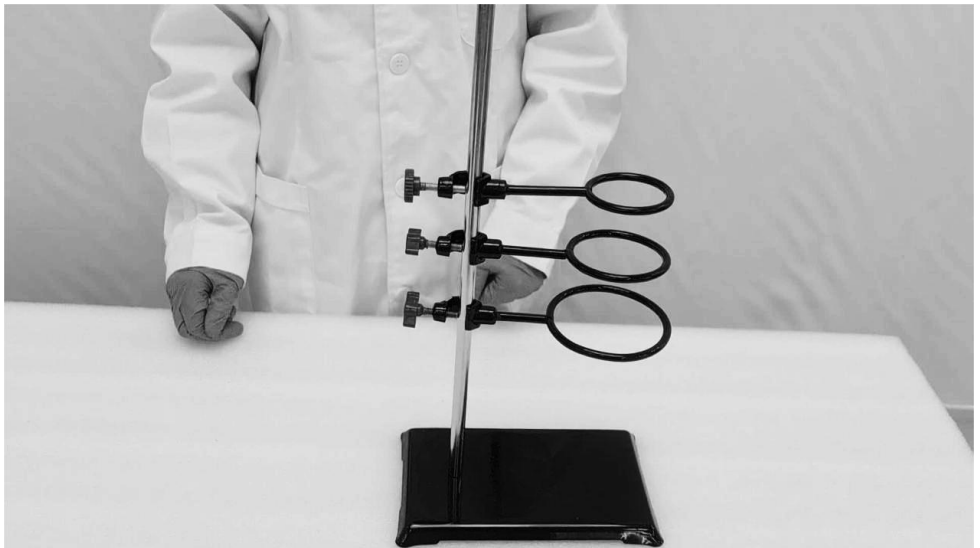


4. Installera en tvärklämma och klocklämman på lämplig höjd;

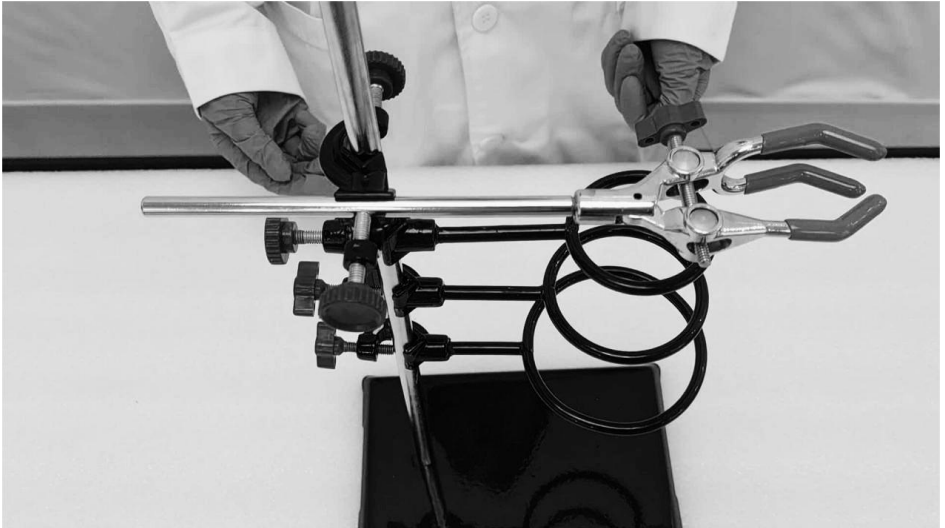

5. Installera en tvärklämma och kolvklämman på lämplig höjd;

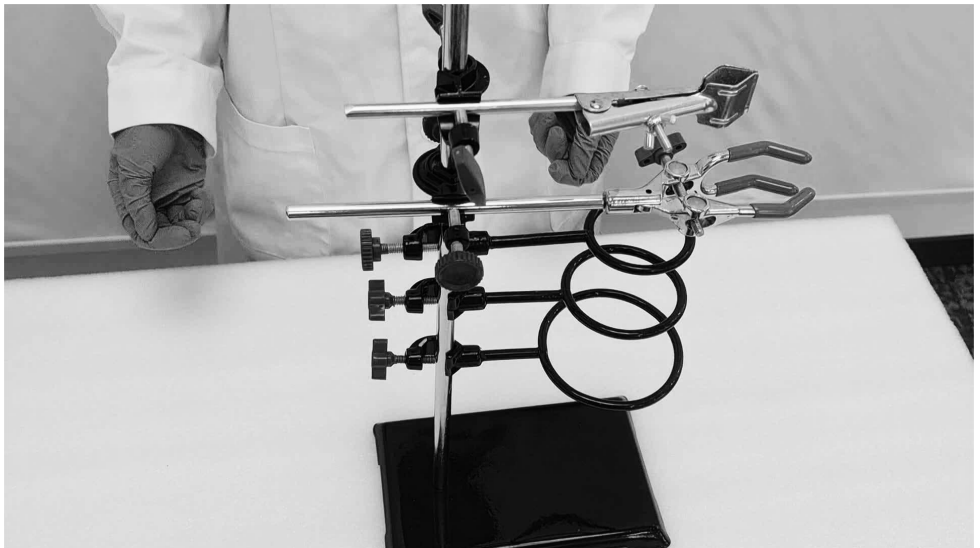

6. Upprepa föregående steg.

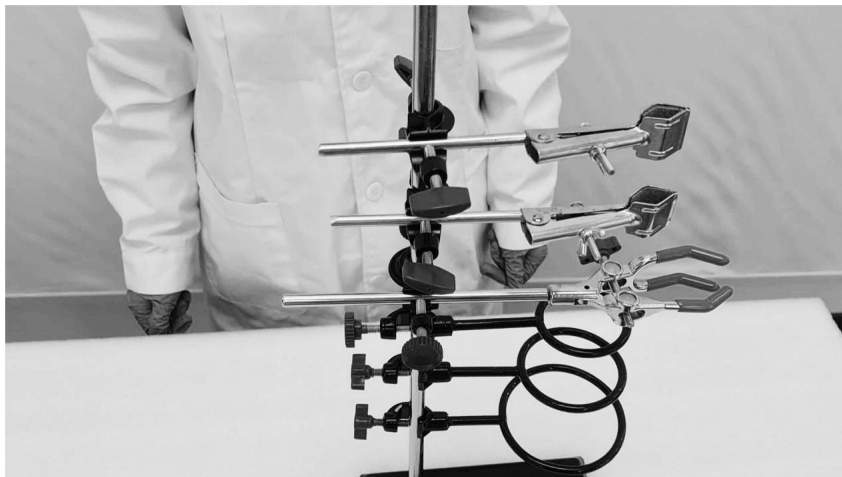

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

APARATO DE DESTILACIÓN DE LABORATORIO

MANUAL DE usuario

MODELO: BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODELO: BZ-323

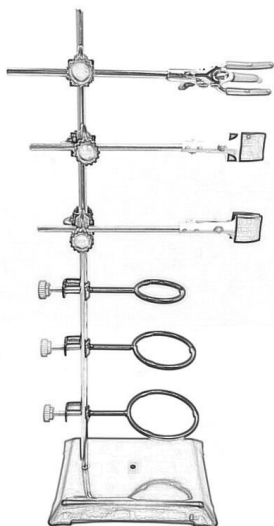

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el aparato de destilación de laboratorio .
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado .
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este modelo . Los accesorios de plástico siempre deben manipularse con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Nombre de la pieza	Número de piezas	Descripción
Soporte de hierro	1	Con poste de soporte de 58 cm
Anillo circular	3	1 de 5,0 cm ; 1 de 6,8 cm ; 1 de 8,5 cm
Abrazadera para matraz	2	/
Abrazadera de garra	1	rojo
Abrazadera transversal	3	/

PRODUCT PARAMETER

Modelo	BZ-323
Número de K suyos	1
Tamaño del producto	580*210*155 mm

OPERATION


1. Montar el soporte de hierro;



2. Instale el anillo circular a la altura adecuada;




3. Instale los dos anillos circulares restantes a la altura adecuada;

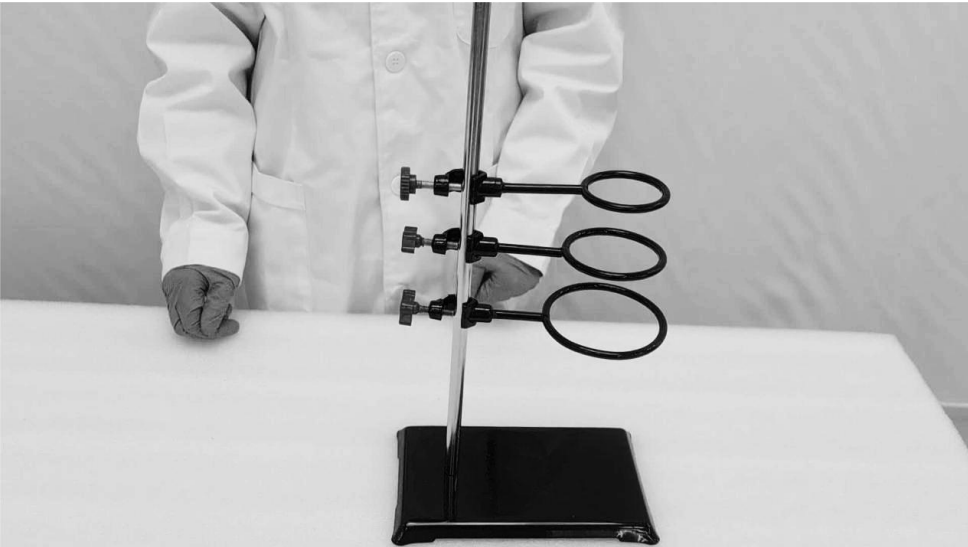


4. Instale una abrazadera transversal y una abrazadera de garra a la altura adecuada;



5. Instale una abrazadera transversal y la abrazadera del matraz a la altura adecuada;

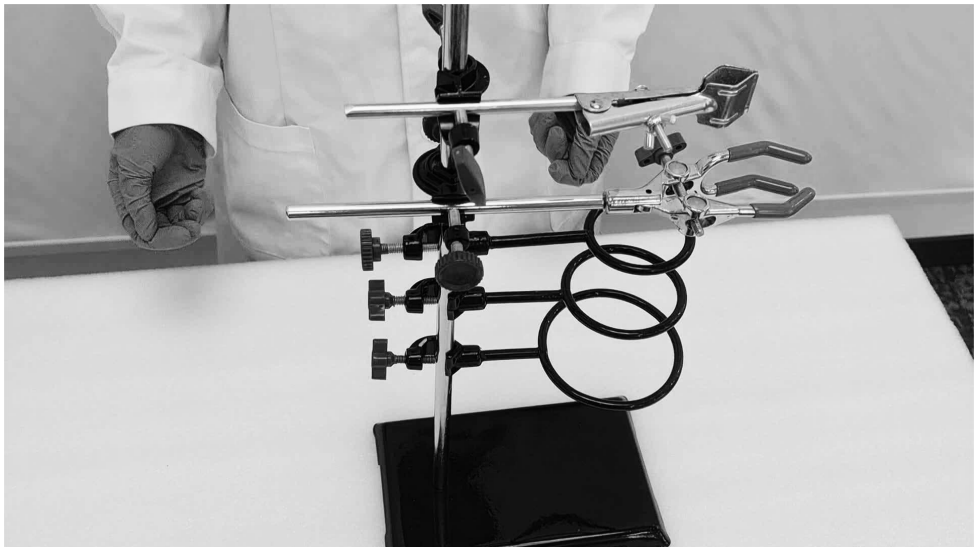

6. Repita el paso anterior.

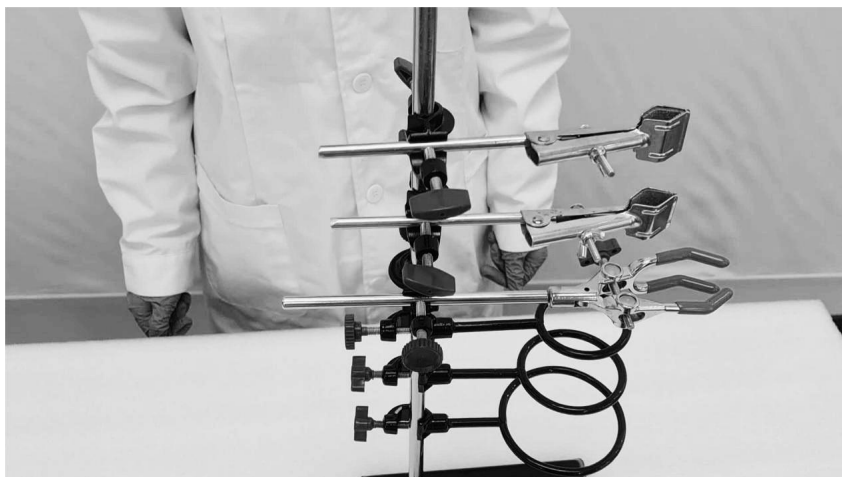

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

APPARECCHIATURA DI DISTILLAZIONE DA LABORATORIO MANUALE D' uso MODELLO: BZ-323

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAB DISTILLATION
APPARATUS

MODELLO: BZ-323

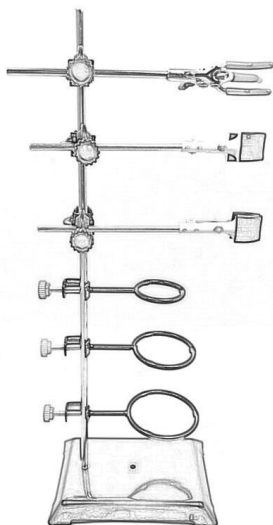

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante il montaggio indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
3. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro l'apparecchiatura di distillazione da laboratorio .
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare la capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro un apparecchio di distillazione da laboratorio completamente carico .
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

SALVA LE ISTRUZIONI TESE

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo modello . I raccordi in plastica devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Nome delle parti	Numero di parti	Descrizione
Supporto in ferro	1	Con palo di supporto da 58 cm
Anello circolare	3	1 di 5.0 cm ; 1 di 6.8 cm ; 1 di 8.5 cm
Morsetto per pallone	2	/
Morsetto a artiglio	1	rosso
Morsetto a croce	3	/

PRODUCT PARAMETER


Modello	Codice articolo BZ-323
Numero di K	1
Dimensioni del prodotto	580*210*155mm

OPERATION


1. Montare il supporto in ferro;




2. Installare l'anello circolare all'altezza appropriata;

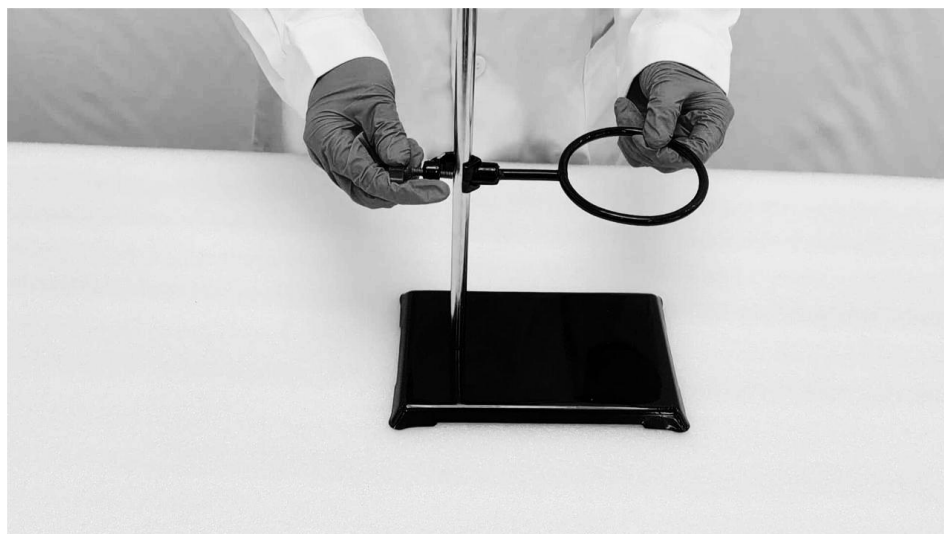


3. Installare i restanti due anelli circolari all'altezza appropriata;

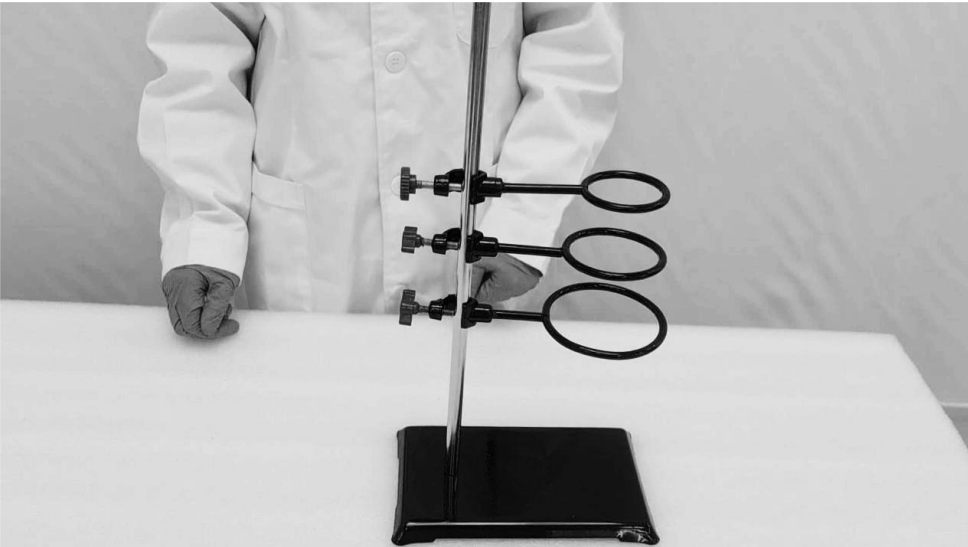


4. Installare un morsetto a croce e il morsetto a artiglio all'altezza appropriata;

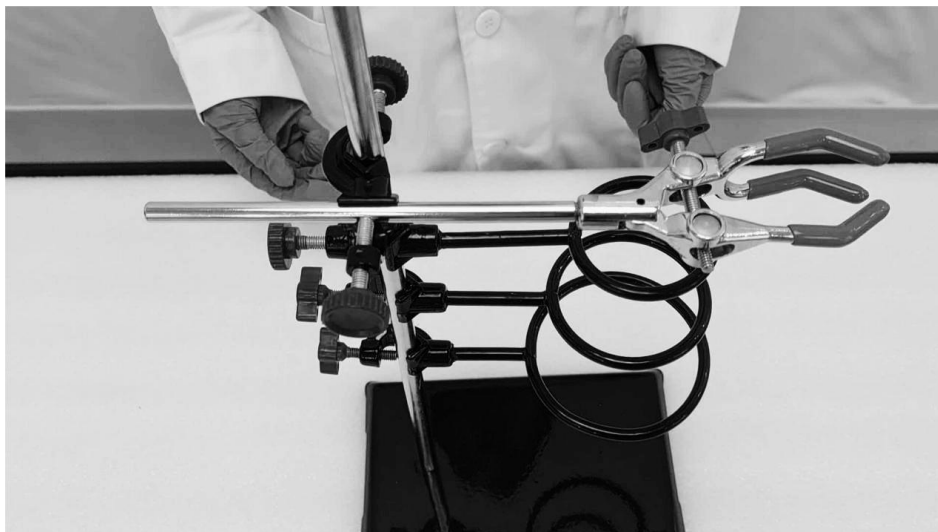

5. Installare un morsetto a croce e il morsetto per pallone all'altezza appropriata;

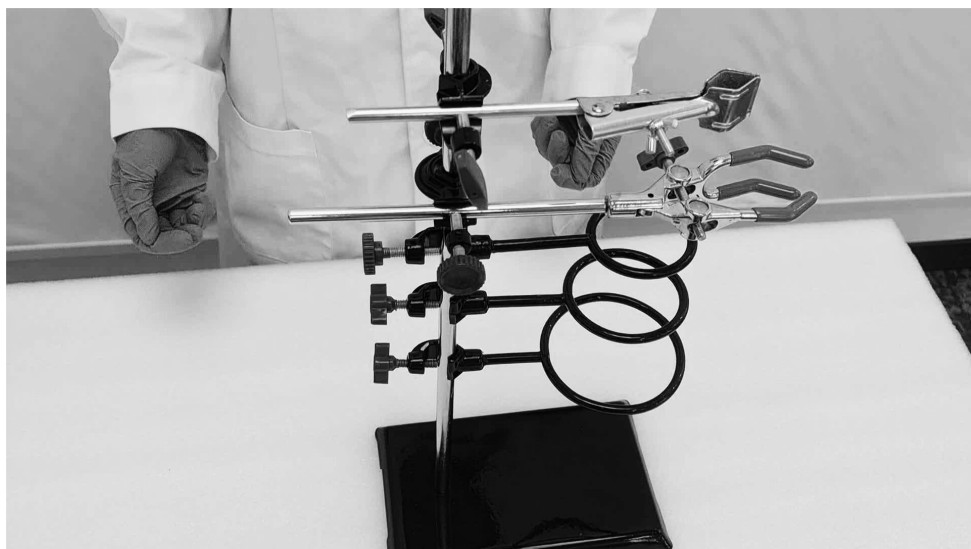

6. Ripetere il passaggio precedente.

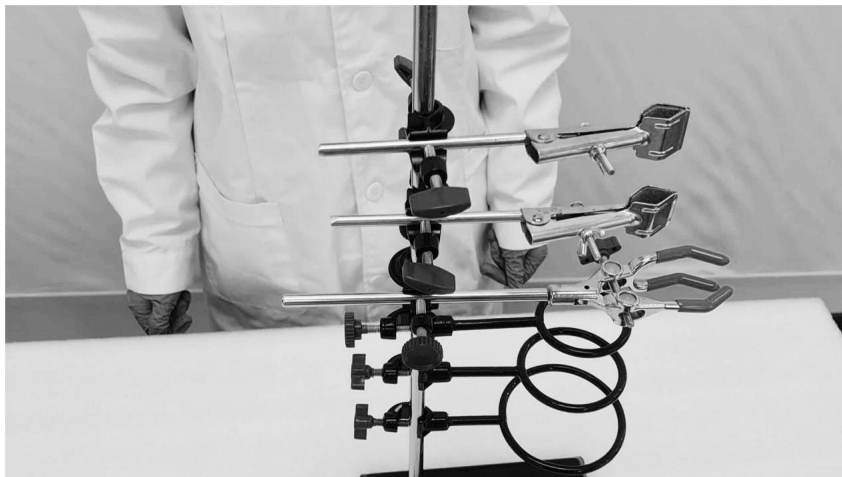

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support