



Affordable. Reliable. Home Improvement.

OVERBED TABLES

MODEL: GT-SR65-B7

Installation Guide:

https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2tVTtxGLA3f&index=2



Technical Support and E-Warranty Certificate


www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

OVERBED TABLES

MODEL: GT-SR65-B7

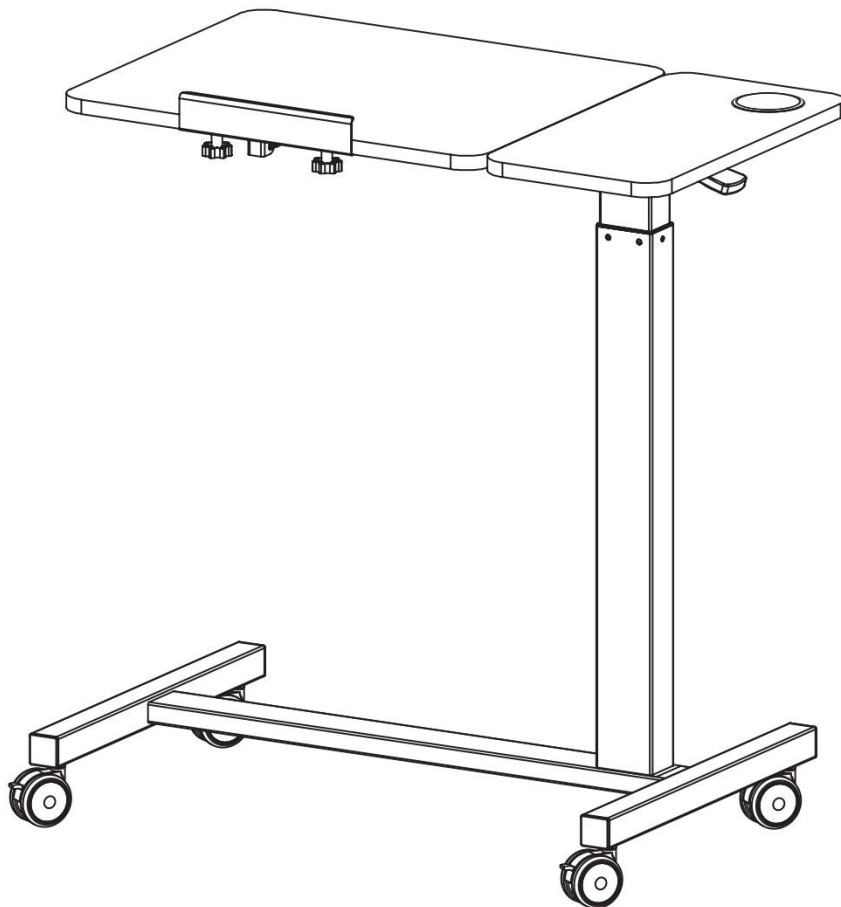

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Overbed Tables.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Overbed Tables.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

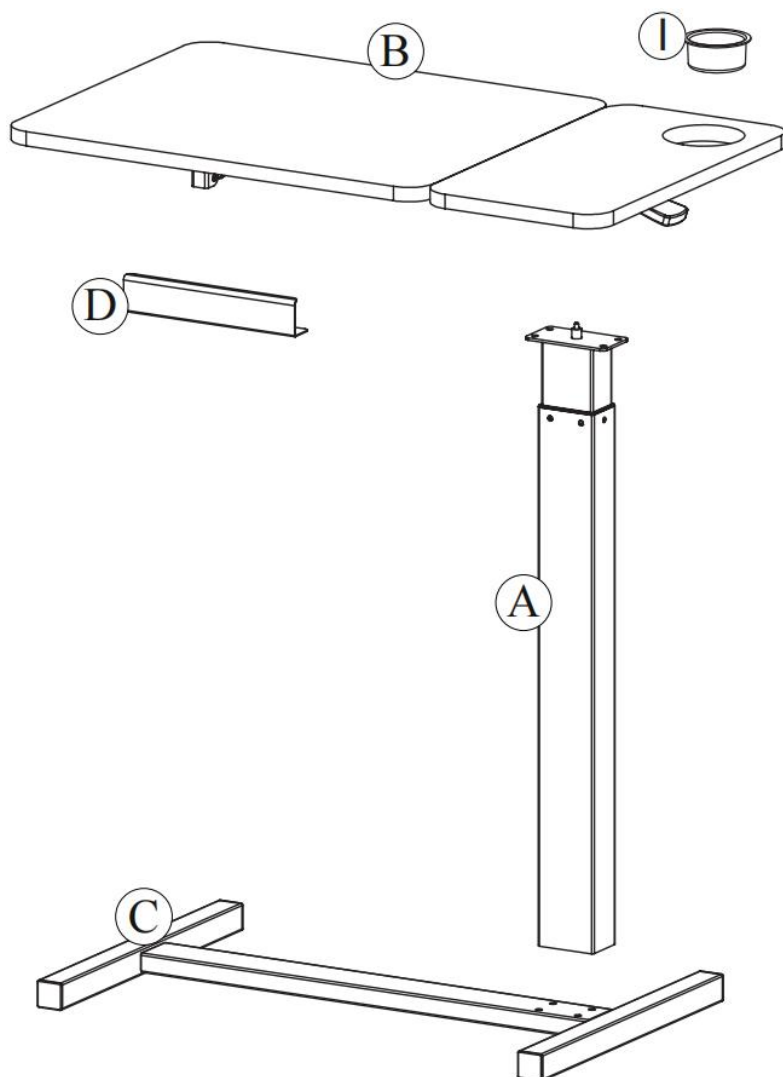

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


ASSEMBLY STEP


STEP1: Installation of lifting bar.

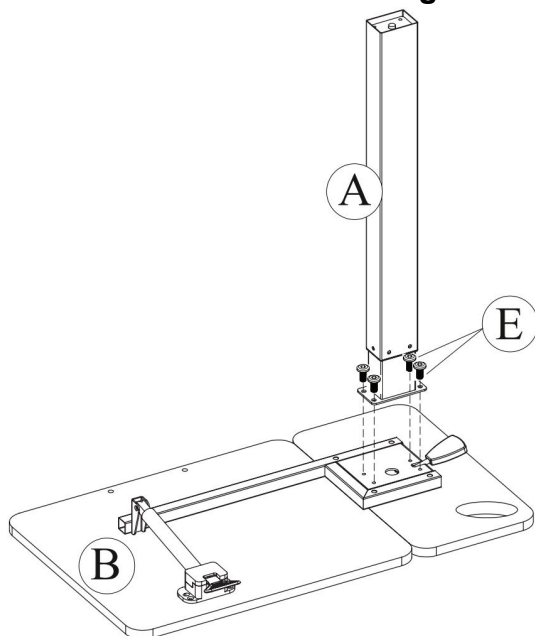


	
E x 4	H x 1

STEP2: Mounting feet.

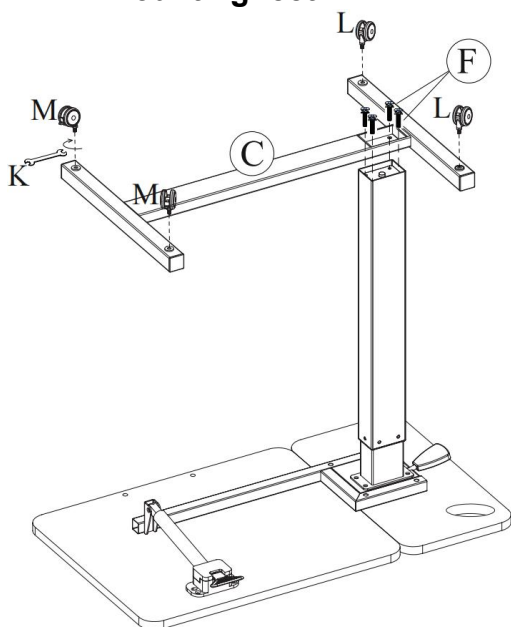


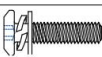	
	K x 1
	
L x 2	M x 2
	
F x 4	H x 1


STEP3: Placement of cup holders.

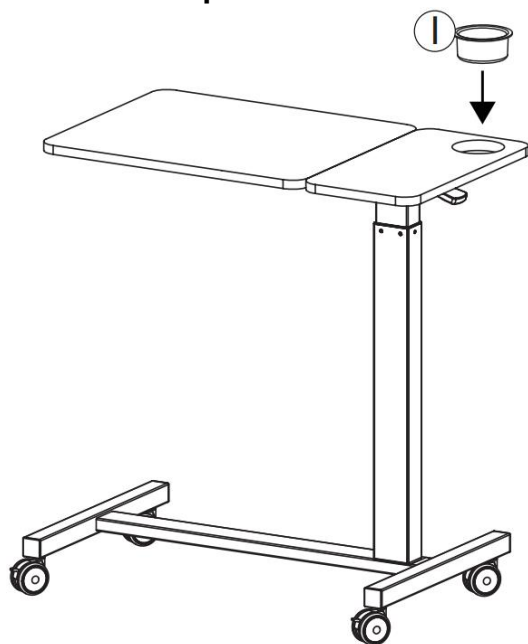


STEP4: Installation of baffle.

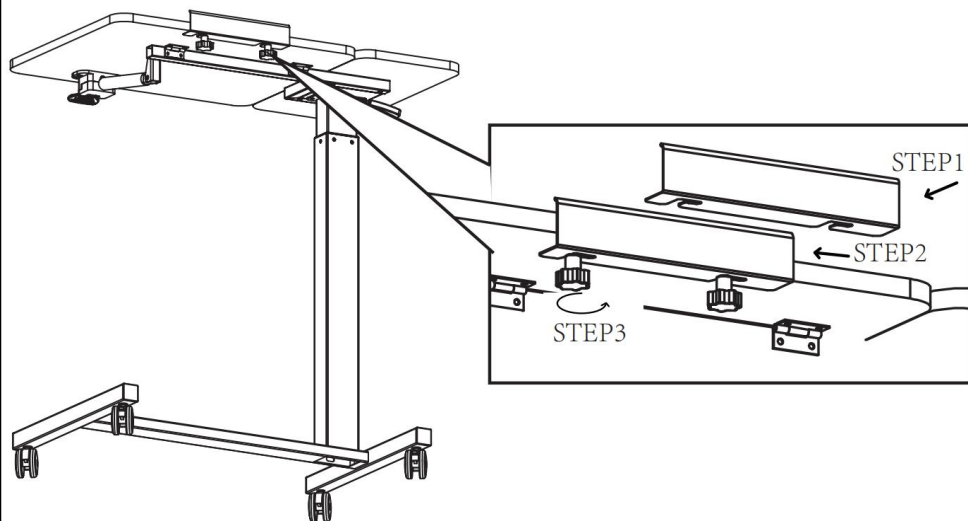

Desktop lifting operation mode:


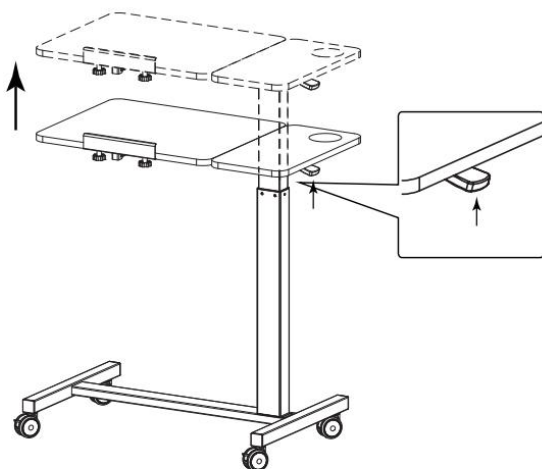


Lift the paddle for lifting the table top.

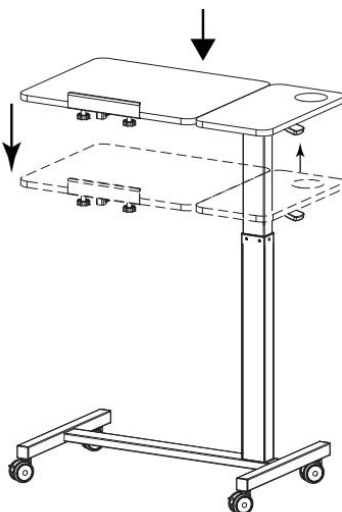

Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Desktop flipping operation mode:

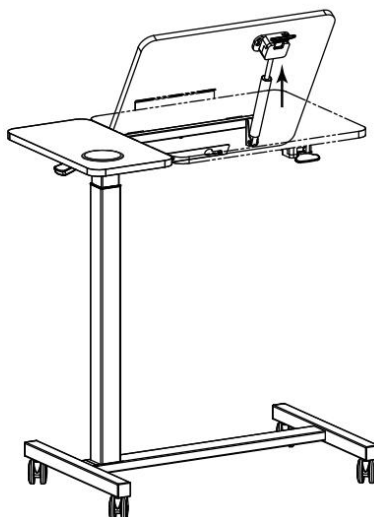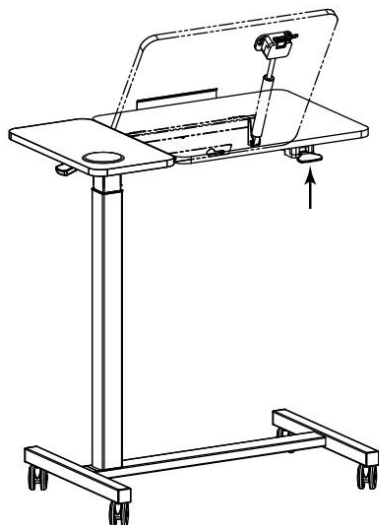

Turn the crank to rotate the surface to 60°.

WARNING: There is a risk that objects on the surface may fall off when rotating the surface. Before performing this movement, make sure that there are no objects on the surface that could fall off and be damaged.

PRODUCT PARAMETER

Model	GT-SR65-B7
Safe Loading Weight	30kg near columns 10kg at table edge
Colour	Wood + Black
Angle of Rotation	0~60°
Product Size	700*400*1085mm (highest position) 700*400*705mm (lowest position)

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLES DE LIT

MODÈLE : GT-SR65-B7

Guide d'installation :

[https://www.youtube.com/watch?v=](https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2W4vzG-A3f&index=2)

[_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2W4vzG-A3f&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2W4vzG-A3f&index=2)



Assistance technique et certificat de garantie


électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLES DE LIT

MODÈLE : GT-SR65-B7

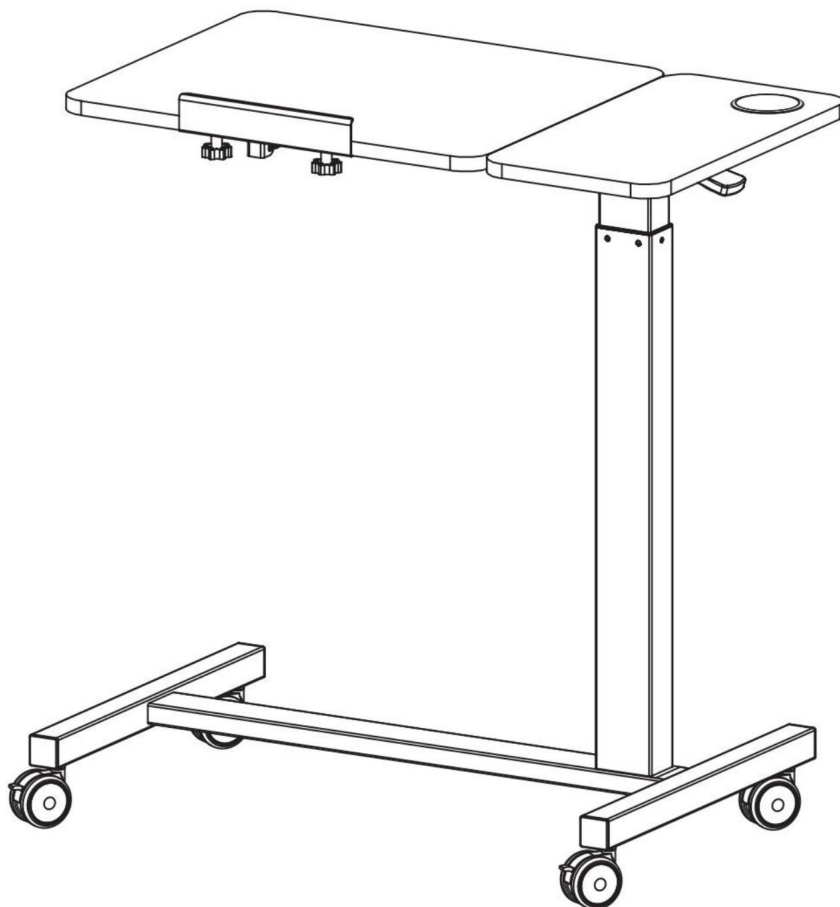

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage


1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Montage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir les tables de lit.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité. prend en charge une table de lit entièrement chargée.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL


LISTE DES PIÈCES

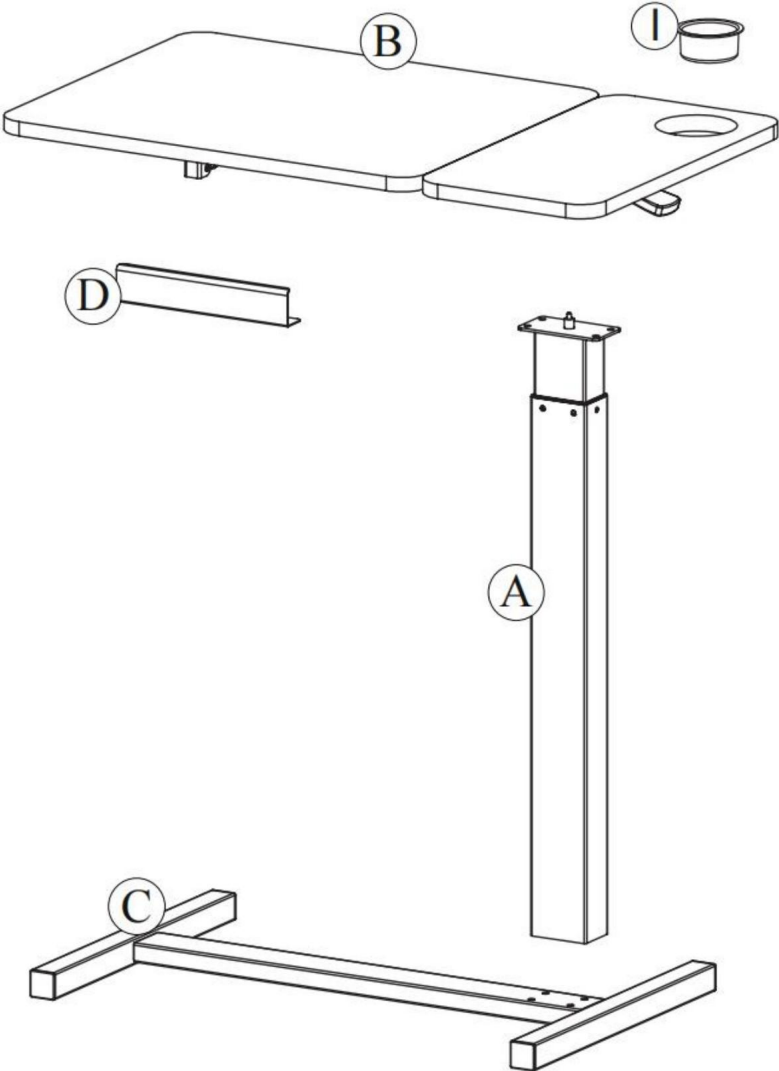

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1 : Installation de la barre de levage.

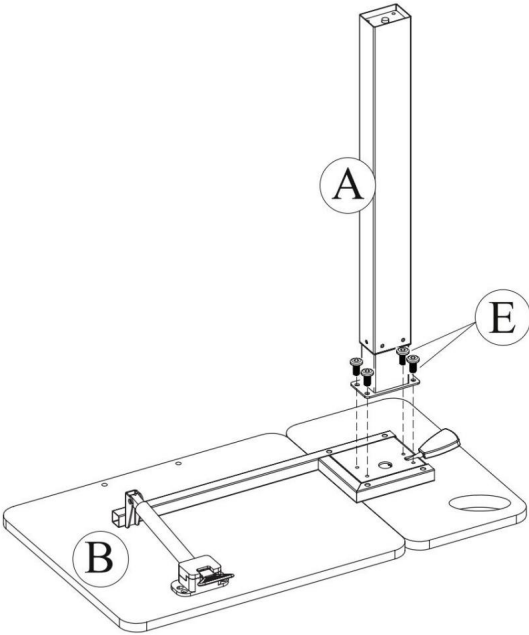


	
Ex4	Hx1

ÉTAPE 2 : Montage des pieds.

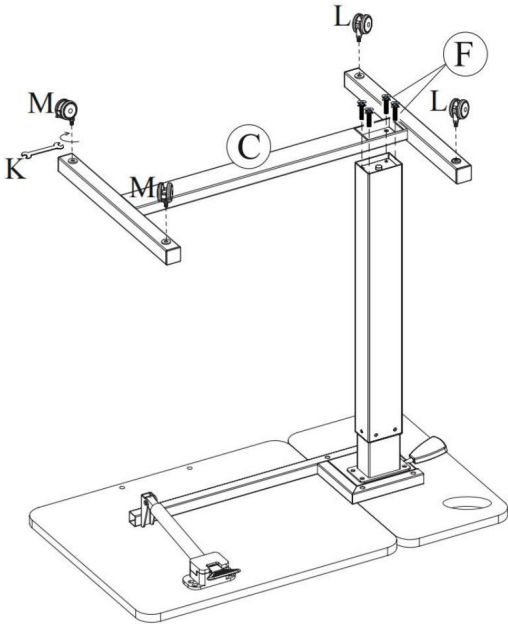


	 Kx1
 Lx2	 Mx2
 Fx4	 Hx1


ÉTAPE 3 : Placement des porte-gobelets.

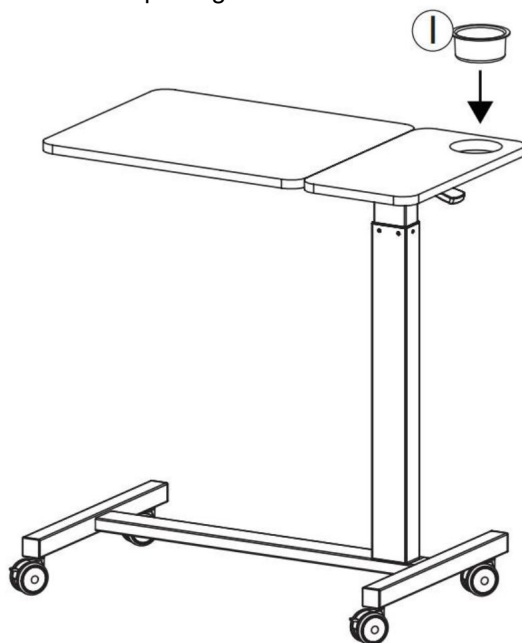


ÉTAPE 4 : Installation du déflecteur.

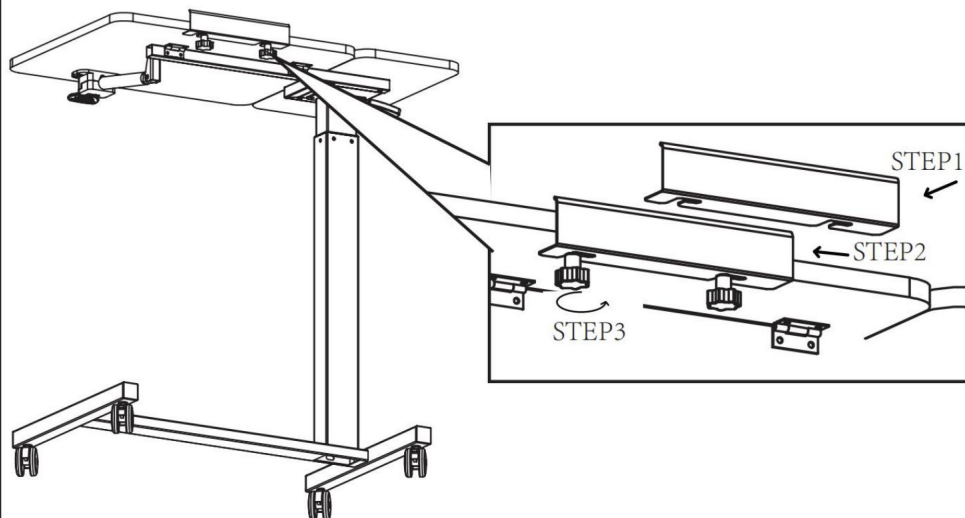

Mode de fonctionnement du levage du bureau :


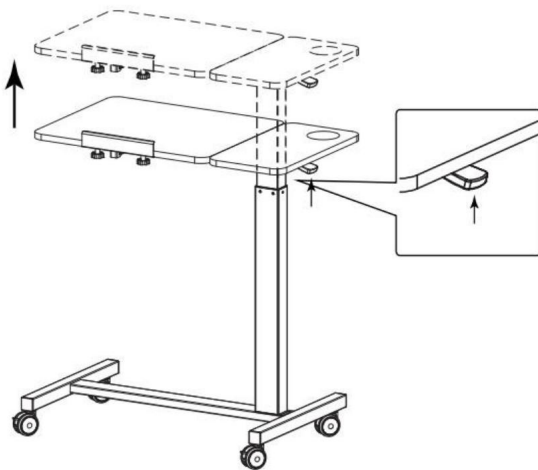


Lift the paddle for lifting the table top.

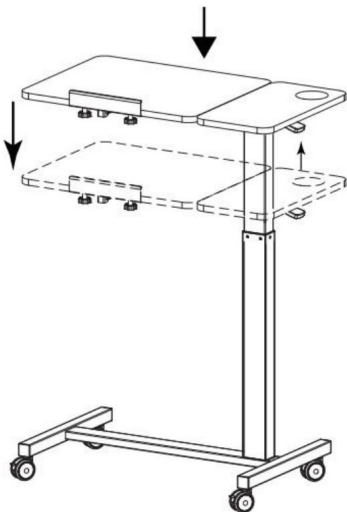

Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Mode de fonctionnement du retournement du bureau :

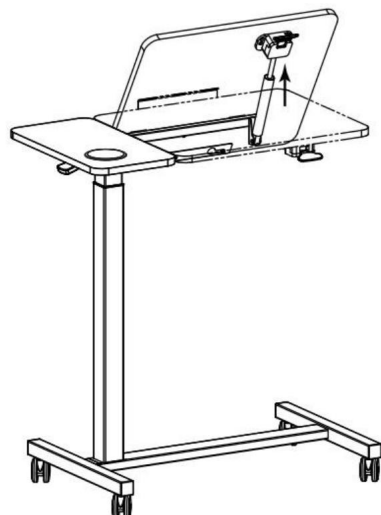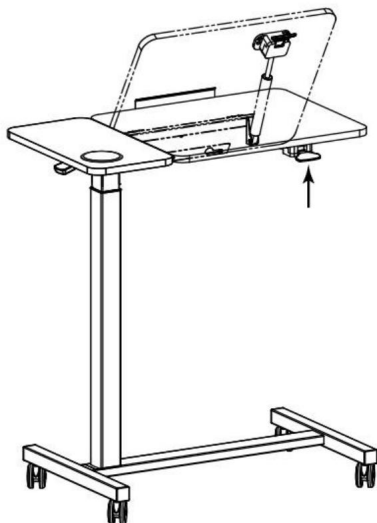

Tournez la manivelle pour faire pivoter la surface à 60°.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque que des objets se trouvant sur la surface puissent tomber lors de la rotation de la surface. Avant d'effectuer ce mouvement, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur la surface qui pourrait tomber et être endommagé.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	GT-SR65-B7
Poids de chargement sécuritaire	30 kg près des colonnes 10 kg au bord de la table
Couleur	Bois + Noir
Angle de rotation	0 à 60 °
Taille du produit	700*400*1085mm (position la plus haute) 700*400*705mm (position la plus basse)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Bureau
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
69, rue Mainzer Landstr.,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÜBERBETT-TISCHE

MODELL: GT-SR65-B7

Installationsanleitung:

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7w6Zv7_7k6L7_3f&index=1)

[v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7w6Zv7_7k6L7_3f&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7w6Zv7_7k6L7_3f&index=1)



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat


www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÜBERBETT-TISCHE

MODELL: GT-SR65-B7

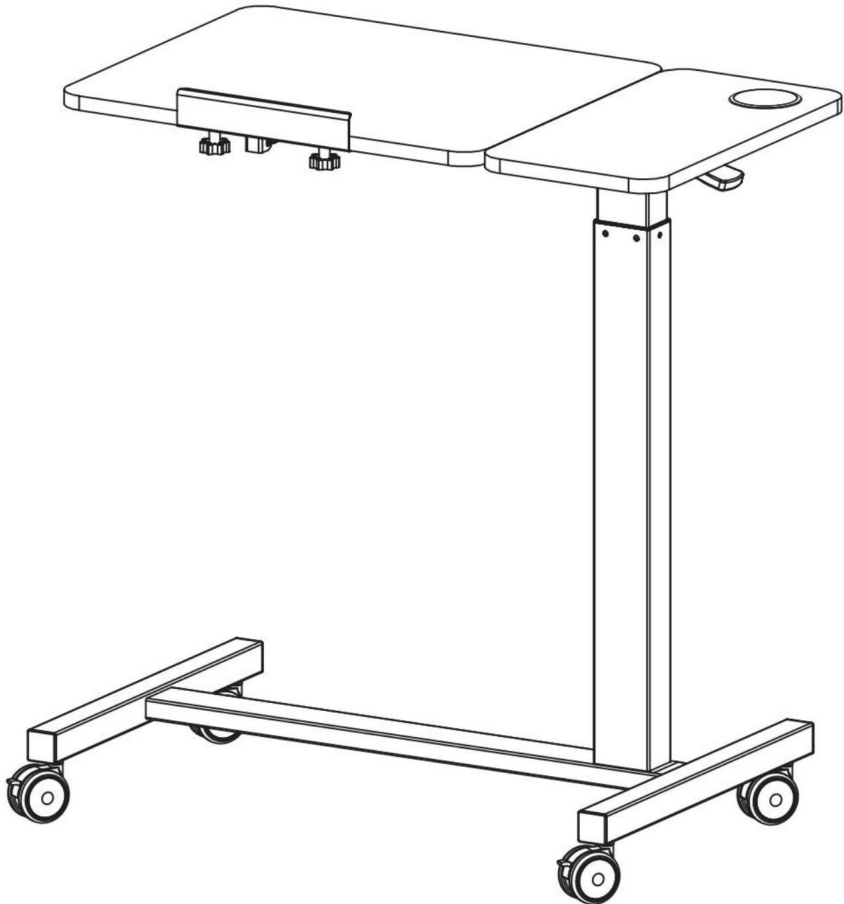

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher zur Unterstützung der Überbettische.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt einen voll beladenen Überbettisch.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


TEILELISTE

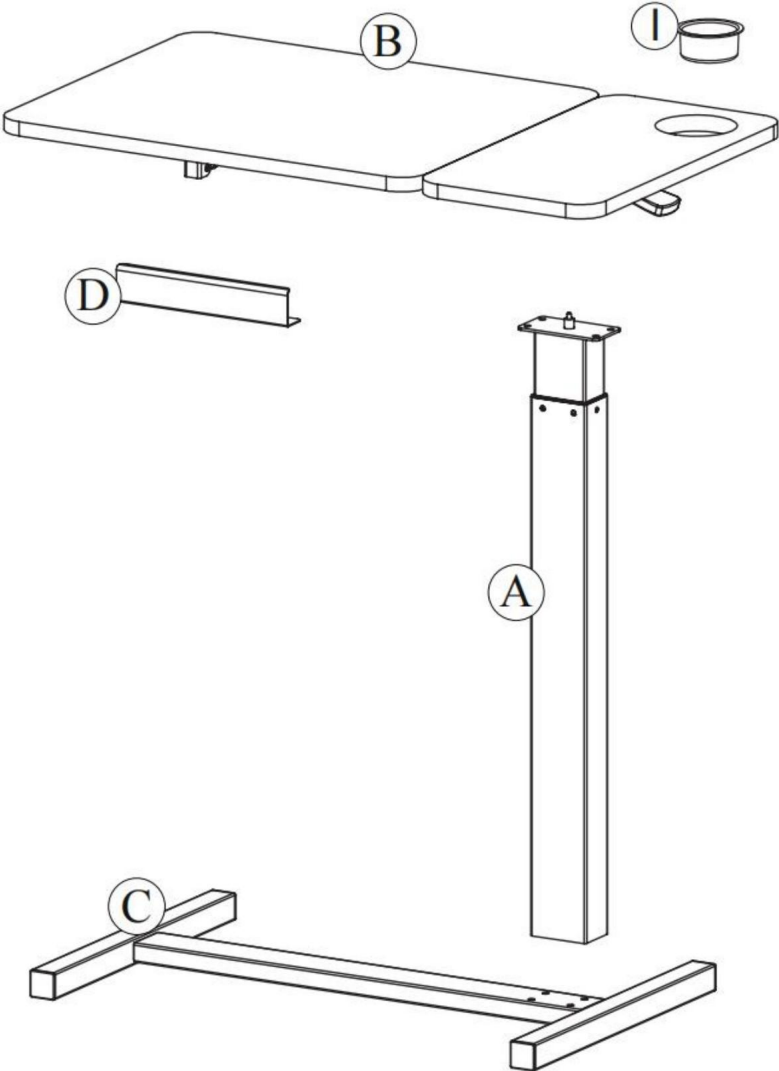

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


MONTAGESTRITT

SCHRITT 1: Installation der Hebestange.

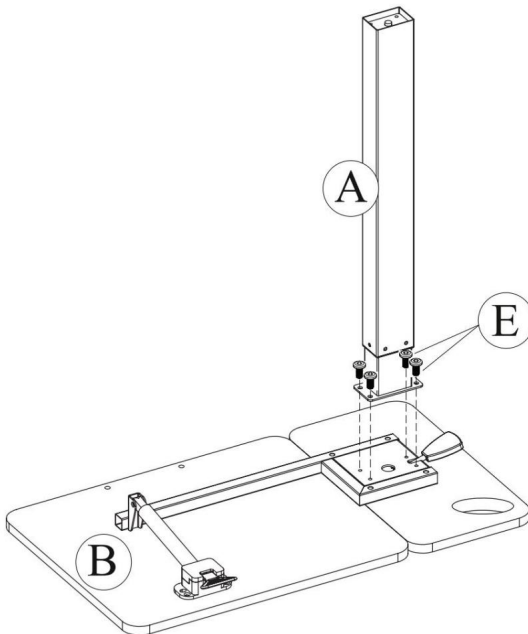


	
Ex4	Hx1

SCHRITT 2: FüÙe montieren.

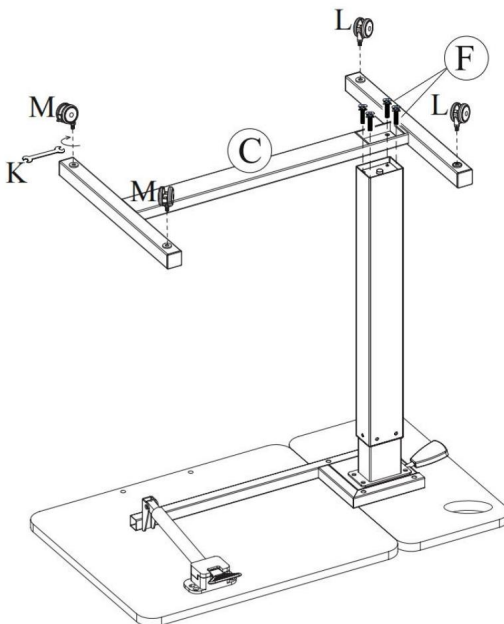


	
	Kx1
	
Lx2	Mx2
	
Fx4	Hx1


SCHRITT 3: Platzierung der Getränkehalter.

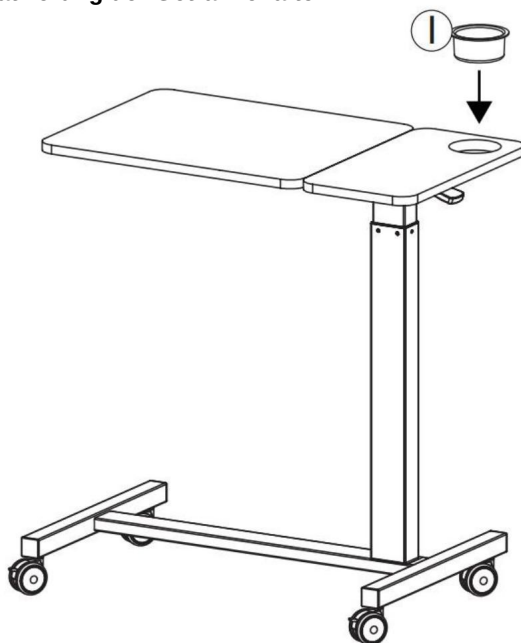


SCHRITT 4: Installation der Schallwand.

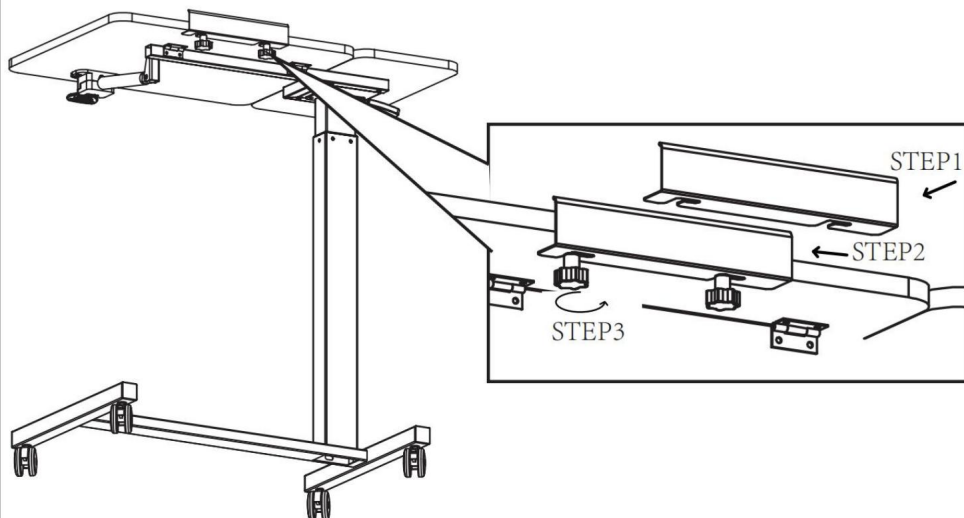

Betriebsart des Desktop-Hebens:


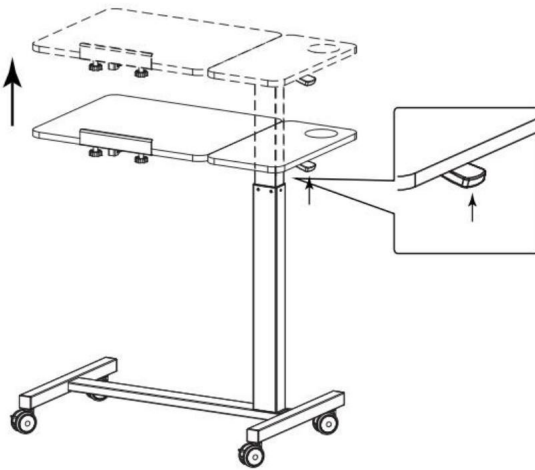


Lift the paddle for lifting the table top.

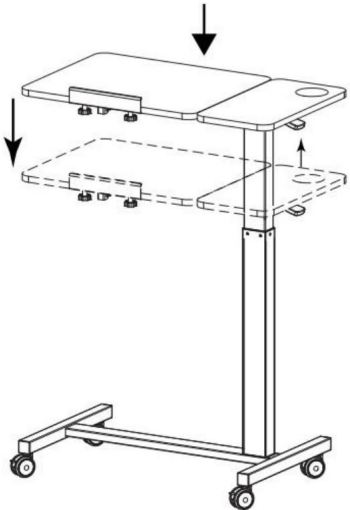

Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Betriebsmodus zum Umdrehen des Desktops:

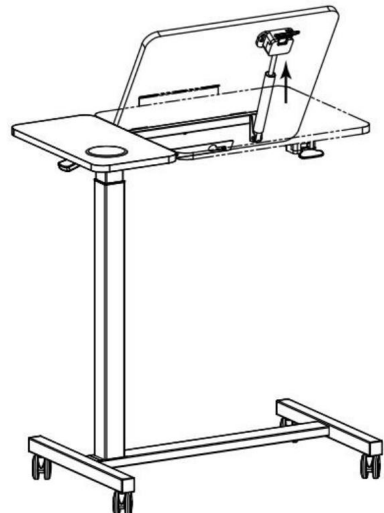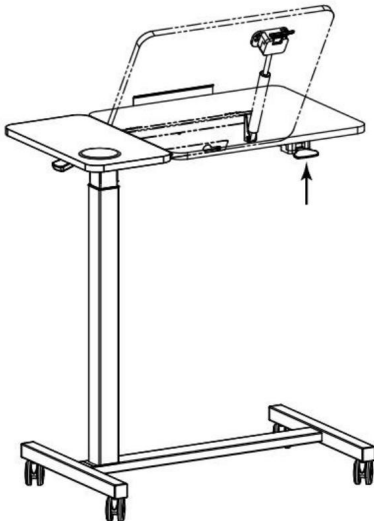

Durch Drehen der Kurbel kann die Oberfläche um 60° gedreht werden.

ACHTUNG: Beim Drehen der Oberfläche besteht die Gefahr, dass Gegenstände von der Oberfläche herunterfallen. Stellen Sie vor der Ausführung dieser Bewegung sicher, dass sich keine Gegenstände auf der Oberfläche befinden, die herunterfallen und beschädigt werden könnten.

PRODUKTPARAMETER

Modell	GT-SR65-B7
Sicheres Ladegewicht	30kg im Säulenbereich 10kg an der Tischkante
Farbe	Holz + Schwarz
Drehwinkel	0~60°
Produktgröße	700*400*1085mm (höchste Position) 700*400*705mm (niedrigste Position)

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

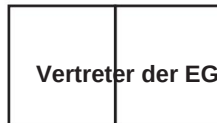

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAVOLINI DA LETTO

MODELLO: GT-SR65-B7

Guida all'installazione:

Italiano: https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2tVTtxGLA3f&index=2




Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAVOLINI DA LETTO

MODELLO: GT-SR65-B7

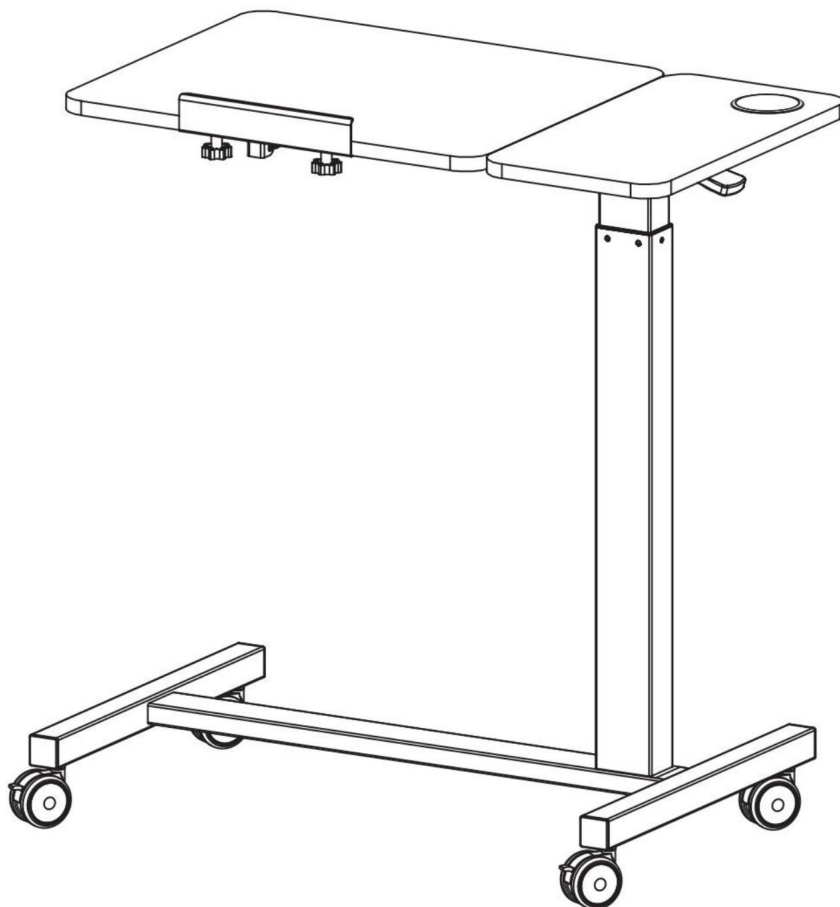

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a sostegno dei tavolini servitori.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare tavolini sopraletto completamente carichi.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE


ELENCO DELLE PARTI

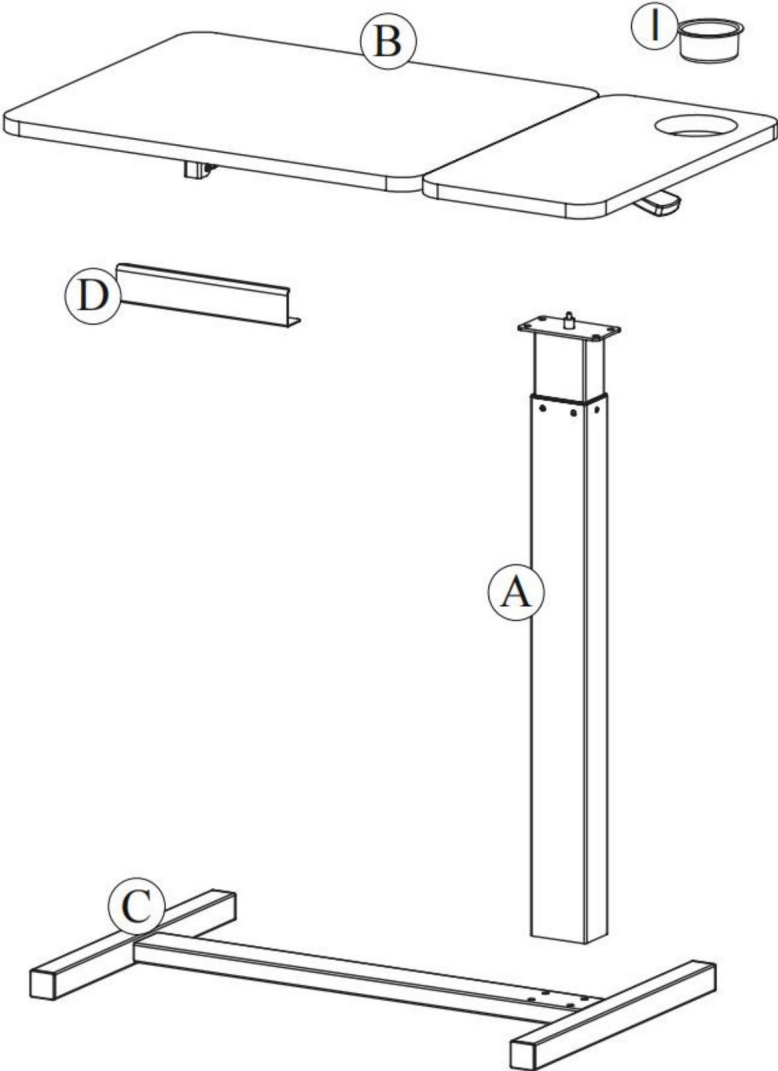

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


FASE DI MONTAGGIO


FASE 1: Installazione della barra di sollevamento.

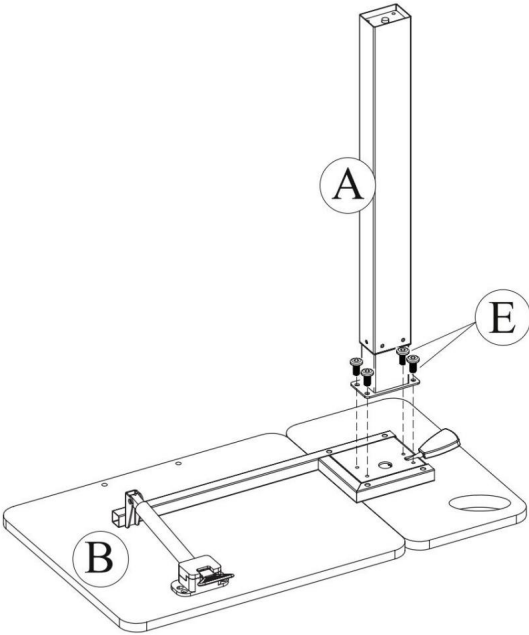


	
E x 4	H x 1

FASE 2: Montaggio dei piedini.

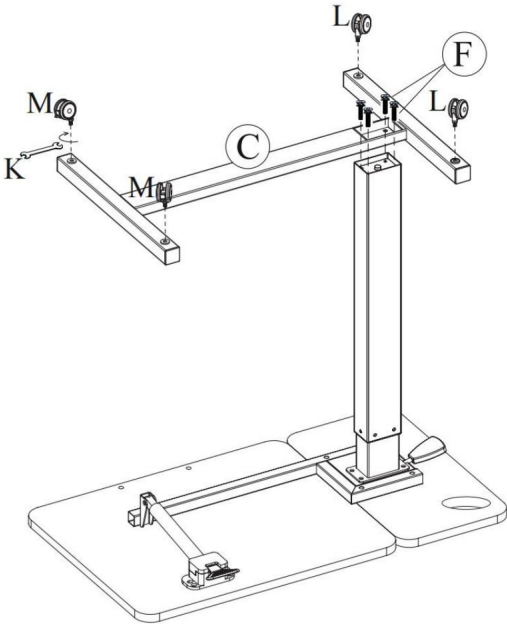


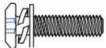	
	K x 1
	
L x 2	M x 2
	
F x 4	H x 1


FASE 3: Posizionamento dei portabicchieri.

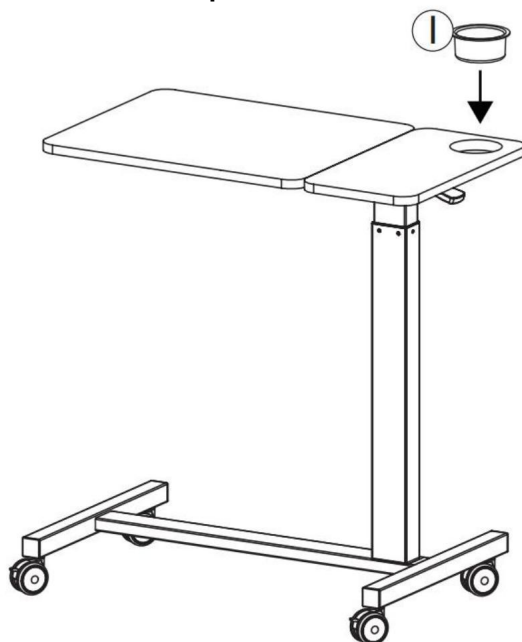


FASE 4: Installazione del deflettore.

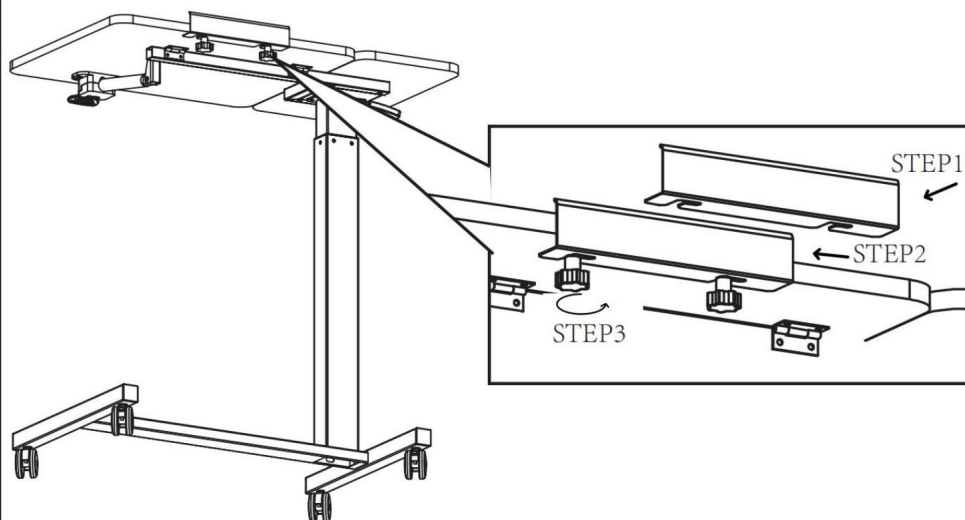

Modalità di funzionamento del sollevamento del tavolo:


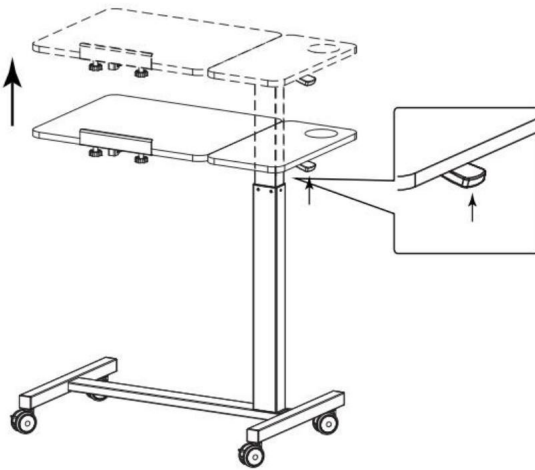


Lift the paddle for lifting the table top.

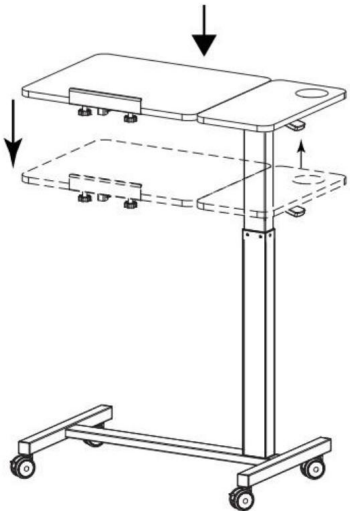

Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Modalità di funzionamento del ribaltamento del desktop:

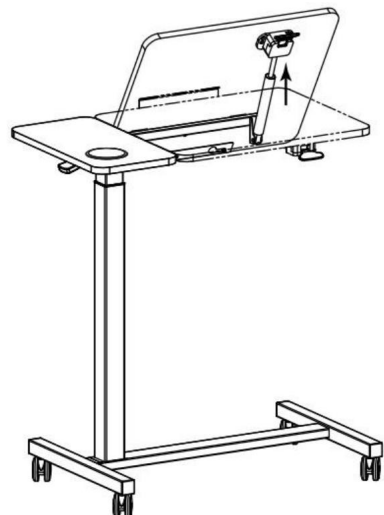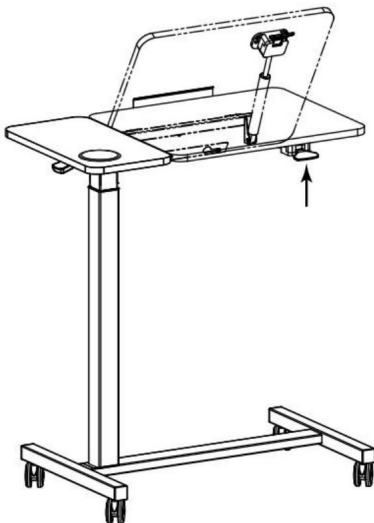

Girare la manovella per ruotare la superficie di 60°.

ATTENZIONE: c'è il rischio che gli oggetti sulla superficie possano cadere quando si ruota la superficie. Prima di eseguire questo movimento, assicurarsi che non ci siano oggetti sulla superficie che potrebbero cadere e danneggiarsi.

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Modello GT-SR65-B7
Peso di carico sicuro	30 kg vicino alle colonne 10 kg al bordo del tavolo
Colore	Legno + Nero
Angolo di rotazione	0~60°
Dimensioni del prodotto	700*400*1085mm (posizione più alta) 700*400*705mm (posizione più bassa)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

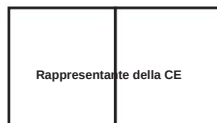

E-CrossStu GmbH
Via Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MESAS DE CAMA

MODELO: GT-SR65-B7

Guía de instalación:

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMeo5-7v-2iV5ixGLK3f&index=2)

[v=nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMeo5-7v-2iV5ixGLK3f&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMeo5-7v-2iV5ixGLK3f&index=2)



Soporte técnico y certificado de garantía


electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MESAS DE CAMA

MODELO: GT-SR65-B7

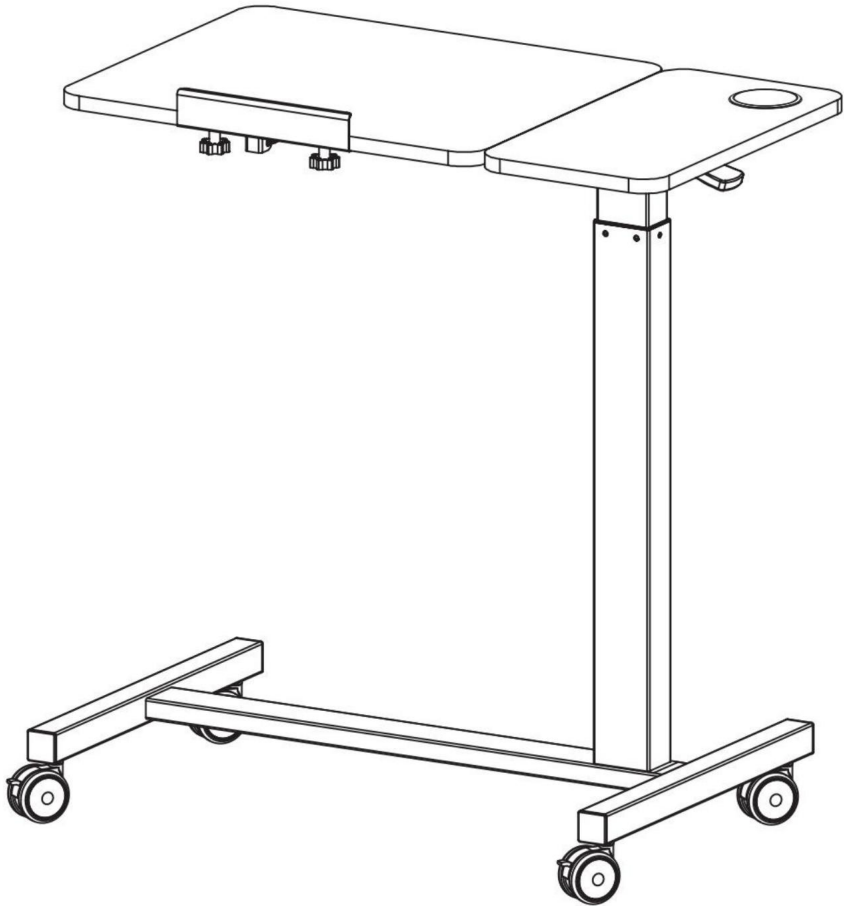

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje


1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Montaje incorrecto
Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
apoyando las mesas Overbed.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Admite mesas de cama completamente cargadas.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL


LISTA DE PIEZAS

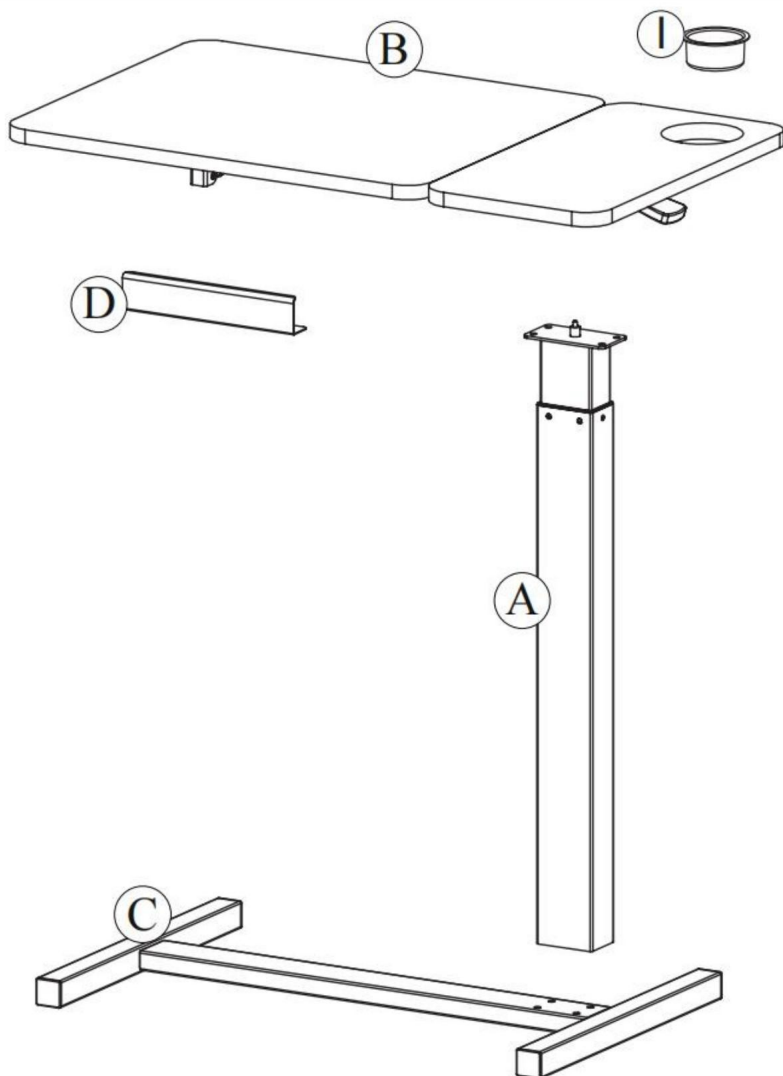

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


PASO DE MONTAJE

PASO 1: Instalación de la barra de elevación.

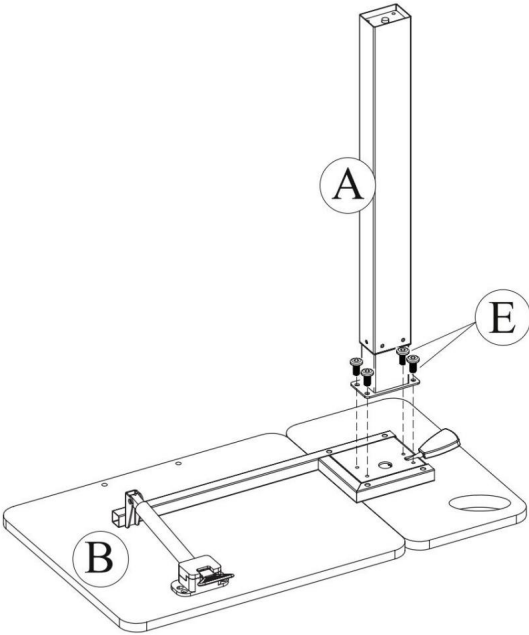


	
Ex4	Hx1

PASO 2: Montaje de los pies.

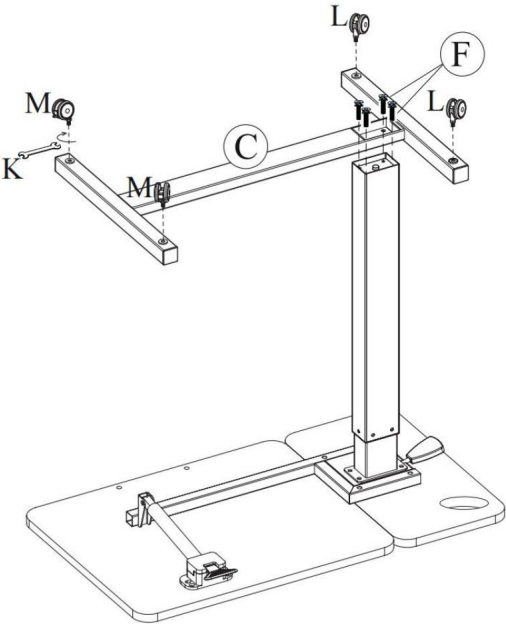


	 Kx1
 Lx2	 Mx2
 Fx4	 Hx1


PASO 3: Colocación de portavasos.

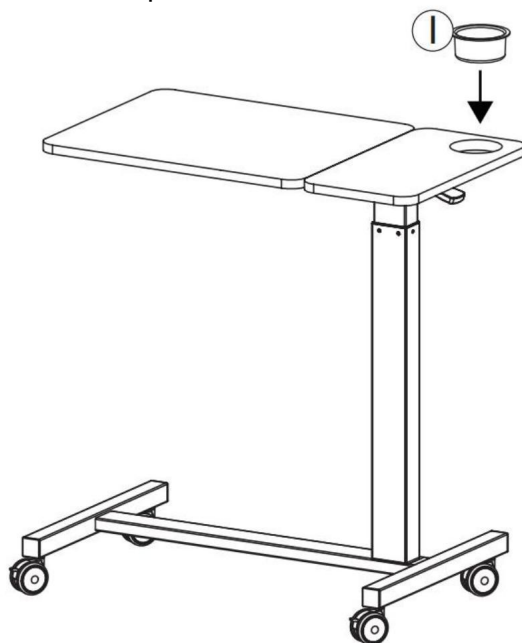


PASO 4: Instalación del deflector.

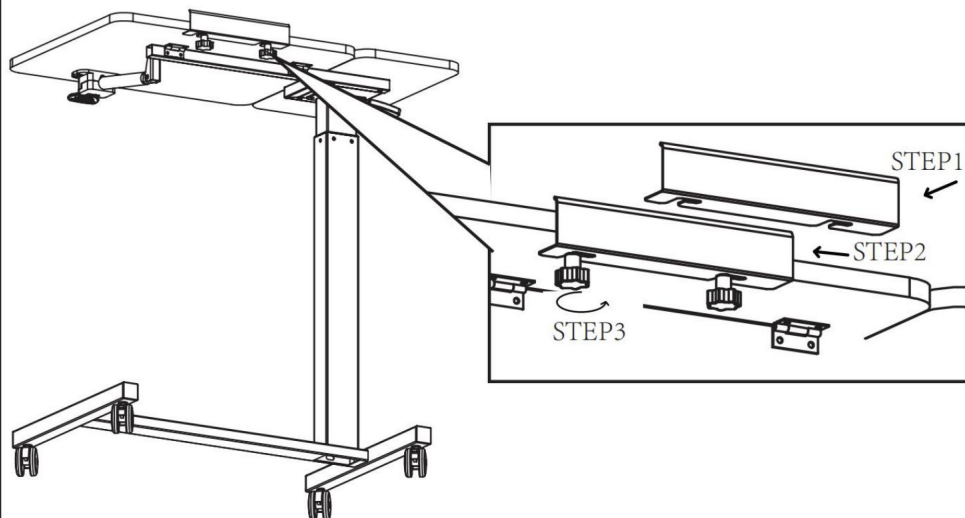

Modo de operación de elevación de escritorio:


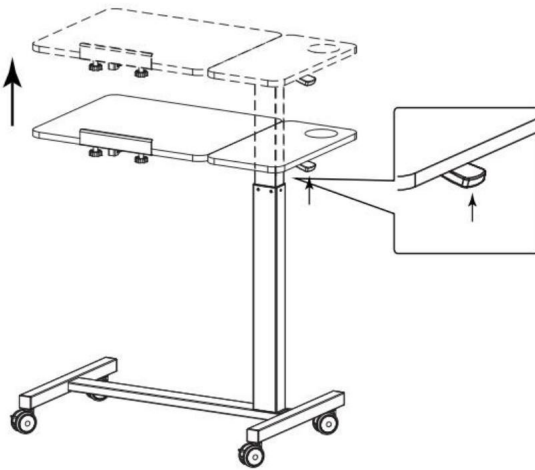


Lift the paddle for lifting the table top.

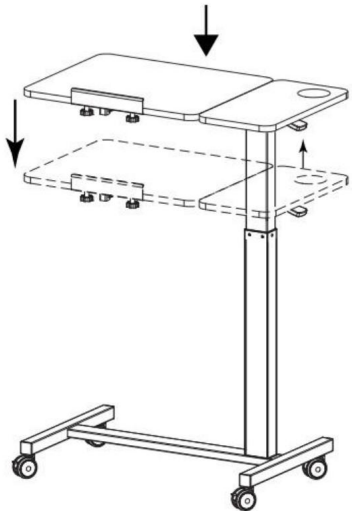

Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Modo de operación de volteo de escritorio:

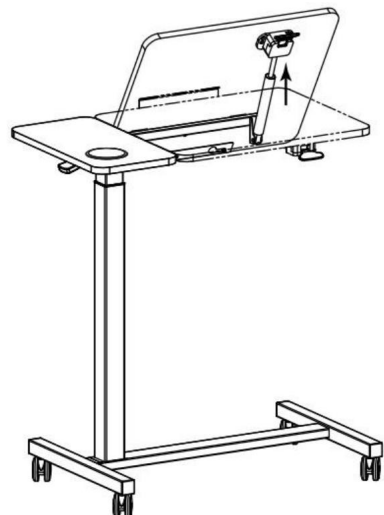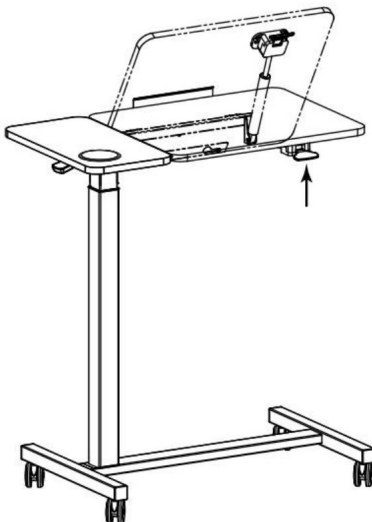

Gire la manivela para girar la superficie a 60°.

ADVERTENCIA: Existe el riesgo de que los objetos que se encuentren sobre la superficie se caigan al girar la misma. Antes de realizar este movimiento, asegúrese de que no haya objetos sobre la superficie que puedan caerse y dañarse.


PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	GT-SR65-B7
Peso de carga segura	30 kg cerca de las columnas 10 kg en el borde de la mesa
Color	Madera + Negro
Angulo de rotación	0 ~ 60°
Tamaño del producto	700*400*1085 mm (posición más alta) 700*400*705 mm (posición más baja)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

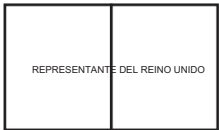

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Calle Mainz Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOLIKI NAD ŁÓŻKOWE

MODEL: GT-SR65-B7

Instrukcja instalacji:

https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2tVTtxGLA3f&index=2



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji


elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STOLIKI NAD ŁÓŻKOWE

MODEL: GT-SR65-B7

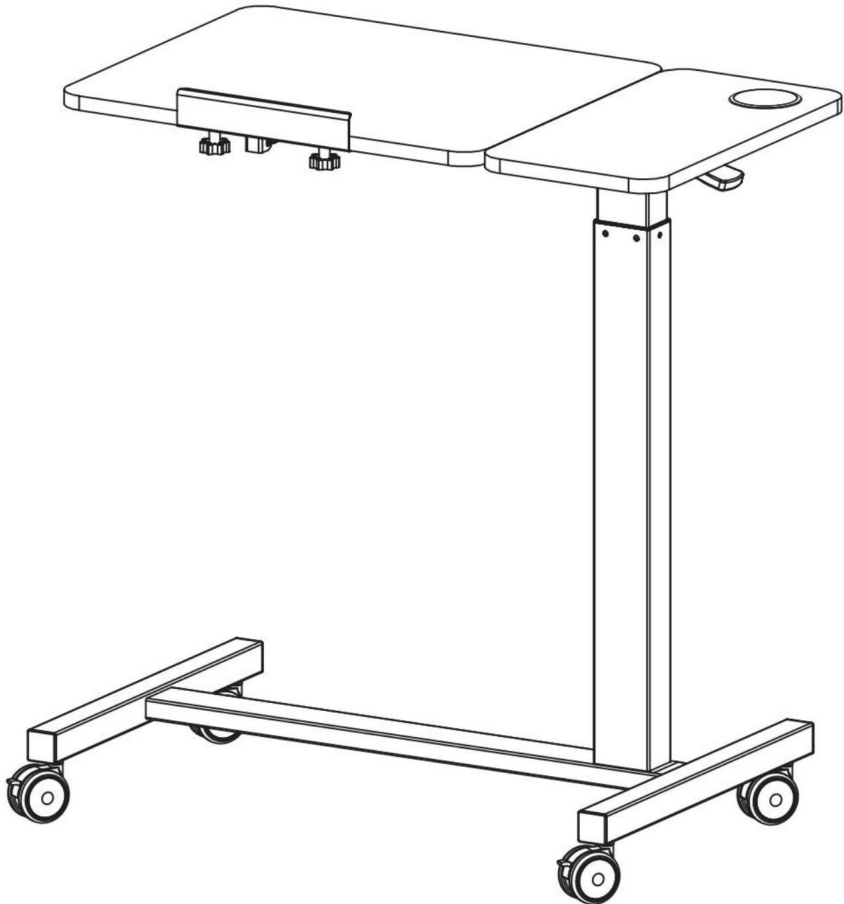

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. podtrzymywanie stolików nadłóżkowych.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni załadowane stoliki nadłóżkowe.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI

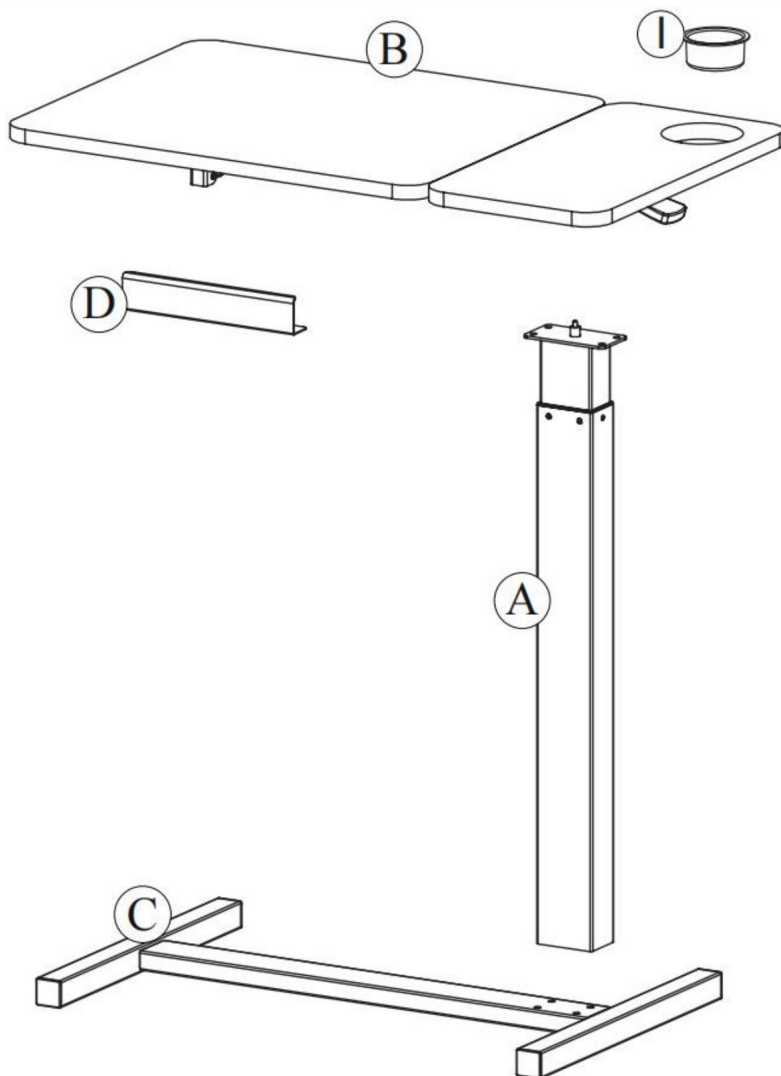

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


KROK MONTAŻU

KROK 1: Montaż drążka podnoszącego.

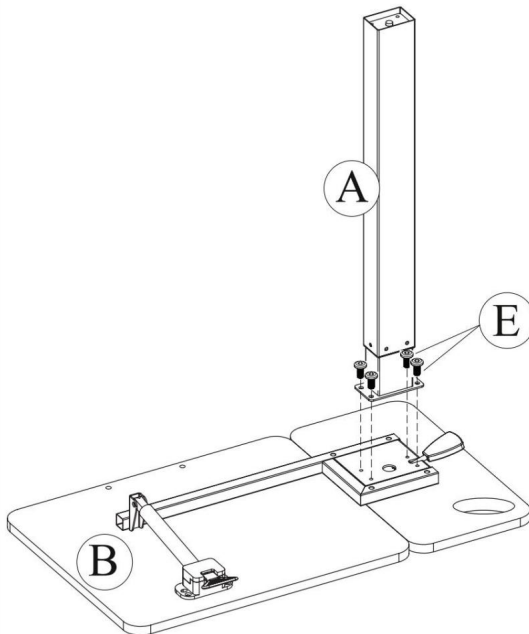


	
Ex4	Hx1

KROK 2: Montaż nóżek.

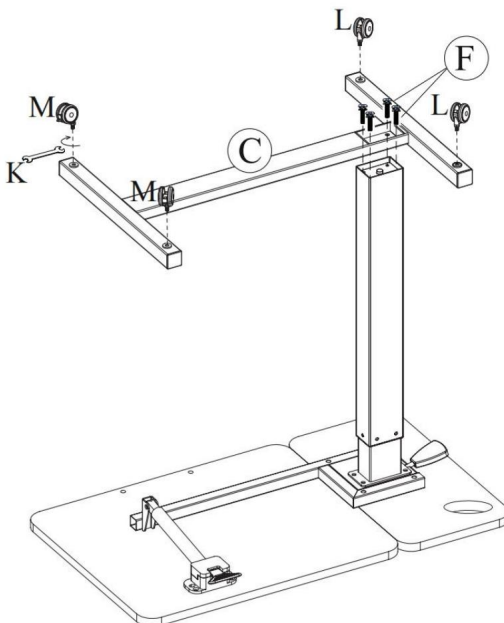


	
	Kx1
	
Lx2	Mx2
	
Fx4	Hx1


KROK 3: Rozmieszczenie uchwytów na kubki.

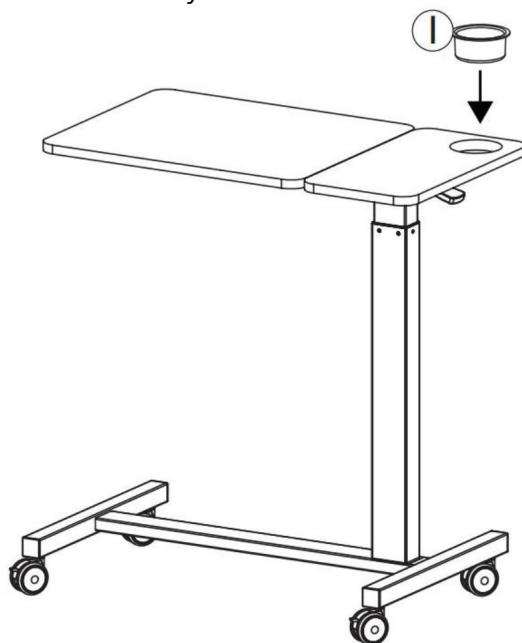


KROK 4: Montaż osłony.

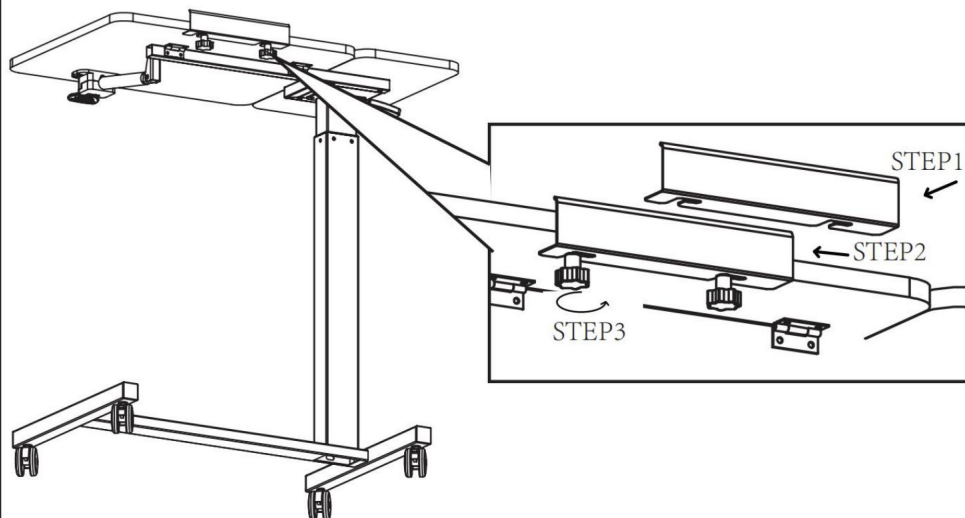

Tryb podnoszenia pulpitu:

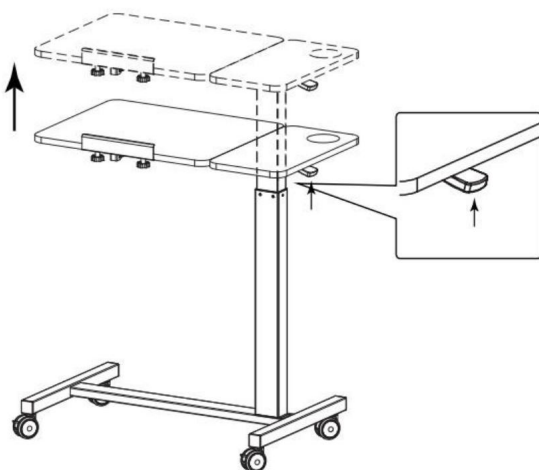


Lift the paddle for lifting the table top.

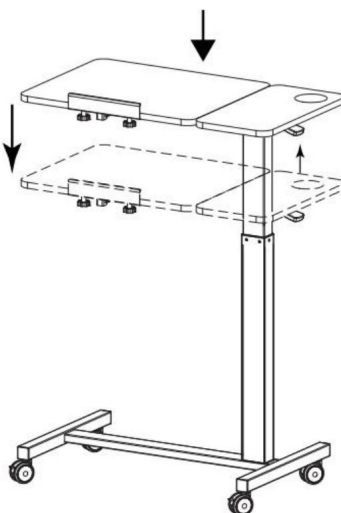


Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Tryb działania funkcji obracania pulpitu:

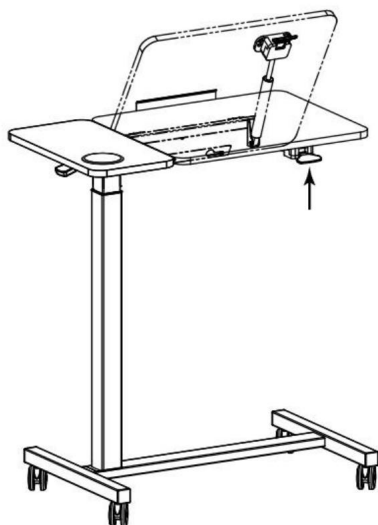

Obróć korbą powierzchnię o 60°.

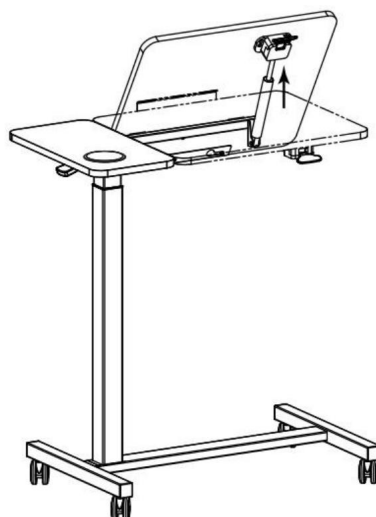

OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko, że przedmioty na powierzchni mogą spaść podczas obracania powierzchni. Przed wykonaniem tego ruchu upewnij się, że na powierzchni nie ma żadnych przedmiotów, które mogłyby spaść i zostać uszkodzone.

PARAMETR PRODUKTU

Model	GT-SR65-B7
Bezpieczna waga załadunkowa	30 kg w pobliżu kolumn, 10 kg na krawędzi stołu
Kolor	Drewno + Czarny
Kąt obrotu	0~60°
Rozmiar produktu	700*400*1085mm (najwyższa pozycja) 700*400*705mm (najniższa pozycja)

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OVERBED TAFELS

MODEL: GT-SR65-B7

Installatiehandleiding:

https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2tVTtxGLA3f&index=2



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat


www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OVERBED TAFELS

MODEL: GT-SR65-B7

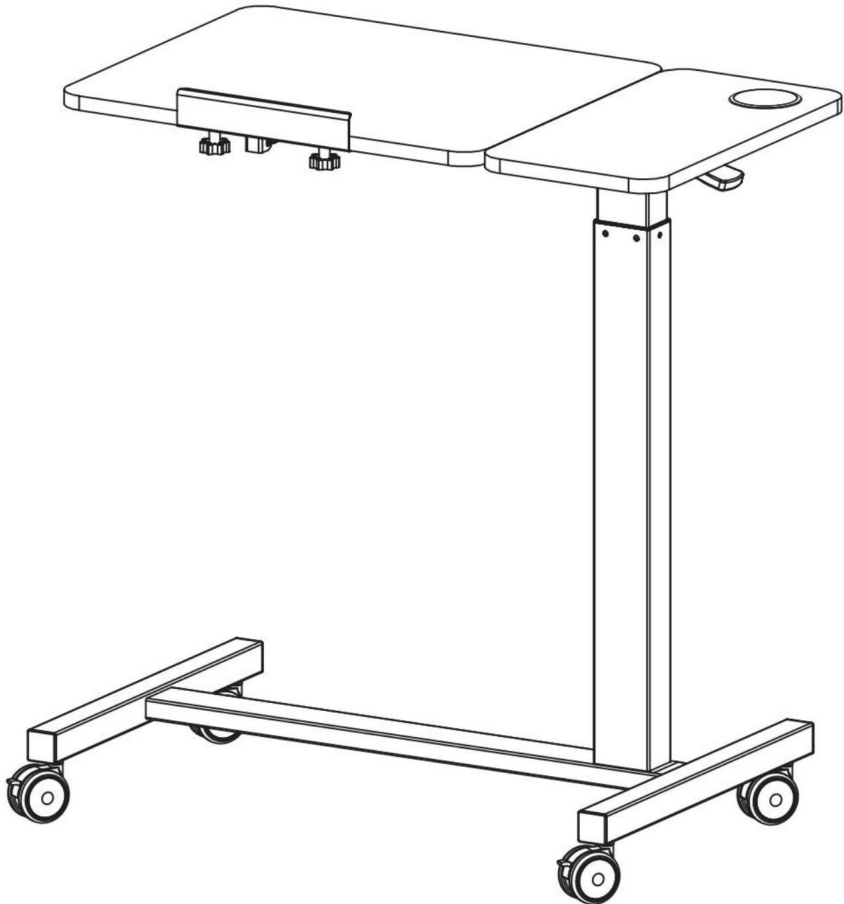

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de Overbed Tables.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ondersteunen een volledig geladen Overbed Tables.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


ONDERDELENLIJST

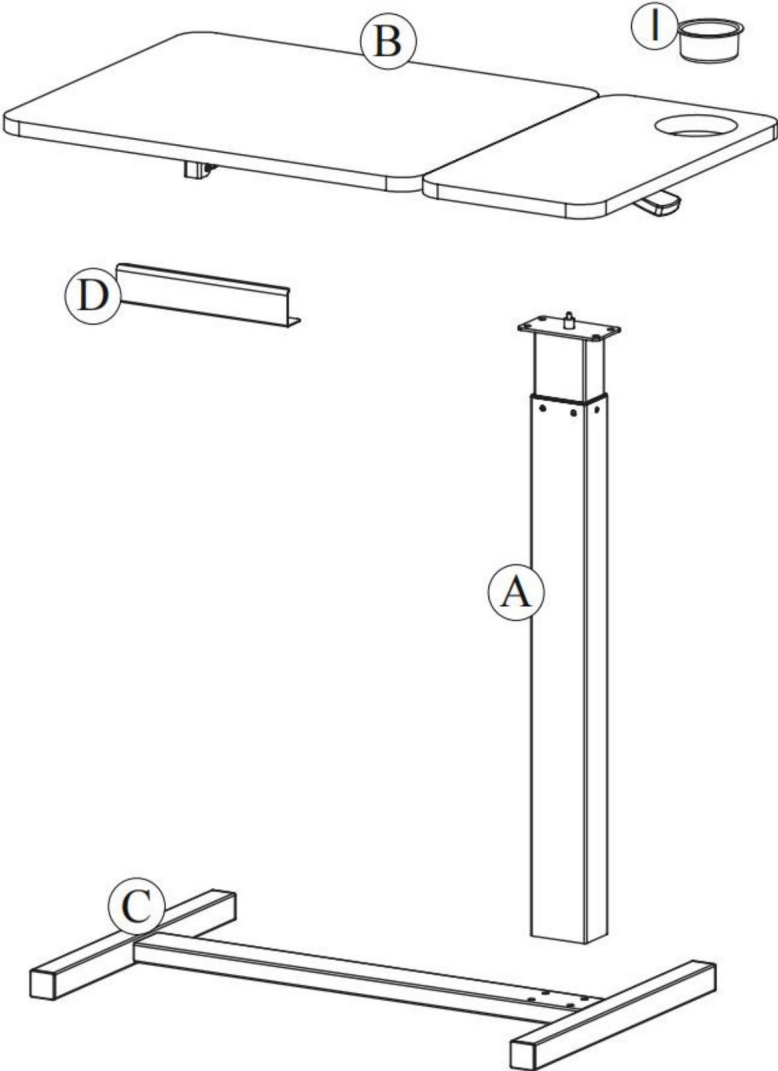

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


MONTAGESTAP

STAP 1: Installatie van de hef balk.

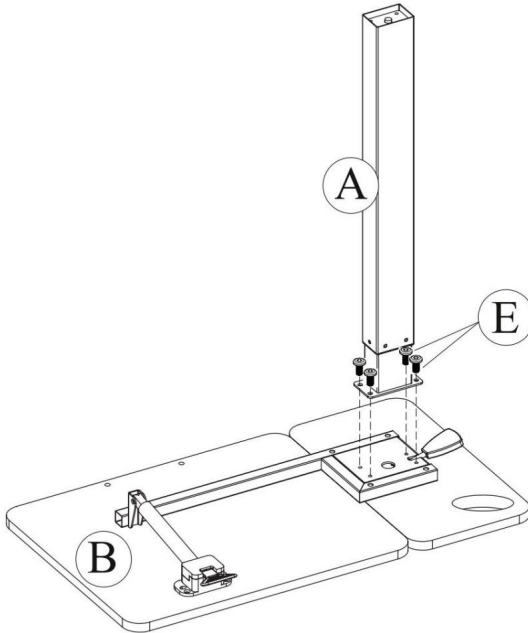


	
E x 4	H x 1

STAP 2: Voeten monteren.

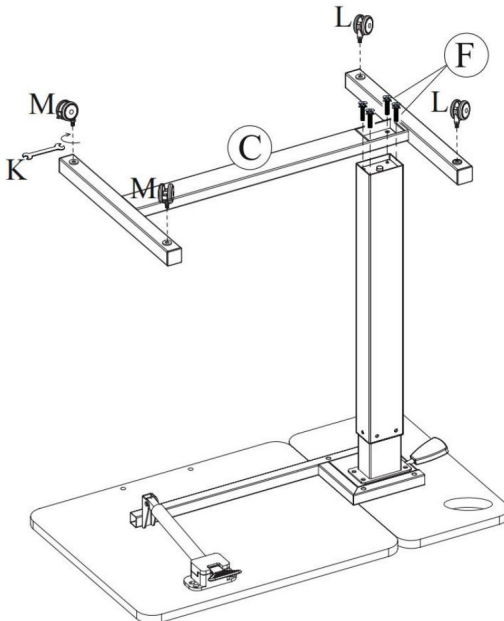


	
	K x 1
	
L x 2	M x 2
	
F x 4	H x 1


STAP 3: Plaatsing van bekerhouders.

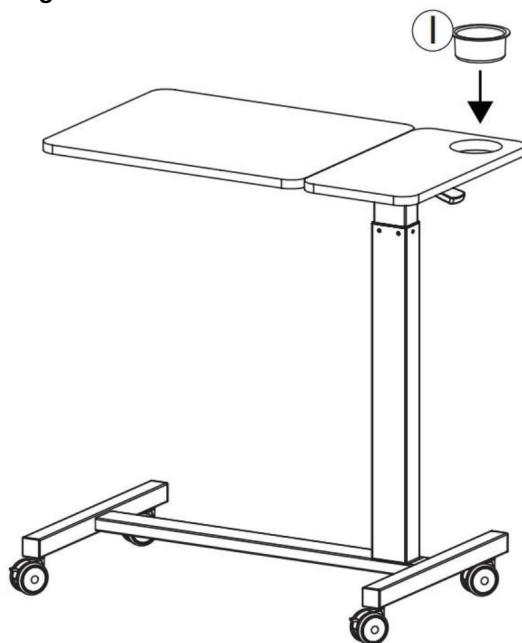


STAP 4: Installatie van de schotplaat.

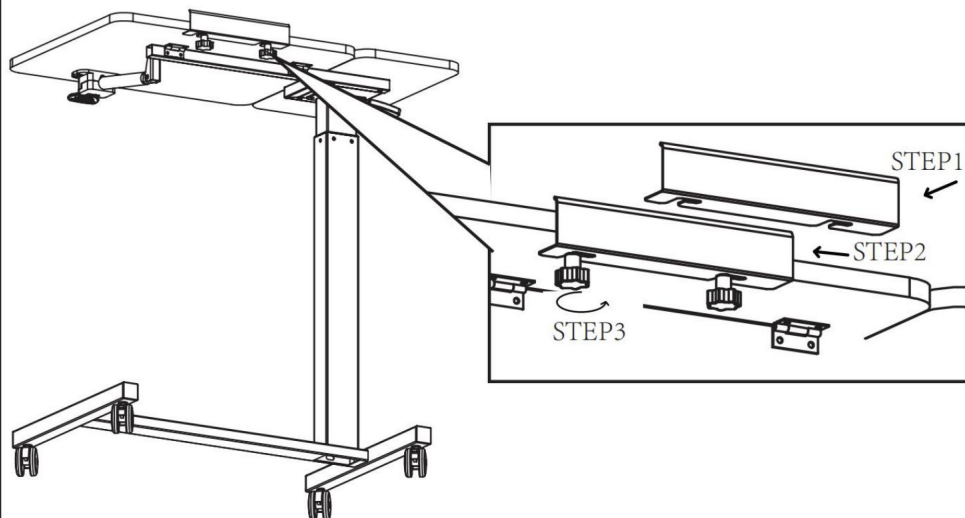

Werkingsmodus voor het optillen van het bureaublad:


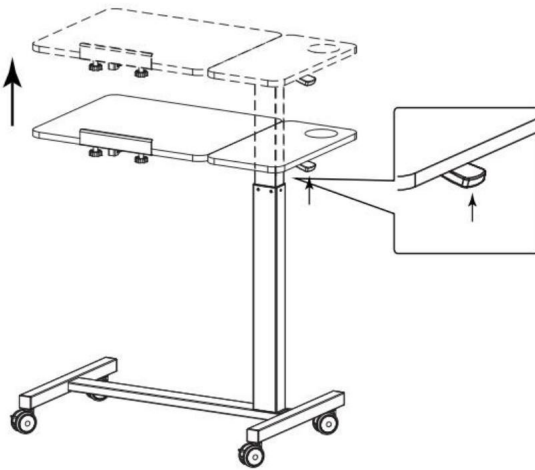


Lift the paddle for lifting the table top.

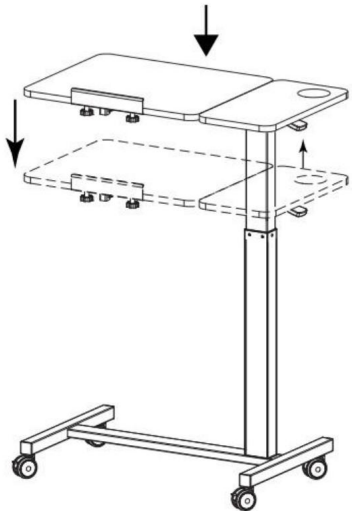

Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Modus voor het omdraaien van het bureaublad:

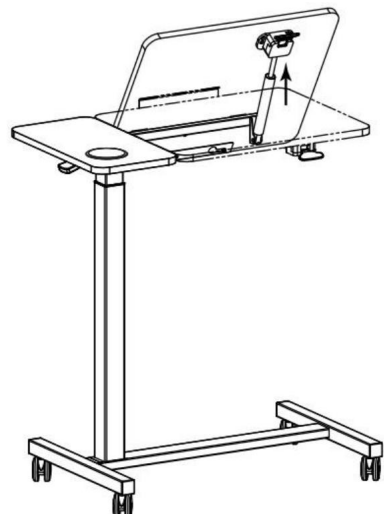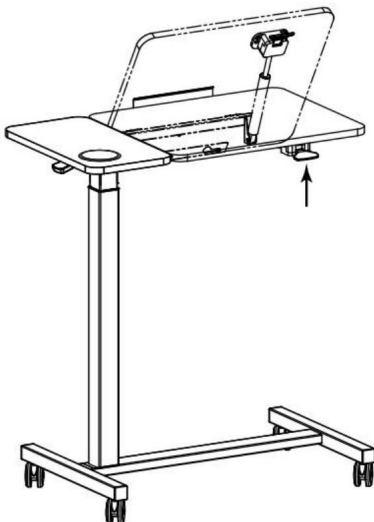

Draai aan de kruk om het oppervlak 60° te draaien.

WAARSCHUWING: Er is een risico dat objecten op het oppervlak eraf vallen bij het draaien van het oppervlak. Controleer voordat u deze beweging uitvoert of er geen objecten op het oppervlak liggen die eraf kunnen vallen en beschadigd kunnen raken.

PRODUCTPARAMETER

Model	GT-SR65-B7
Veilig laadgewicht	30 kg bij de kolommen, 10 kg bij de tafelrand
Kleur	Hout + Zwart
Rotatiehoek	0~60°
Productgrootte	700*400*1085mm (hoogste positie) 700*400*705mm (laagste positie)

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÖVERSÄNGSBORD

MODELL: GT-SR65-B7

Installationsguide:

https://www.youtube.com/watch?v=_nftsqNhAeU&list=PL0BwQM2YkbL6_nMedm_7wc2tVTtxGLA3f&index=2




Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÖVERSÄNGSBORD

MODELL: GT-SR65-B7

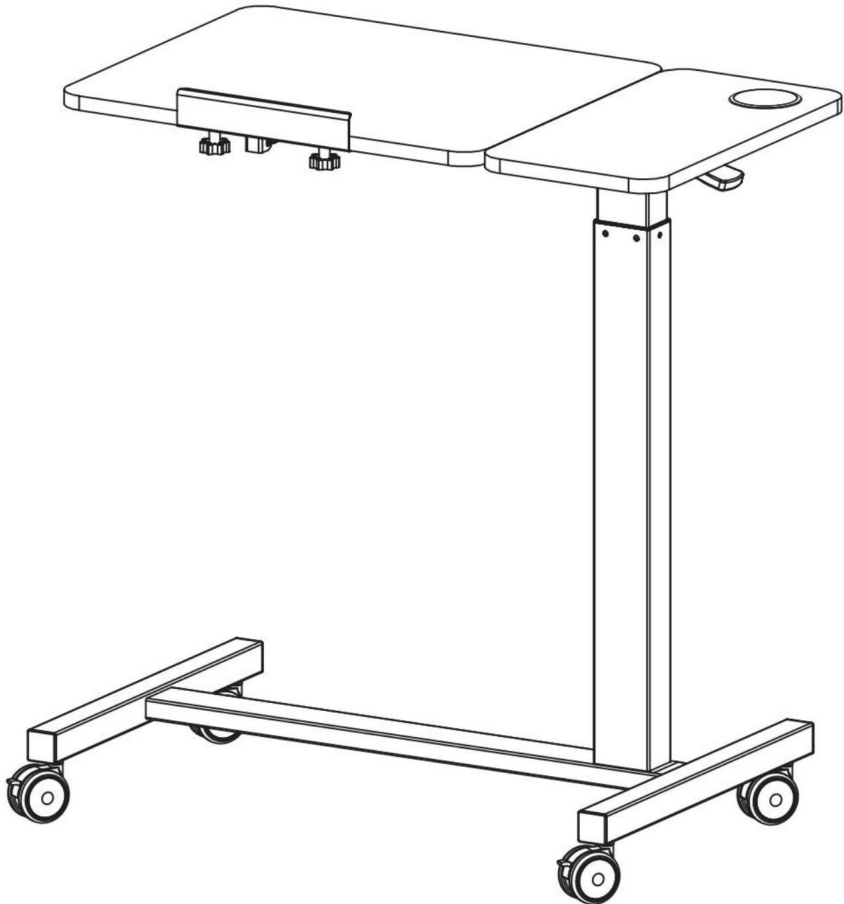

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder överbäddsborden.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja ett fullastat överbäddsbord.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL


DELLISTA

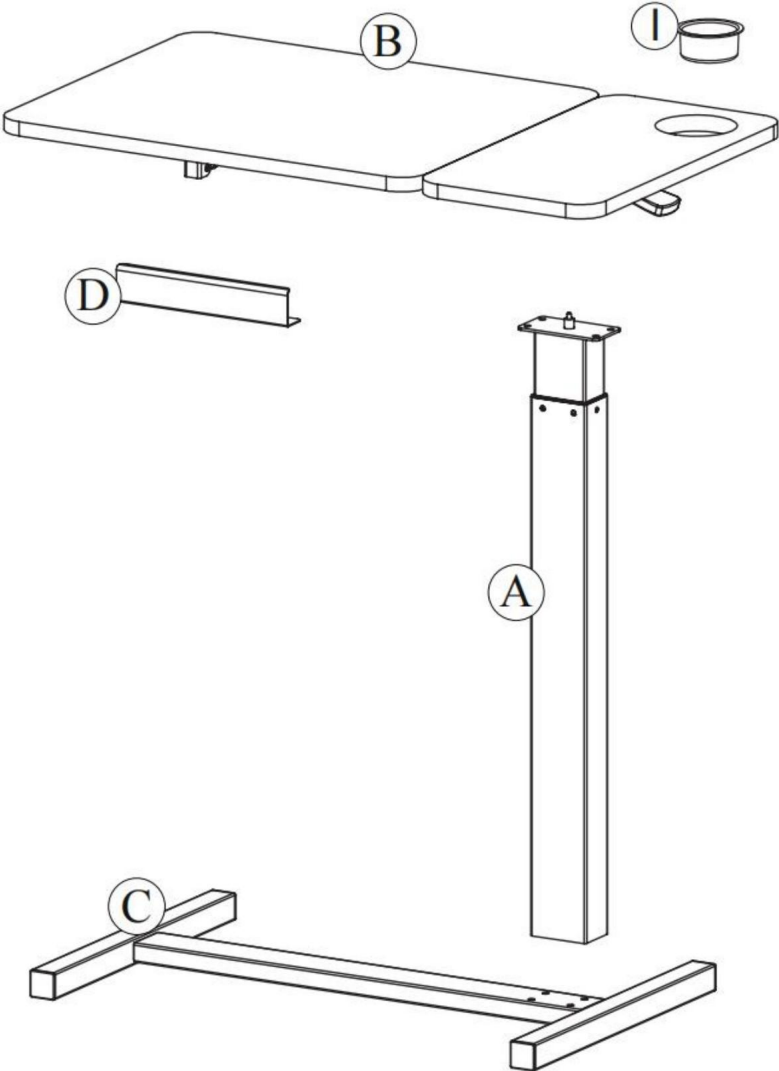

	Ex4	M6x12mm		Fx4	M6x25mm
	Gx2			Hx1	4mm
	Kx1	M14			
	Lx2			Mx2	


MONTERINGSTEG

STEG1: Installation av lyftstång.

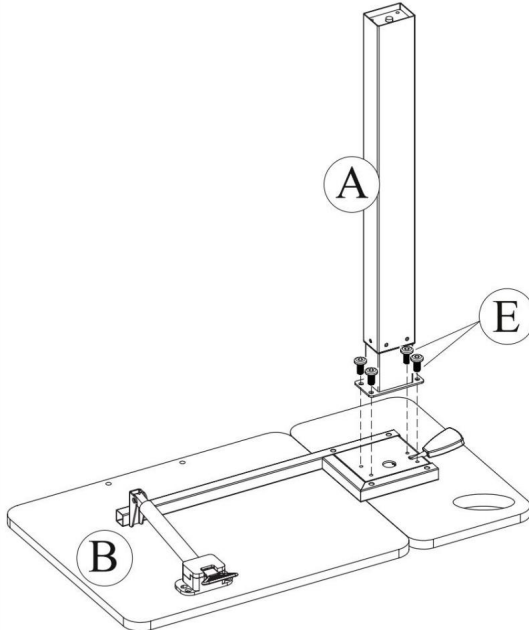


	
Ex4	Hx1

STEG 2: Montering av fötter.

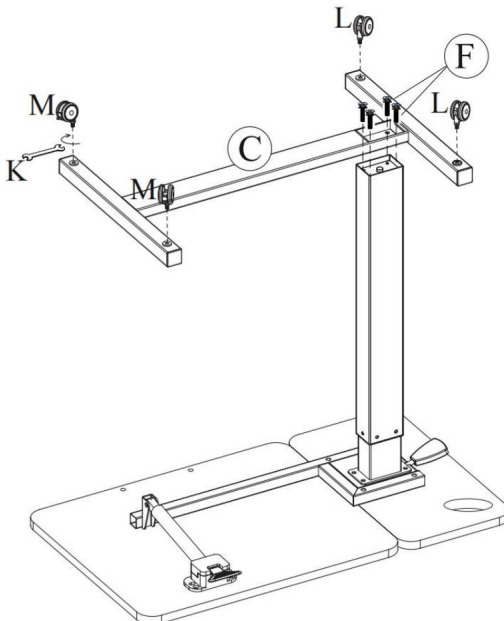


	
	Kx1
	
Lx2	Mx2
	
Fx4	Hx1


STEG 3: Placering av mugghållare.

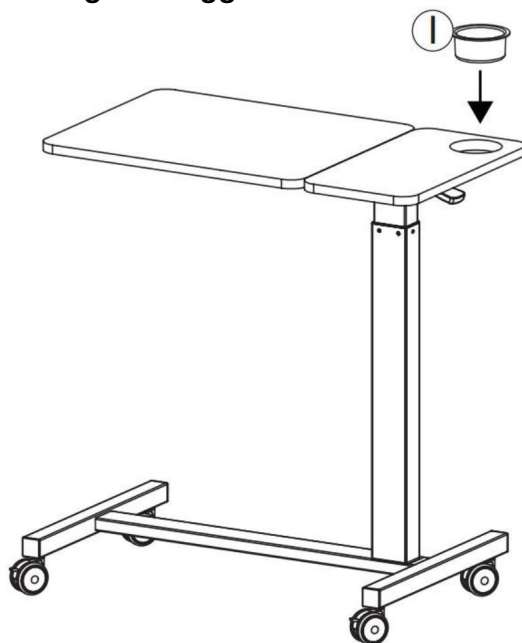


STEG4: Installation av baffel.

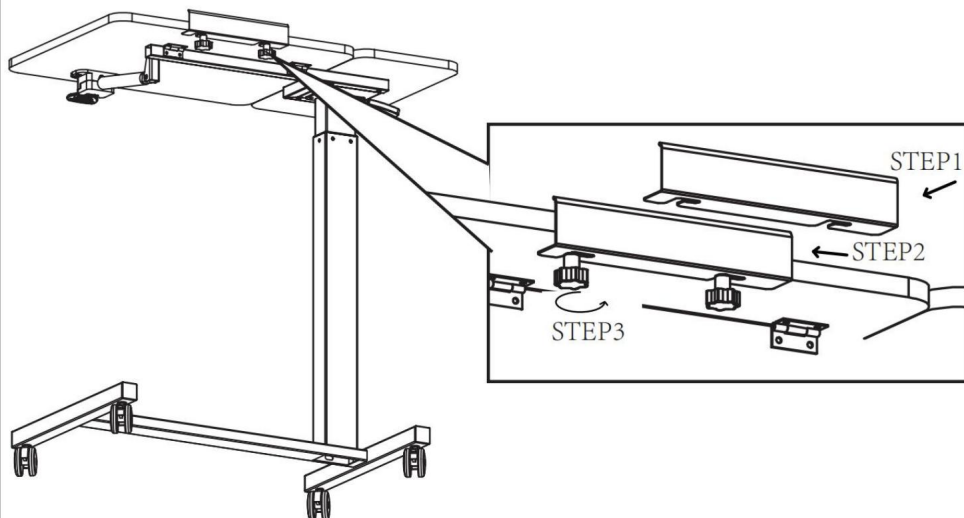

Arbetsläge för skrivbordslyft:

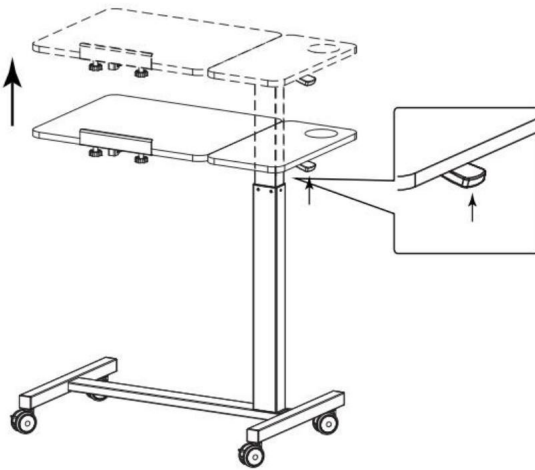


Lift the paddle for lifting the table top.

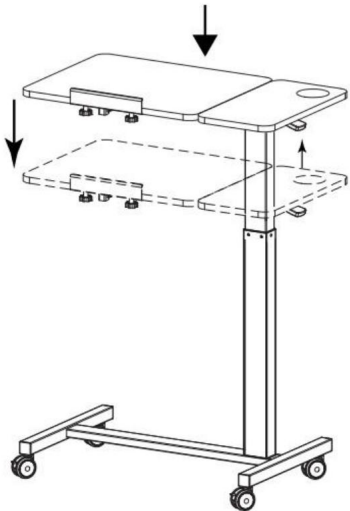


Lift the paddle and press the table top for downward operation.

Driftläge för att vända skrivbordet:

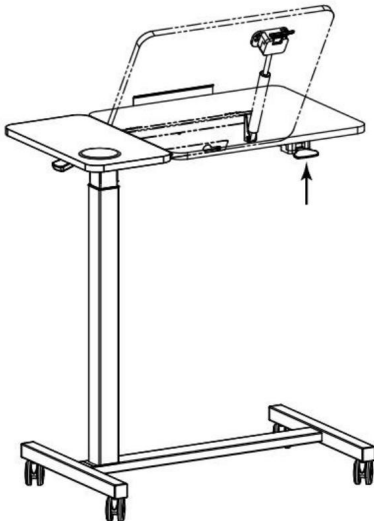

Vrid veven för att rotera ytan till 60°.

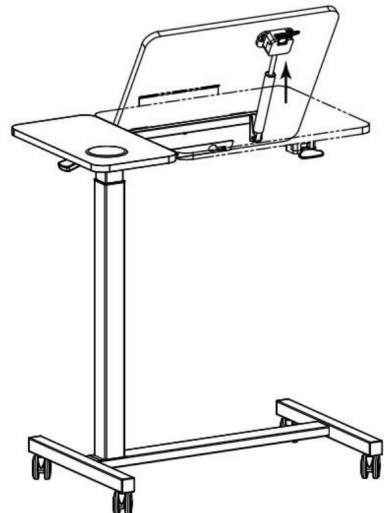

WARNING: Det finns risk att föremål på ytan kan falla av när ytan roteras. Innan du utför denna rörelse, se till att det inte finns några föremål på ytan som kan falla av och skadas.

PRODUKTPARAMETER

Modell	GT-SR65-B7
Säker lastvikt	30kg nära pelare 10kg vid bordskant
Färg	Trä + Svart
Rotationsvinkel	0~60°
Produktstorlek	700*400*1085mm (högsta position) 700*400*705mm (lägsta position)

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/
support**