

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HUMAN BODY TEACHING MODELS USER MANUAL

MODEL:LD-140

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUMAN BODY TEACHING
MODELS

MODEL:LD-140

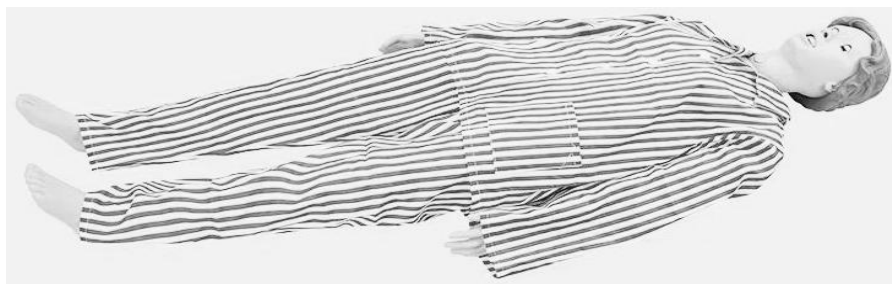

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. After use, please assemble all the parts and keep them vertically.
3. Avoid high temperature and direct sunlight.
4. Remove minor stains with neutral detergent. The use of alcohol, benzene and other substances may damage the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Model features: Male and female

This model is designed according to the requirements of clinical basic nursing operation and practice nursing technical outline. Using imported thermoplastic elastic-plastic materials, with integral nursing and disassembly parts for skill training teaching, is an ideal teaching practice model for clinical medical staff. It is characterized by vivid image, real operation, convenient disassembly, reasonable structure, durable, and parts can be replaced, is the most advanced, the most complete function, materials elegant new products.

Product functions

- 1, the simulation of desirable supine kneeling position, two legs after abduction can be independent support, left and right upper arm, calf can be flexible rotation
- 2, bed sore care: show pressure sore clinical stage 4 different stages, the first stage: congestion and red; The second stage: inflammatory infiltration stage; Stage 3: shallow ulcer stage; Stage 4: necrotic ulcer stage. At the same time, pressure sore and various pathological manifestations: pressure sore inflammation, ulcers, sinuses, carrion, necrosis, eschar, etc 3, head

- care:shampoo,face wash,eye and ear drops cleaning,oral care
- 4.holistic care:bed bath,sitting bath,wear and change clothes,cold and heat therapy
- 5.can conduct oral direct tracheal intubation operation training
- 6.Sputum aspiration method
- 7.Oxygen inhalation method
- 8.Oral and nasal feeding method
- 9.Gastric lavage
- 10.Structure observation of vital organs in thoracic anatomy
- 11.Observation of the structure of vital organs in abdominal anatomy
- 12.Arm venipuncture,injection and infusion (blood)
- 13.Subcutaneous injection into deltoid muscle
- 14.Injection into lateral femoris muscle
- 15.Thoracic cavity and abdominal cavity puncture
- 16.Enema method
- 17.Female catheterization
- 18.Male catheterization
- 19.Female bladder irrigation
- 20.Male bladder irrigation
- 21.Fistula drainage
- 22.Hip intramuscular injection
- 23.Limb joints bend left and right,rotate and move up and down

Scope of Application

- 1.Clinical teaching and practical operation training for students in medical universities,nursing schools and medical colleges
- 2.Continuing clinical teaching practice training for hospital medical and nursing staff
- 3.Popularize clinical medicine training in grassroots health units

Maintenance,warranty

- 1.After the training of nasal feeding,gastric lavage,enema,catheterization and other functional operations,the residual liquid injected into the

stomach,intestine and

bladder should be emptied during the operation.

2.Keep the model clean.After the operation training,the model should be scrubbed and cleaned with clean water cloth,and chemical solvents should be prohibited.

3.If not used for a long time,please clean up the model and store it in a ventilated,cool and dry place to prolong the service life.

4.Within one year of the purchase date of this model or the warranty period stipulated in the contract,if any quality problems occur due to the failure of the


manufacturing process or the original (except man-made),the company is responsible for free maintenance services,and promises lifetime maintenance (the cost is at the user's own expense).

PRODUCT PARAMETER

Model	LD-140
Gender	Woman/Man
Material	PVC

PARTS LIST

Clothes	1	
Syringe 10ml	1	
Urinary Catheter	1	
Sputum Suction Tube	1	

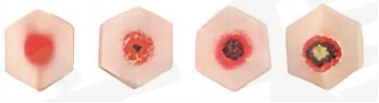Anal Canal	1	
Gastric Tube	1	
Bottle	3	
Infusion Bottle	1	
Wig	1	
Genital Organ	1	
Bedsore Module	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MODÈLES D'ENSEIGNEMENT DU CORPS HUMAIN

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : LD-140

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENSEIGNEMENT SUR LE CORPS HUMAIN

MODÈLES

MODÈLE : LD-140

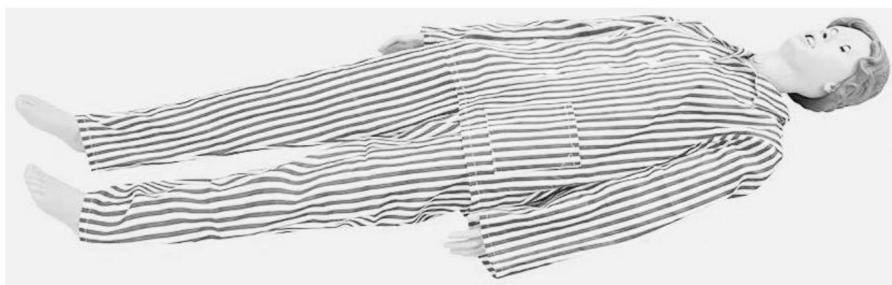

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
2. Après utilisation, veuillez assembler toutes les pièces et les conserver verticalement.
3. Évitez les températures élevées et la lumière directe du soleil.
4. Enlevez les taches mineures avec un détergent neutre. L'utilisation d'alcool, de benzène et d'autres substances peuvent endommager le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

Caractéristiques du modèle : Homme et femme

Ce modèle est conçu selon les exigences cliniques de base

aperçu technique du fonctionnement et de la pratique des soins infirmiers. Utilisation des produits importés matériaux thermoplastiques élastiques-plastiques, avec soins intégrés et

Le démontage de pièces pour l'enseignement de la formation professionnelle est une pratique pédagogique idéale

modèle pour le personnel médical clinique. Il est caractérisé par une image vivante, réelle

fonctionnement, démontage pratique, structure raisonnable, durable et pièces

peut être remplacé, est le plus avancé, la fonction la plus complète, les matériaux sont des produits nouveaux et élégants.

Fonctions du produit

1, la simulation de la position couchée sur le dos souhaitable, deux jambes après

l'abduction peut être un support indépendant, le bras supérieur gauche et droit, le mollet peut être rotation flexible

2, soins des escarres : montrer le stade clinique des escarres en 4 étapes différentes, la première

stade : congestion et rougeur ; deuxième stade : infiltration inflammatoire

Stade ; Stade 3 : stade d'ulcère superficiel ; Stade 4 : stade d'ulcère nécrotique.

en même temps, escarre et diverses manifestations pathologiques : pression

inflammation douloureuse, ulcères, sinus, charogne, nécrose, escarre, etc. 3, tête

Soins : shampoing, lavage du visage, nettoyage des yeux et des oreilles avec des gouttes, soins bucco-dentaires 4, soins holistiques : bain au lit, bain assis, porter et changer de vêtements, thérapie par le froid et

la chaleur 5, peut effectuer une formation à l'opération d'intubation trachéale directe par voie orale 6. Méthode d'aspiration des expectorations 7. Méthode d'inhalation d'oxygène 8. Méthode d'alimentation orale et nasale 9. Lavage

gastrique 10. Observation de la structure des organes vitaux dans l'anatomie thoracique

11. Observation de la structure des organes vitaux dans l'anatomie abdominale 12. Ponction veineuse du bras, injection et perfusion (sang)

13. Injection sous-cutanée dans le muscle deltoïde 14. Injection dans le muscle fémoral latéral 15. Ponction de la cavité thoracique et de la cavité abdominale 16. Méthode du lavement

17. Cathétérisme féminin

18. Cathétérisme masculin

19. Irrigation de la vessie féminine 20.

Irrigation de la vessie masculine 21.

Drainage de la fistule 22.

Injection intramusculaire de la hanche 23.

Les articulations des membres se plient à gauche et à droite, tournent et se déplacent de haut en bas

Champ d'application 1.

Enseignement clinique et formation pratique pour les étudiants des universités de médecine, des écoles d'infirmières et des facultés de médecine 2. Formation continue à la

pratique de l'enseignement clinique pour le personnel médical et infirmier des hôpitaux 3. Vulgariser la formation en

médecine clinique dans les unités de santé de base

Entretien, garantie 1. Après la

formation à l'alimentation nasale, au lavage gastrique, au lavement, au cathétérisme et à d'autres opérations fonctionnelles, le liquide résiduel injecté dans le

estomac, intestin et

la vessie doit être vidée pendant l'opération.

2. Gardez le modèle propre. Après la formation opérationnelle, le modèle doit être frotté et nettoyé avec un chiffon à l'eau propre et des solvants chimiques doivent être interdit.

3. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez nettoyer le modèle et le ranger dans un endroit aéré, frais et sec pour prolonger la durée de vie.

4. Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat de ce modèle ou de la période de garantie stipulé dans le contrat, si des problèmes de qualité surviennent en raison de la défaillance de le

processus de fabrication ou l'original (sauf artificiel), l'entreprise est responsable des services de maintenance gratuits et promet une durée de vie maintenance (le coût est à la charge de l'utilisateur).

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	LD-140
Genre	Femme/Homme
Matériel	PVC

LISTE DES PIÈCES

Vêtements	1	
Seringue 10 ml	1	
Sonde urinaire	1	
Tube d'aspiration des expectorations	1	

Canal anal	1	
Sonde gastrique	1	
Bouteille	3	
Bouteille d'infusion	1	
Perruque	1	
Organe génital	1	
Module Escarres	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LEHRMODELLE FÜR DEN MENSCHLICHEN KÖRPER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL:LD-140

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lehre über den menschlichen Körper

MODELLE

MODELL:LD-140

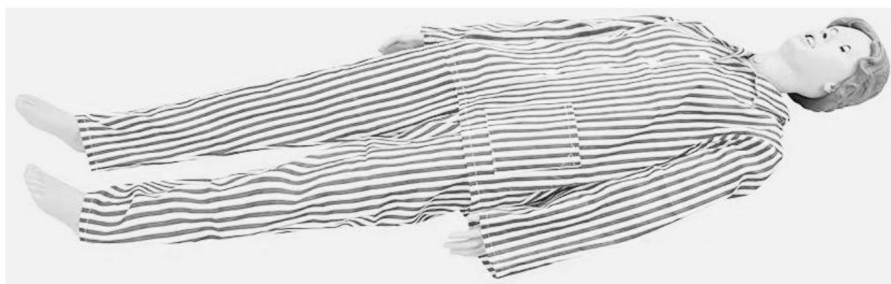

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Nach dem Gebrauch bitte alle Teile zusammenbauen und senkrecht lagern.
3. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
4. Kleinere Flecken mit neutralem Reinigungsmittel entfernen. Die Verwendung von Alkohol, Benzol und andere Substanzen können das Produkt beschädigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ANWEISUNGEN

Modellmerkmale:Männlich und weiblich

Dieses Modell ist nach den Anforderungen der klinischen Grund Pflegebetrieb und Praxis Pflege technische Gliederung. Mit importierten thermoplastische elastisch-plastische Materialien, mit integrierten Still- und Demontage teile für geschick ausbildung lehre, ist eine ideale lehre praxis Modell für klinisches medizinisches Personal. Es zeichnet sich durch lebendige Bilder, reale Bedienung, bequeme Demontage, vernünftige Struktur, langlebig und Teile kann ersetzt werden, ist das modernste, die umfassendste Funktion, Materialien elegante neue Produkte.

Produktfunktionen

- 1, die Simulation der wünschenswerten Rückenlage kniend Position, beide Beine nach Abduktion kann unabhängig unterstützt werden, linker und rechter Oberarm, Wade kann flexible Drehung
- 2, Dekubitus Pflege: zeigen Dekubitus klinischen Stadium 4verschiedene Stadien, die erste Stadium: Stauung und Rötung; Das zweite Stadium: entzündliche Infiltration Stadium; Stadium 3: flaches Ulkusstadium; Stadium 4: nekrotisches Ulkusstadium. Gleichzeitig,Dekubitus und verschiedene pathologische Erscheinungen:Druck Wunde Entzündung, Geschwüre, Nebenhöhlen, Aas, Nekrose, Schorf, etc3, Kopf

Pflege: Shampoo, Gesichtsreinigung, Reinigung mit Augen- und Ohrentropfen,
Mundpflege 4. Ganzheitliche Pflege: Bad im Bett, Sitzbad, An- und Umziehen, Kälte- und Wärmetherapie
5. Kann
eine orale direkte endotracheale Intubationsübung durchführen 6.
Sputumaspirationsmethode 7.
Sauerstoffinhalationsmethode 8. Orale
und nasale Ernährungsmethode 9.
Magenspülung 10.
Beobachtung der Struktur lebenswichtiger Organe in der Brustanatomie 11.
Beobachtung der Struktur lebenswichtiger Organe in der Bauchanatomie 12. Armvenenpunktion,
Injektion und Infusion (Blut)
13. Subkutane Injektion in den Deltoidmuskel 14. Injektion in
den lateralen Femorismus 15. Punktion der Brust-
und Bauchhöhle 16. Klistiermethode

17. Katheterisierung bei Frauen
18. Katheterisierung beim Mann
19. Blasenspülung bei Frauen 20.
Blasenspülung bei Männern 21.
Fisteldrainage 22.
Intramuskuläre Injektion in die Hüfte 23.
Beugen der Gliedmaßen Gelenke nach links und rechts, Drehen und Bewegen auf und ab

Anwendungsbereich 1.

Klinische Lehre und praktische Operationsschulung für Studierende an medizinischen Universitäten,
Krankenpflegesschulen und medizinischen Hochschulen 2.
Fortlaufende klinische Lehrpraxischulung für medizinisches und pflegerisches

Krankenhauspersonal 3. Popularisierung der klinischen Medizinausbildung in Basisgesundheitsseinheiten

Wartung, Garantie 1. Nach dem

Training der nasalen Ernährung, Magenspülung, Einlauf, Katheterisierung und anderen funktionellen
Operationen, die Restflüssigkeit injiziert in die

Magen, Darm und

Die Blase sollte während der Operation entleert werden.

2. Halten Sie das Modell sauber. Nach dem Training sollte das Modell geschrubbt und gereinigt mit sauberem Wasser Tuch, und chemische Lösungsmittel sollten verboten werden.

3. Wenn Sie das Modell längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie es bitte und bewahren Sie es an einem belüfteter, kühler und trockener Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

4. Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum dieses Modells oder der Garantiezeit im Vertrag festgelegt, wenn irgendwelche Qualitätsprobleme auftreten aufgrund des Ausfalls von Die

Herstellungsverfahren oder das Original (außer künstlich hergestellt), ist das Unternehmen verantwortlich für kostenlose Wartungsdienste und verspricht lebenslange Wartung (die Kosten trägt der Benutzer selbst).

PRODUKTPARAMETER

Modell	LD-140
Geschlecht	Frau/Mann
Material	aus PVC

TEILELISTE

Kleidung	1	
Spritze 10ml	1	
Harnkatheter	1	
Sputum-Absaugschlauch	1	

Analkanal	1	
Magensonde	1	
Flasche	3	
Infusionsflasche	1	
Perücke	1	
Geschlechtsorgane	1	
Dekubitus-Modul	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MODELLI DIDATTICI DEL CORPO UMANO

MANUALE D'USO

MODELLO:LD-140

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INSEGNAMENTO DEL CORPO UMANO

MODELLI

MODELLO:LD-140

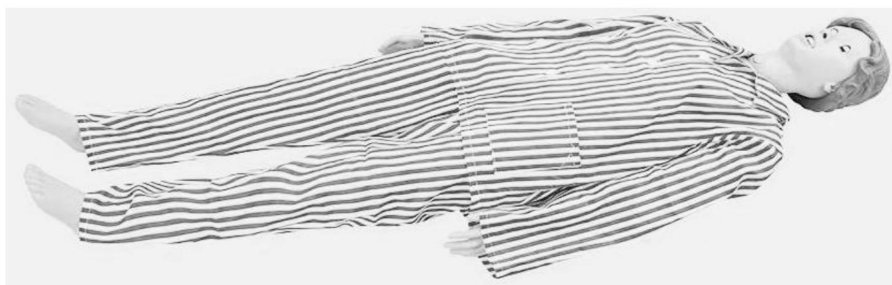

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni gravi.
2. Dopo l'uso, rimontare tutti i componenti e conservarli in posizione verticale.
3. Evitare le alte temperature e la luce solare diretta.
4. Rimuovere le macchie minori con un detergente neutro. L'uso di alcol, benzene e altre sostanze potrebbero danneggiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI

Caratteristiche del modello: Maschio e femmina

Questo modello è progettato secondo i requisiti della clinica di base schema tecnico di funzionamento e pratica infermieristica infermieristica. Utilizzo di importati materiali termoplastici elastico-plastici, con assistenza infermieristica integrale e lo smontaggio di parti per l'insegnamento della formazione delle competenze è una pratica didattica ideale modello per il personale medico clinico. È caratterizzato da immagini vivide, reali funzionamento, smontaggio conveniente, struttura ragionevole, durevole e parti può essere sostituito, è il più avanzato, la funzione più completa, i materiali sono nuovi prodotti eleganti.

Funzioni del prodotto

- 1, la simulazione della posizione inginocchiata supina desiderabile, due gambe dopo l'abduzione può essere un supporto indipendente, il braccio superiore sinistro e destro, il polpaccio può essere rotazione flessibile
- 2, cura delle piaghe da decubito: mostra lo stadio clinico delle piaghe da decubito in 4 fasi diverse, la prima fase: congestione e rosso; Seconda fase: infiltrazione infiammatoria stadio; Stadio 3: stadio di ulcera superficiale; Stadio 4: stadio di ulcera necrotica. Allo stesso tempo, piaghe da decubito e varie manifestazioni patologiche: pressione infiammazione dolorosa, ulcere, seni, carogne, necrosi, escara, ecc., testa

cura: shampoo, lavaggio del viso, pulizia degli occhi e delle orecchie con gocce, igiene orale 4, cura olistica: bagno a letto, bagno seduto, indossare e cambiare i vestiti, terapia del freddo e del caldo 5,

può condurre una formazione sull'operazione di intubazione tracheale diretta orale 6.

Metodo di aspirazione dell'espettorato

7. Metodo di inalazione di ossigeno 8.

Metodo di alimentazione orale e nasale 9.

Lavanda gastrica 10.

Osservazione della struttura degli organi vitali nell'anatomia toracica 11.

Osservazione della struttura degli organi vitali nell'anatomia addominale 12. Venopuntura del braccio, iniezione e infusione (sangue)

13. Iniezione sottocutanea nel muscolo deltoide 14. Iniezione

nel muscolo femorale laterale 15. Puntura della cavità

toracica e addominale 16. Metodo del clistere

17. Cateterizzazione femminile

18. Cateterizzazione maschile

19. Irrigazione della vescica femminile

20. Irrigazione della vescica

maschile 21. Drenaggio

della fistola 22. Iniezione intramuscolare

all'anca 23. Le articolazioni degli arti si piegano a sinistra e a destra, ruotano e si muovono su e giù

Campo di applicazione 1.

Insegnamento clinico e formazione pratica per studenti di università di medicina, scuole infermieristiche e college di medicina 2. Formazione pratica continua di insegnamento

clinico per personale medico e infermieristico ospedaliero 3. Diffondere la formazione in medicina clinica nelle unità

sanitarie di base

Manutenzione, garanzia 1.

Dopo l'addestramento all'alimentazione nasale, alla lavanda gastrica, al clistere, alla cateterizzazione e ad altre operazioni funzionali, il liquido residuo iniettato nel

stomaco, intestino e

la vescica deve essere svuotata durante l'operazione.

2. Mantenere pulito il modello. Dopo l'addestramento operativo, il modello dovrebbe essere strofinare e pulire con acqua pulita, panno e solventi chimici essere proibito.

3. Se non utilizzato per un lungo periodo, pulire il modello e conservarlo in un luogo luogo ventilato, fresco e asciutto per prolungarne la durata.

4. Entro un anno dalla data di acquisto di questo modello o dal periodo di garanzia stipulato nel contratto, se si verificano problemi di qualità dovuti al fallimento di IL

processo di fabbricazione o l'originale (tranne quelli artificiali), la società è responsabile per servizi di manutenzione gratuiti e promette la durata della vita manutenzione (il costo è a carico dell'utente).

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	LD-140
Genere	Donna/Uomo
Materiale	PVC

ELENCO DELLE PARTI

Vestiti	1	
Siringa 10ml	1	
Catetere urinario	1	
Tubo di aspirazione dell'espettorato	1	

Canale anale	1	
Tubo gastrico	1	
Bottiglia	3	
Bottiglia per infusione	1	
Parrucca	1	
Organo genitale	1	
Modulo piaghe da decubito	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MODELOS DE ENSEÑANZA DEL CUERPO HUMANO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:LD-140


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENSEÑANZA DEL CUERPO HUMANO
MODELOS

MODELO:LD-140

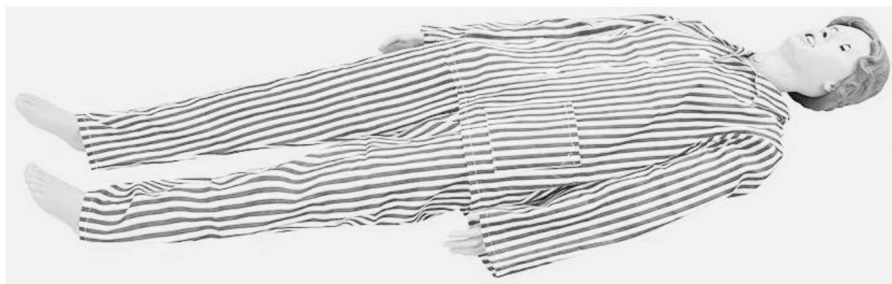

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños. provocar lesiones graves.
2. Después del uso, vuelva a ensamblar todas las piezas y manténgalas en posición vertical.
3. Evite las altas temperaturas y la luz solar directa.
4. Elimine las manchas menores con detergente neutro. El uso de alcohol, benceno y otras sustancias pueden dañar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

Características del modelo: masculino y femenino.

Este modelo está diseñado de acuerdo con los requisitos básicos clínicos.

Esquema técnico de enfermería de operaciones y prácticas de enfermería. Utilizando materiales importados

Materiales elástico-plásticos termoplásticos, con cuidados integrales y

El desmontaje de piezas para la enseñanza de la formación de habilidades es una práctica docente ideal.

Modelo para el personal médico clínico. Se caracteriza por una imagen vívida, real

Operación, desmontaje conveniente, estructura razonable, durable y piezas

se puede reemplazar, es el más avanzado, la función más completa, materiales nuevos y elegantes.

Funciones del producto

1, la simulación de la posición de rodillas supina deseada, dos piernas después

La abducción puede ser de apoyo independiente, el brazo superior izquierdo y derecho, la pantorrilla puede ser rotación flexible

2. Cuidado de las úlceras por presión: muestra la etapa clínica de las úlceras por presión en 4 etapas diferentes, la primera

Etapas: congestión y enrojecimiento; La segunda etapa: infiltración inflamatoria

Etapas; Etapa 3: etapa de úlcera superficial; Etapa 4: etapa de úlcera necrótica.

Al mismo tiempo, úlceras por presión y diversas manifestaciones patológicas: presión

Inflamación dolorosa, úlceras, senos nasales, carroña, necrosis, escaras, etc. 3, cabeza

Cuidados: champú, lavado de cara, limpieza de ojos y oídos con gotas, cuidado bucal. 4. Cuidados holísticos: baño en cama, baño sentado, uso y cambio de ropa, terapia de frío y calor. 5. Puede realizar capacitación en operación de intubación traqueal directa oral. 6. Método de aspiración de esputo. 7. Método de inhalación de oxígeno. 8. Método de alimentación oral y nasal. 9. Lavado gástrico. 10. Observación de la estructura de los órganos vitales en la anatomía torácica. 11. Observación de la estructura de los órganos vitales en la anatomía abdominal. 12. Venopunción, inyección e infusión (sangre) del brazo. 13. Inyección subcutánea en el músculo deltoides 14. Inyección en el músculo femoral lateral 15. Punción de la cavidad torácica y abdominal 16. Método de enema 17. Cateterismo femenino 18. Cateterismo masculino 19. Irrigación de vejiga femenina 20. Irrigación de vejiga masculina 21. Drenaje de fístula 22. Inyección intramuscular en la cadera 23. Las articulaciones de las extremidades se doblan hacia la izquierda y la derecha, giran y se mueven hacia arriba y hacia abajo

Ámbito de aplicación 1.

Enseñanza clínica y capacitación práctica para estudiantes de universidades de medicina, escuelas de enfermería y facultades de medicina 2.

Capacitación continua en enseñanza clínica para personal médico y de enfermería de hospitales 3.

Popularizar la capacitación en medicina clínica en unidades de salud de base

Mantenimiento, garantía 1.

Después del entrenamiento de alimentación nasal, lavado gástrico, enema, cateterismo y otras operaciones funcionales, el líquido residual inyectado en el

estómago, intestino y

La vejiga debe vaciarse durante la operación.

2. Mantenga el modelo limpio. Después del entrenamiento de operación, el modelo debe Se debe frotar y limpiar con un paño con agua limpia y no usar disolventes químicos. estar prohibido.

3. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, limpie el modelo y guárdelo en un lugar Lugar ventilado, fresco y seco para prolongar la vida útil.

4. Dentro de un año a partir de la fecha de compra de este modelo o del período de garantía. estipulado en el contrato, si se produce algún problema de calidad debido a la falla de el

proceso de fabricación o el original (excepto el artificial), la empresa es

Responsable de servicios de mantenimiento gratuitos y promete garantía de por vida.

mantenimiento (el coste corre por cuenta del usuario).

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	LD-140
Género	Mujer/Hombre
Material	CLORURO DE POLIURETANO

LISTA DE PIEZAS

Ropa	1	
Jeringa de 10 ml	1	
Catéter urinario	1	
Tubo de succión de esputo	1	

Canal anal	1	
Tubo gástrico	1	
Botella	3	
Botella de infusión	1	
Peluca	1	
Órgano genital	1	
Módulo de escaras	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MODELE NAUCZANIA CIAŁA CZŁOWIEKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:LD-140


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAUCZANIE CIAŁA CZŁOWIEKA
MODELE

MODEL:LD-140

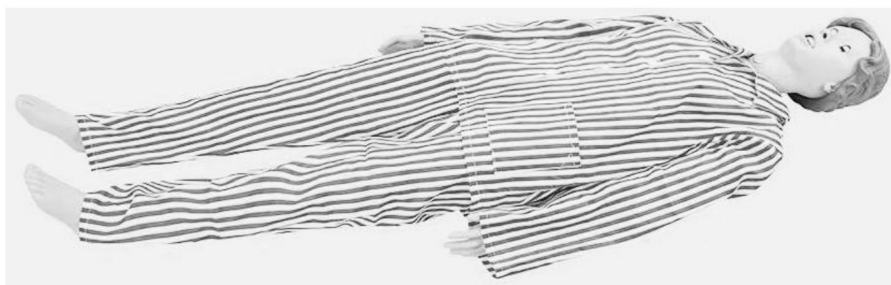

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
2. Po użyciu należy złożyć wszystkie części i trzymać je w pozycji pionowej.
3. Unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
4. Usuń drobne plamy neutralnym detergentem. Stosowanie alkoholu, benzenu i inne substancje mogą uszkodzić produkt.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

INSTRUKCJE

Cechy modelu: Mężczyzna i kobieta

Model ten został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami podstawowej diagnostyki klinicznej. operacja pielęgniarstwa i praktyka pielęgniarstwa zarys techniczny. Używanie importowanych materiały termoplastyczne elasto-plastyczne, z integralną pielęgnacją i rozbiór części w celu kształcenia umiejętności dydaktycznych jest idealną praktyką dydaktyczną model dla personelu medycznego. Charakteryzuje się żywym obrazem, realnym obsługą, łatwy demontaż, rozsądna konstrukcja, trwałość i części można wymienić, jest najbardziej zaawansowany, ma najbardziej kompletne funkcje, materiały, eleganckie nowe produkty.

Funkcje produktu

1. Symulacja pożądanego położenia kłęczącej na plecach, dwie nogi po odwodzenie może być niezależnym wsparciem, lewe i prawe ramię górne, łydka może być elastyczna rotacja
2. Pielęgnacja odleżyn: pokaz kliniczne stadium odleżyny 4 różne stadia, pierwsze etap: przekrwienie i zaczerwienienie; Drugi etap: naciek zapalny stadium; Stadium 3: stadium płytkiego owrzodzenia; Stadium 4: stadium owrzodzenia martwiczego. jednocześnie odleżyny i różne objawy patologiczne: ucisk bolesne stany zapalne, wrzody, zatoki, padlina, martwica, strup itp.3, głowa

Pielęgnacja: szampon, płyn do mycia twarzy, czyszczenie kroplami do oczu i uszu, pielęgnacja jamy ustnej 4, holistyczna opieka: kąpiel w łóżku, kąpiel na siedząco, zakładanie i zmiana ubrań, terapia

zinnem i ciepłem 5, możliwość przeprowadzenia szkolenia w zakresie doustnej bezpośredniej intubacji tchawicy 6.

Metoda aspiracji płwociny 7. Metoda inhalacji tlenem 8. Metoda karmienia doustnego i donosowego 9.

Płukanie żołądka 10. Obserwacja struktury narządów życiowych w anatomii klatki piersiowej 11. Obserwacja struktury narządów życiowych w anatomii jamy brzusznej 12. Nakłucie żyły ramiennej, wstrzyknięcie i infuzja (krew)

13. Wstrzyknięcie podskórne w mięsień naramienny 14.

Wstrzyknięcie w mięsień boczny uda 15. Nakłucie klatki piersiowej i jamy brzusznej 16. Metoda lewatywy

17.Cewnikowanie kobiet

18.Cewnikowanie mężczyzn

19.Irygacja pęcherza moczowego u

kobiet 20.Irygacja pęcherza

moczowego u mężczyzn

21.Drenaż przetoki 22.Iniekcja domięśniowa

do stawu biodrowego 23.Stawy kończyn zginają się w lewo i prawo, obracają się i poruszają w górę i w dół

Zakres zastosowania 1.

Nauczanie kliniczne i praktyczne szkolenie operacyjne dla studentów uniwersytetów medycznych, szkół pielęgniarstwa i wyższych szkół medycznych 2. Ciągłe szkolenie

praktyczne w zakresie nauczania klinicznego dla personelu medycznego i pielęgniarstwa szpitali 3.

Popularyzacja

szkoleń z zakresu medycyny klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Konserwacja, gwarancja 1. Po

przeszkoleniu w zakresie karmienia przez nos, płukania żołądka, lewatywy, cewnikowania i innych czynności funkcjonalnych, resztki płynu wstrzykuje się do

żołądek, jelita i

Podczas operacji pęcherz powinien być opróżniony.

2. Utrzymuj model w czystości. Po treningu operacyjnym model powinien być należy szorować i czyścić czystą wodą, szmatką i rozpuszczalnikami chemicznymi być zabronione.

3. Jeśli model nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyczyścić i schować w wentylowane, chłodne i suche miejsce, aby przedłużyć żywotność urządzenia.

4. W ciągu roku od daty zakupu tego modelu lub od daty zakończenia okresu gwarancyjnego określone w umowie, jeżeli wystąpią jakiegokolwiek problemy z jakością z powodu awarii ten


proces produkcyjny lub oryginalny (z wyjątkiem sztucznych), firma jest odpowiada za bezpłatne usługi konserwacyjne i obiecuje dożywotnią gwarancję konserwacja (koszty pokrywa użytkownik).

PARAMETR PRODUKTU

Model	LD-140
Płeć	Kobieta/Mężczyzna
Tworzywo	PCV

LISTA CZĘŚCI

Odzież	1	
Strzykawka 10ml	1	
Cewnik moczowy	1	
Rurka do odsysania płwociny	1	

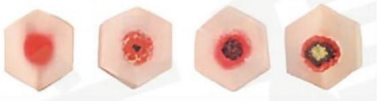Kanał odbytu	1	
Sonda żołądkowa	1	
Butelka	3	
Butelka do infuzji	1	
Peruka	1	
Narząd płciowy	1	
Moduł na odleżyny	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MENSELIJKE LICHAAMSONDERWIJSMODELLEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:LD-140

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MENSELIJK LICHAAM ONDERWIJS
MODELLEN**

MODEL:LD-140

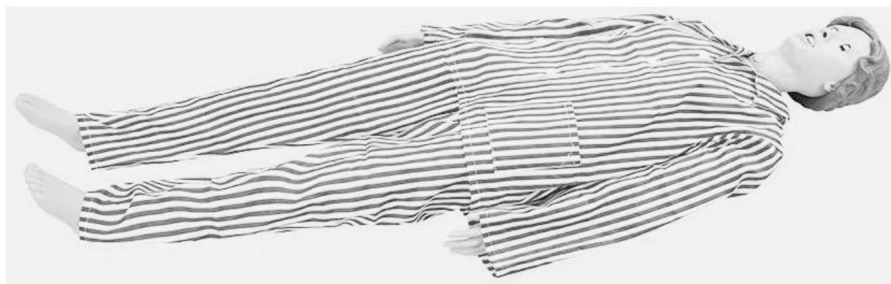

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.
2. Monteer na gebruik alle onderdelen weer in elkaar en bewaar ze verticaal.
3. Vermijd hoge temperaturen en direct zonlicht.
4. Verwijder kleine vlekken met een neutraal reinigingsmiddel. Het gebruik van alcohol, benzeen en andere stoffen kunnen het product beschadigen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIES

Modelkenmerken:mannelijk en vrouwelijk

Dit model is ontworpen volgens de vereisten van de klinische basis verpleegkundige operatie en praktijk verpleegkundige technische schets. Met behulp van geïmporteerde thermoplastische elastische kunststofmaterialen, met geïntegreerde verzorging en het demonteren van onderdelen voor vaardigheidstrainingen is een ideale onderwijspraktijk model voor klinisch medisch personeel. Het wordt gekenmerkt door een levendig beeld, echt bediening, gemakkelijke demontage, redelijke structuur, duurzaam en onderdelen kan worden vervangen, is het meest geavanceerd, de meest complete functie, materialen elegante nieuwe producten.

Productfuncties

- 1, de simulatie van de gewenste knielende positie, twee benen na abductie kan onafhankelijke ondersteuning zijn, linker en rechter bovenarm, kuit kan zijn flexibele rotatie
- 2, doorligwondenzorg: toon de klinische fase van de doorligwond in 4 verschillende stadia, de eerste stadium: congestie en rood; Het tweede stadium: ontstekingsinfiltratie stadium; Stadium 3: ondiep ulcusstadium; Stadium 4: necrotisch ulcusstadium. In de tegelijkertijd, doorligwonden en verschillende pathologische manifestaties: druk pijnlijke ontstekingen, zweren, sinussen, aas, necrose, korst, enz.3, hoofd

verzorging: shampoo, gezichtsreiniging, oog- en oordruppels, mondverzorging

4, holistische verzorging: bedbad, zitbad, kleding dragen en verschonen, koude- en

warmtetherapie 5, kan training geven in orale directe tracheale intubatie-

operatie 6. Sputum-aspiratiemethode

7. Zuurstofinhalatiemethode 8.

Orale en nasale voedingsmethode 9.

Maagspoeling 10.

Structuurobservatie van vitale organen in thoracale anatomie 11. Observatie

van de structuur van vitale organen in abdominale anatomie 12. Venapunctie van de arm, injectie en infusie (bloed)

13. Subcutane injectie in de deltoïde spier 14. Injectie in

de laterale femoris spier 15. Borstholte en

buikholte punctie 16. Klysma methode

17. Vrouwelijke katheterisatie

18.Mannelijke katheterisatie

19. Vrouwelijke blaasirrigatie 20.

Mannelijke blaasirrigatie 21.

Fisteldrainage 22. Heup

intramusculaire injectie 23.

Ledematengewrichten buigen naar links en rechts, draaien en bewegen op en neer

Toepassingsgebied 1.

Klinisch onderwijs en praktische operationele training voor studenten aan medische universiteiten, verpleegscholen en medische hogescholen 2.

Doorlopende klinische onderwijspraktijktraining voor medisch en verpleegkundig personeel in ziekenhuizen

3. Popularisering van klinische medische training in basisgezondheidszorgeenheden

Onderhoud, garantie 1. Na

de training van neusvoeding, maagspoeling, klysma, katheterisatie en andere functionele operaties, wordt de resterende vloeistof die in de

maag, darmen en

De blaas moet tijdens de operatie leeg zijn.

2. Houd het model schoon. Na de operationele training moet het model schoon zijn. geschrobd en schoongemaakt met een schone doek en chemische oplosmiddelen verboden zijn.

3. Als u het model langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon en bewaar het in een geventileerde, koele en droge plaats om de levensduur te verlengen.

4. Binnen één jaar na de aankoopdatum van dit model of de garantieperiode vastgelegd in het contract, indien er kwaliteitsproblemen optreden als gevolg van het falen van de

productieproces of het origineel (behalve door de mens gemaakt), het bedrijf is verantwoordelijk voor gratis onderhoudsdiensten en belooft levenslange onderhoud (de kosten zijn voor rekening van de gebruiker).

PRODUCTPARAMETER

Model	LD-140
Geslacht	Vrouw/Man
Materiaal	PVC

ONDERDELENLIJST

Kleren	1	
Spuit 10ml	1	
Urinekatheter	1	
Sputum zuigbuis	1	

Anale kanaal	1	
Maagsonde	1	
Fles	3	
Infuusfles	1	
Pruik	1	
Geslachtsorgaan	1	
Doorligwondenmodule	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UNDERVISNINGSMODELLER FÖR MÄNSKLIG KROPP

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:LD-140

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UNDERVISNING I MÄNNISKORKROPPEN

MODELLER

MODELL:LD-140

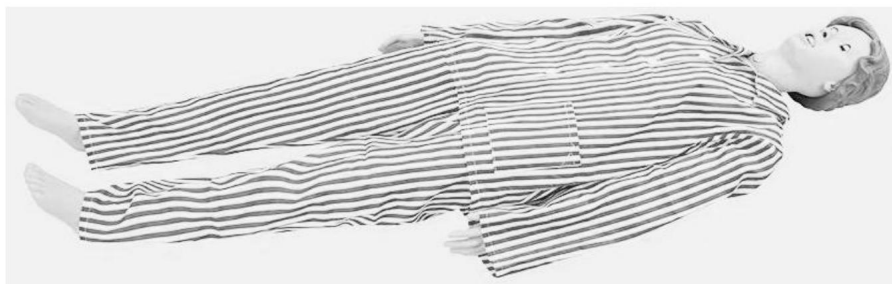

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.
2. Efter användning, montera alla delar och förvara dem vertikalt.
3. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.
4. Ta bort mindre fläckar med neutralt rengöringsmedel. Användningen av alkohol, bensen och andra ämnen kan skada produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTRUKTIONER

Modellegenskaper: Man och kvinna

Denna modell är designad enligt kraven i klinisk grund omvårdnad drift och praktik omvårdnad teknisk disposition. Använder importerade termoplastiska elastiska-plastmaterial, med integrerad omvårdnad och demontering delar för färdighetsträning undervisning, är en idealisk pedagogisk praxis modell för klinisk medicinsk personal. Det kännetecknas av levande bild, verklig drift, bekväm demontering, rimlig struktur, hållbar och delar kan ersättas, är den mest avancerade, den mest kompletta funktionen, material eleganta nya produkter.

Produktens funktioner

- 1, simuleringen av önskvärd liggande knäställning, två ben efter bortförande kan vara oberoende stöd, vänster och höger överarm, vad kan vara flexibel rotation
- 2, liggsårsvård: visa trycksår kliniskt skede 4 olika stadier, det första stadium:trängsel och röd;Det andra stadiet:inflammatorisk infiltration stadium; Stadium 3: grunt sårstadium; Stadium 4: nekrotisk sårstadium. Vid samtidigt trycksår och olika patologiska manifestationer: tryck öm inflammation, sår, bihålor, kadaver, nekros, sår, etc3, huvud

vård: schampo, ansiktstvätt, rengöring av ögon och öron droppar, munvård 4,
holistisk vård: sängbad, sittbad, bära och byta kläder, kyl- och värmeterapi 5, kan genomföra oral
direkt
trakeal intubation operationsutbildning 6. Sputum aspirationsmetod
7. Syrgasinhalationsmetod 8. Oral
och nasal matningsmetod
9. Mastsköljning 10. Strukturobservation av
vitala organ i
bröstkorgsanatomin 11. Observation av strukturen av vitala organ i bukens
anatomi 12. Armvenpunktur, injektion och infusion (blod)

13. Subkutan injektion i deltoideusmuskeln 14. Injektion i
lateral femorismuskel 15. Brösthåla och bukhåla
punktering 16. Lavemangsmetod

17. Kvinnlig kateterisering
18. Manlig kateterisering
19. Kvinnlig urinblåsirrigation 20.
Manlig blåsirrigation 21.
Fisteldränering 22.
Intramuskulär injektion i höften 23.
Extremitetsleder böjer åt vänster och höger, roterar och rör sig upp och ner

Tillämpningsomfång 1.

Klinisk undervisning och praktisk operationsutbildning för studenter vid medicinska universitet,
sjuksköterskeskolor och medicinska högskolor 2. Fortsatt klinisk
undervisningspraktikutbildning för sjukvårds- och sjuksköterskepersonal 3. Populära klinisk
medicinutbildning
på gräsrotsenheter för hälsovård

Underhåll, garanti 1. Efter

träning av näsmatning, magsköljning, lavemang, kateterisering och andra funktionella
operationer injiceras den kvarvarande vätskan i

mage, tarm och

urinblåsan ska tömmas under operationen.

2. Håll modellen ren. Efter operationsutbildningen ska modellen vara skuras och rengöras med ren vattenduk, och kemiska lösningsmedel bör vara förbjudna.

3. Om den inte har använts under en längre tid, rengör modellen och förvara den i en ventilerad, sval och torr plats för att förlänga livslängden.

4. Inom ett år från inköpsdatumet för denna modell eller garantiperioden som anges i kontraktet, om några kvalitetsproblem uppstår på grund av fel på de

tillverkningsprocessen eller originalet (förutom konstgjorda), är företaget ansvarig för gratis underhållstjänster och lovar livstid underhåll (kostnaden är på användarens egen bekostnad).

PRODUKTPARAMETER

Modell	LD-140
Kön	Kvinna/Man
Material	PVC

DELLISTA

Kläder	1	
Spruta 10ml	1	
Urinvägskateter	1	
Sputum sugrör	1	

Analkanalen	1	
Magsond	1	
Flaska	3	
Infusionsflaska	1	
Peruk	1	
Könsorgan	1	
Liggsårsmodul	4	

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support