

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LIFT RECLINER CHAIR

USER MANUAL

MODEL NO.: SX-81541-2


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

MODEL NO.: SX-81541-2

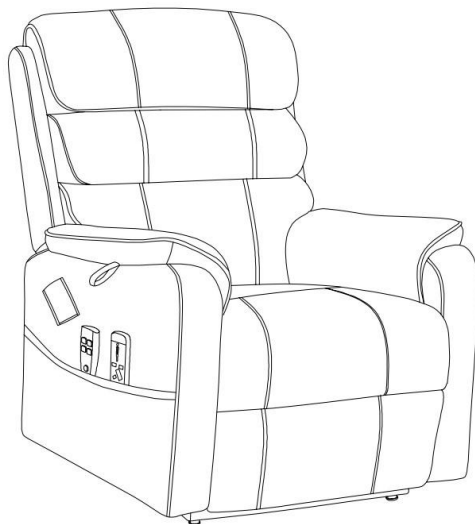

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lift Recliner Chair.

8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed weight capacities. Empty Lift Recliner Chair before moving.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lift Recliner Chair.
4. Use as intended only. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

PACKAGE CONTENTS

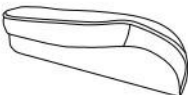Item no.	Reference Image	Qty.	Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1	G		X4
B		X1	H		X1
C		X1	I		X1
D		x2	J		X1
E		x4	K		X1
F		X4	L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ 4pc



ⓐ 1pc

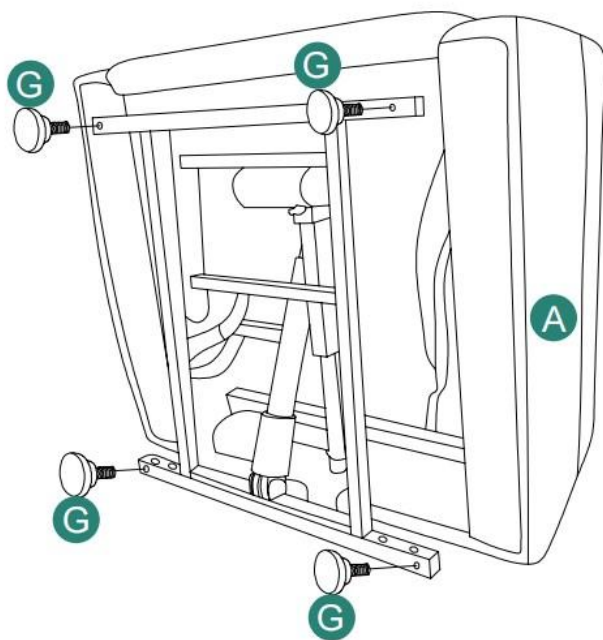

2







Ⓑ 1pc




Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

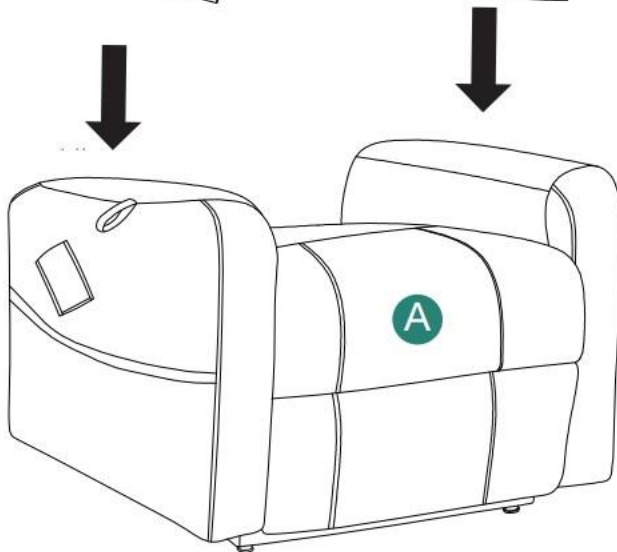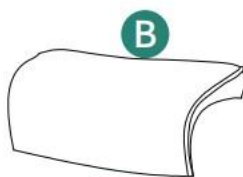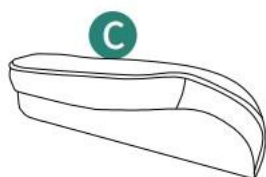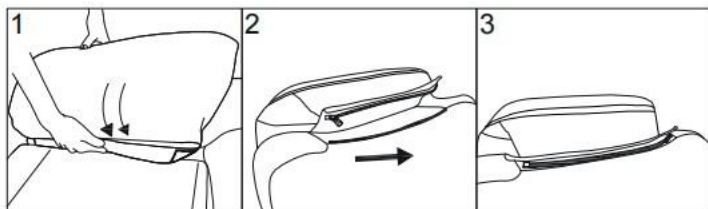

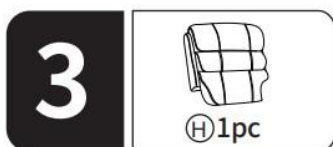

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

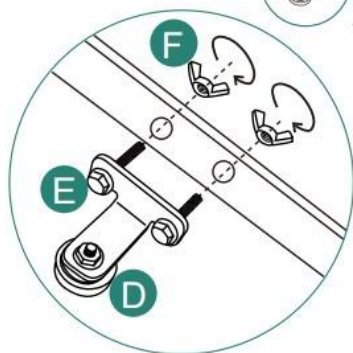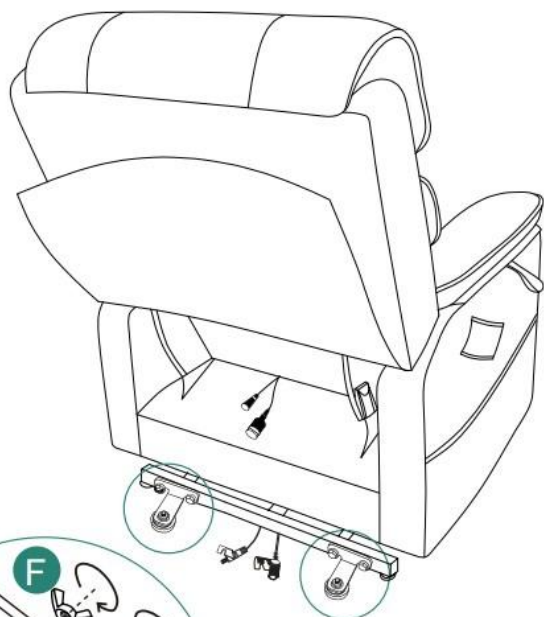

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

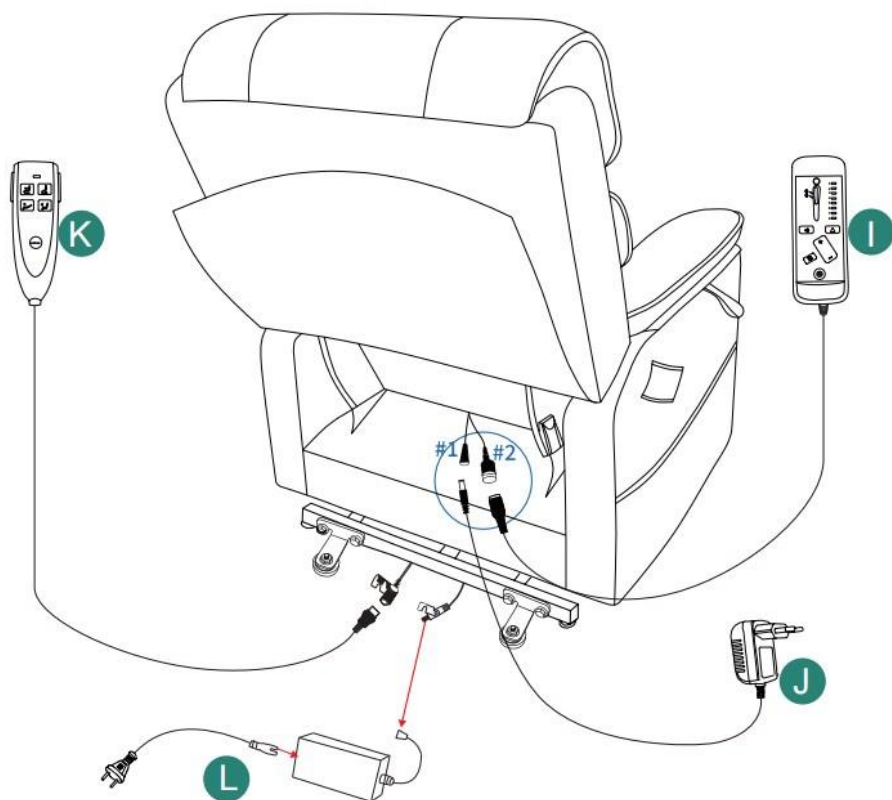


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

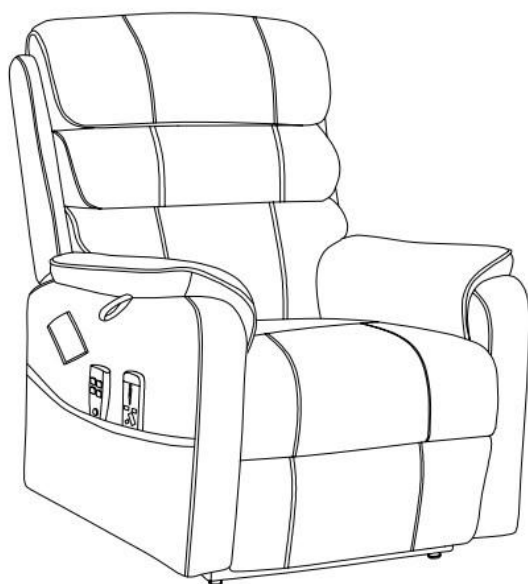


How to use the massage function?

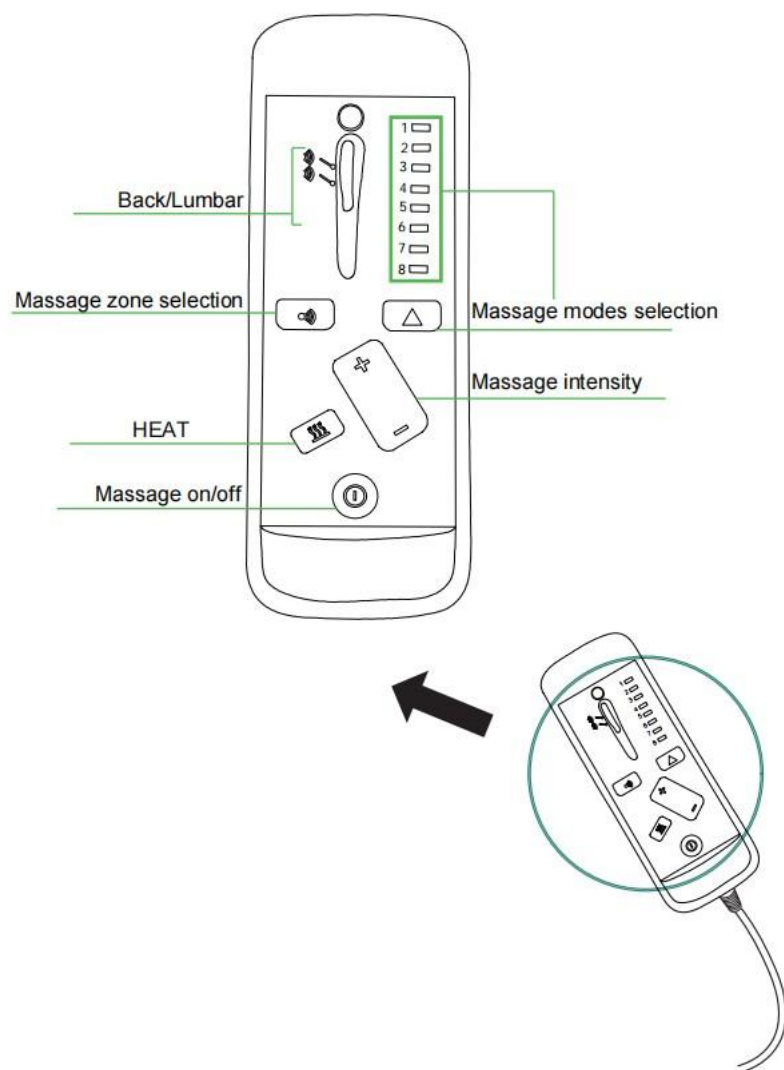

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

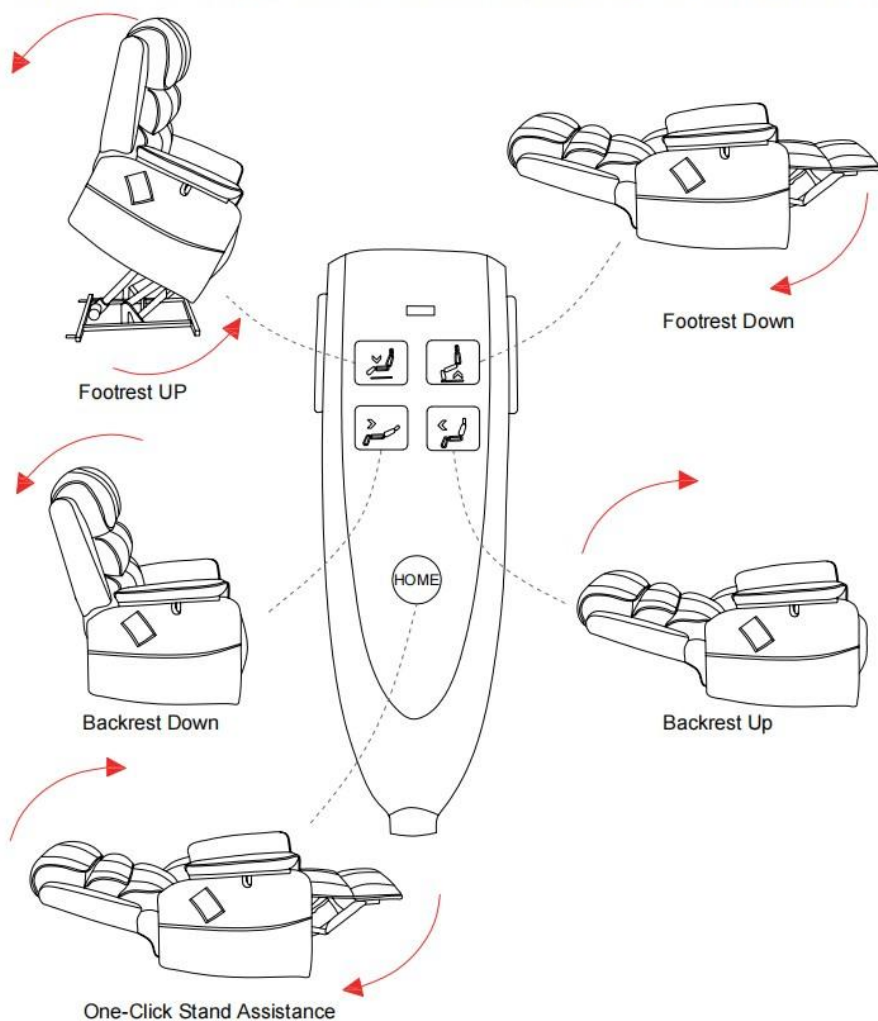

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SX-81541-2
Rating(s)	DC29V 1.8A
Safe Loading Weight	350LB
Product Dimensions (LxWxH)	975*830*1075mm
Packing Size (LxWxH)	825*790*710mm
Net Weight (kg)	About 45kg
Gross Weight (kg)	About 50.3kg

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

FAUTEUIL RELEVEUR INCLINABLE

MANUEL D' UTILISATION

MODÈLE N° : SX- 81541-2


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

MODÈLE N° : SX- 81541-2

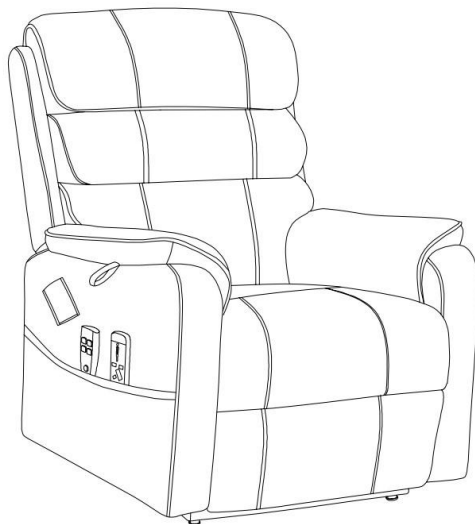

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE .
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
10. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l' assemblage.
11. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
12. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
13. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l' influence de l' alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits

correctement et entièrement assemblés.

15. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le fauteuil inclinable releveur.

16. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel.

Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :


5. Ce produit n'est pas un jouet . Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.


6. Ne pas dépasser les capacités de poids . Videz le fauteuil inclinable releveur avant de le déplacer.

7. Utiliser uniquement sur une surface plane, horizontale, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un fauteuil inclinable releveur entièrement chargé.

8. Utiliser uniquement comme prévu. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

PACKAGE CONTENTS

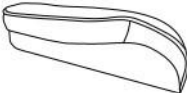Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
B		X1
C		X1
D		x2
E		x4
F		x4

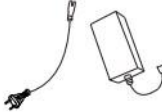Item no.	Reference Image	Qty.
G		X4
H		X1
I		X1
J		X1
K		X1
L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ4pc



ⓐ1pc

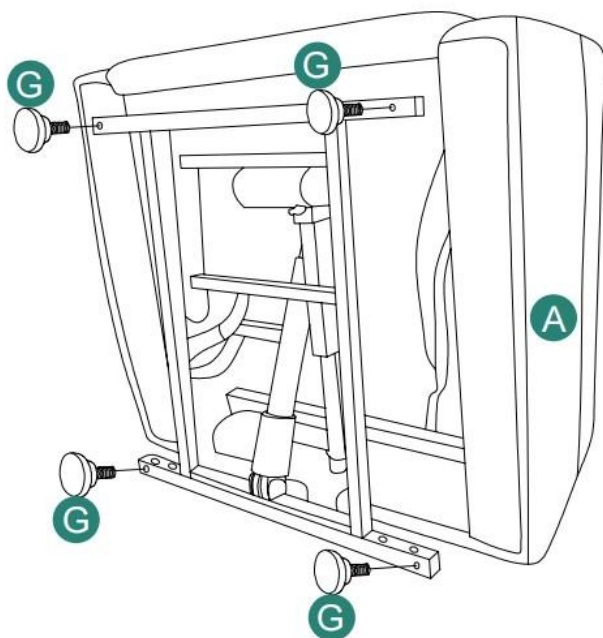

2







Ⓑ 1pc






Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

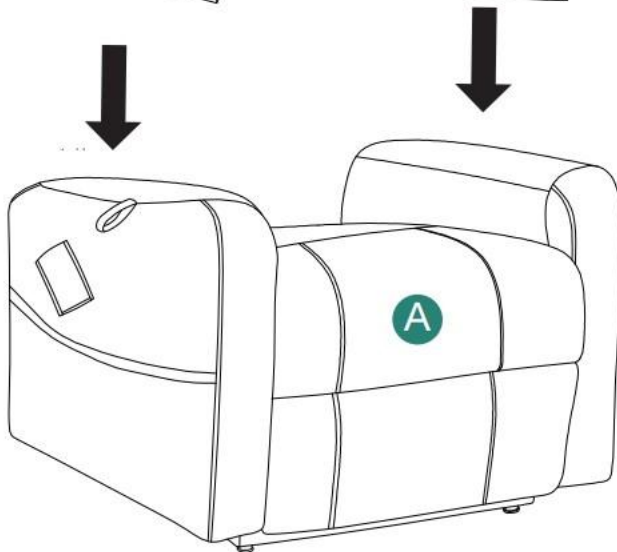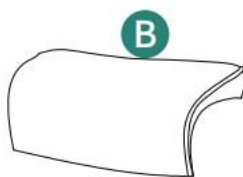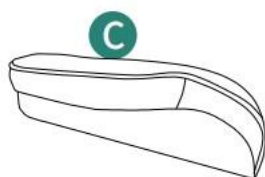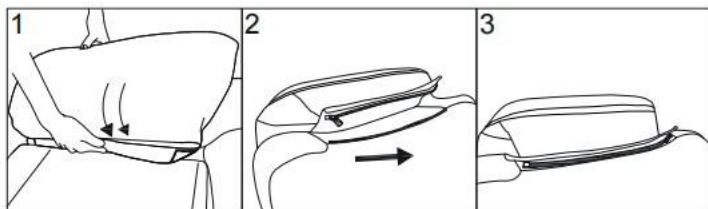

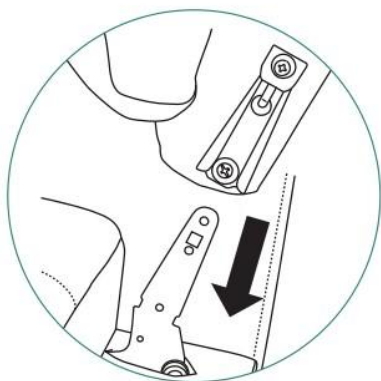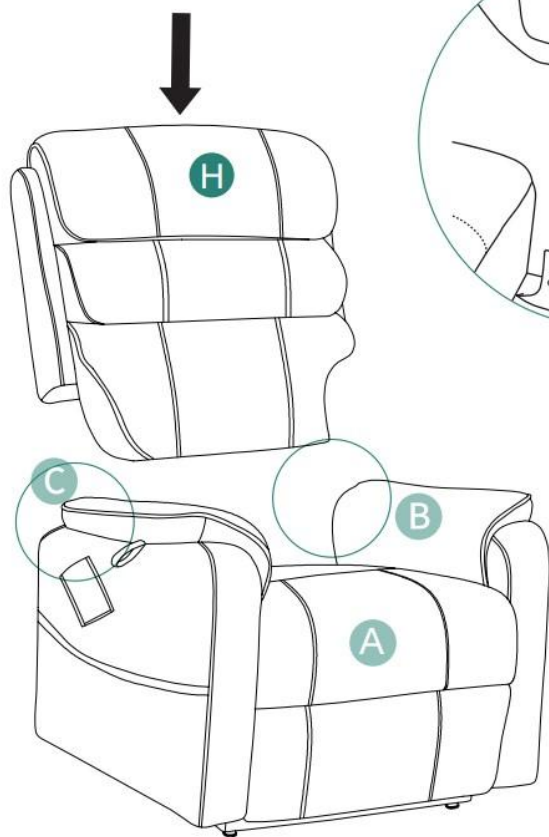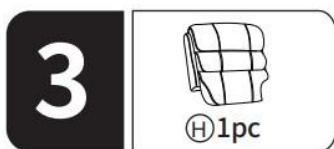

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

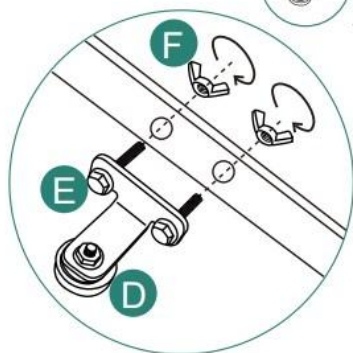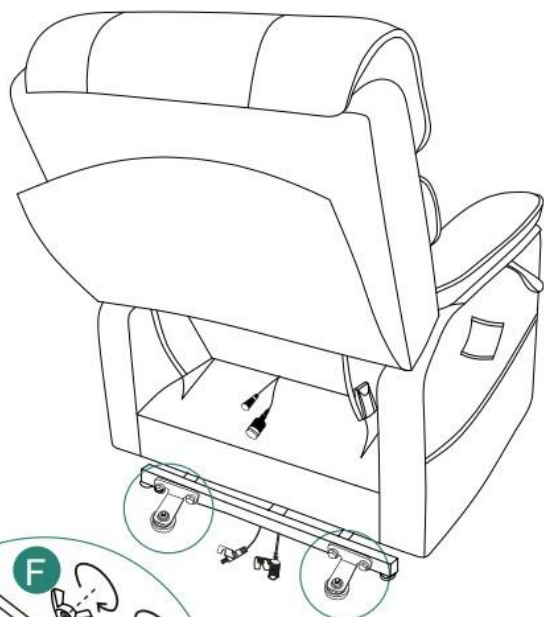

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

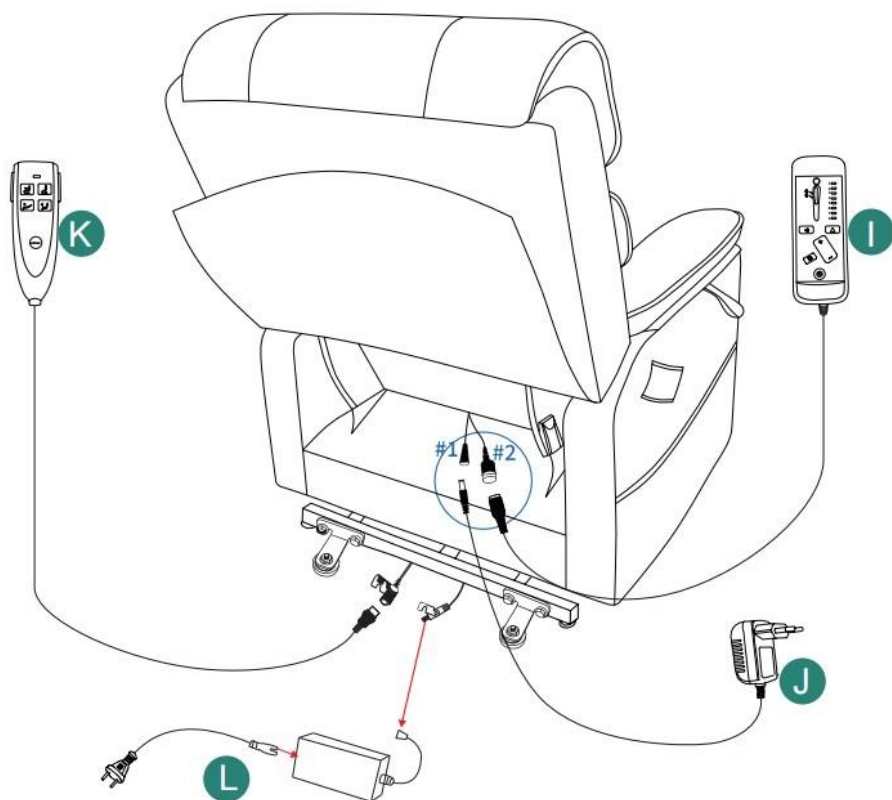


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

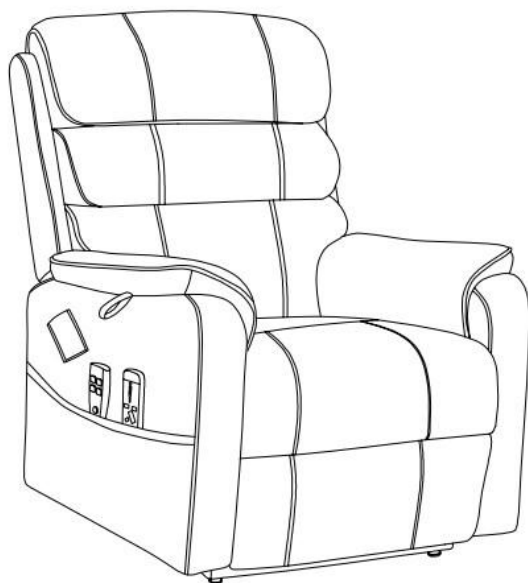


How to use the massage function?

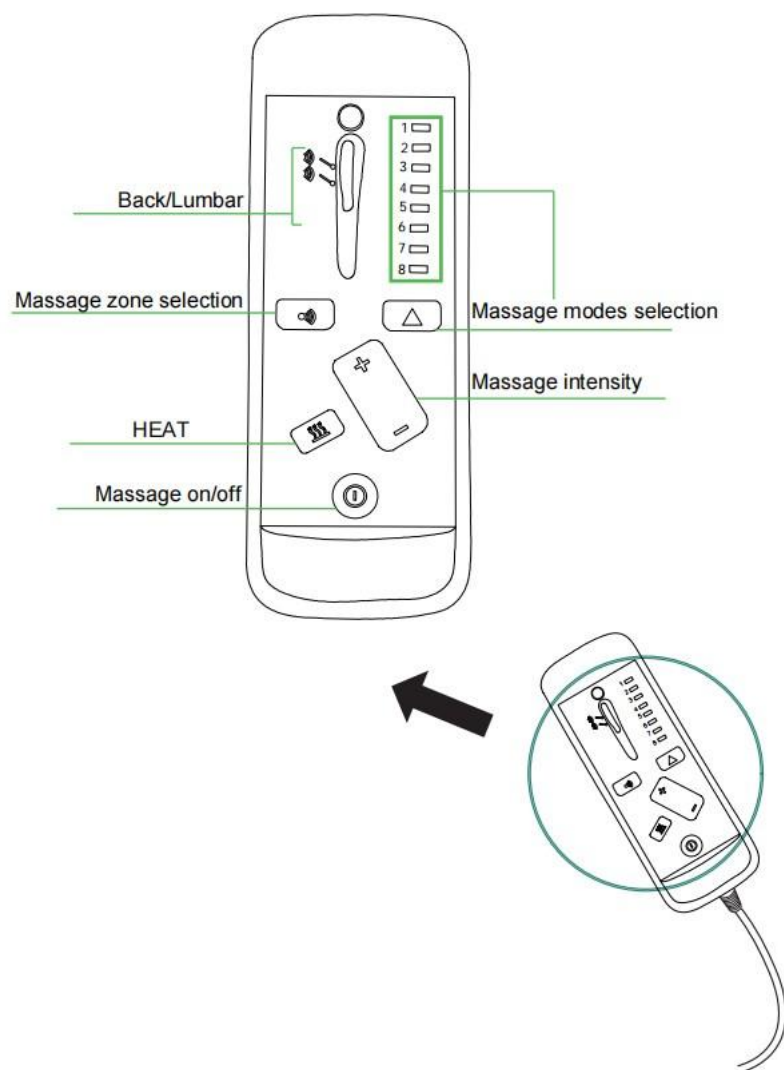

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

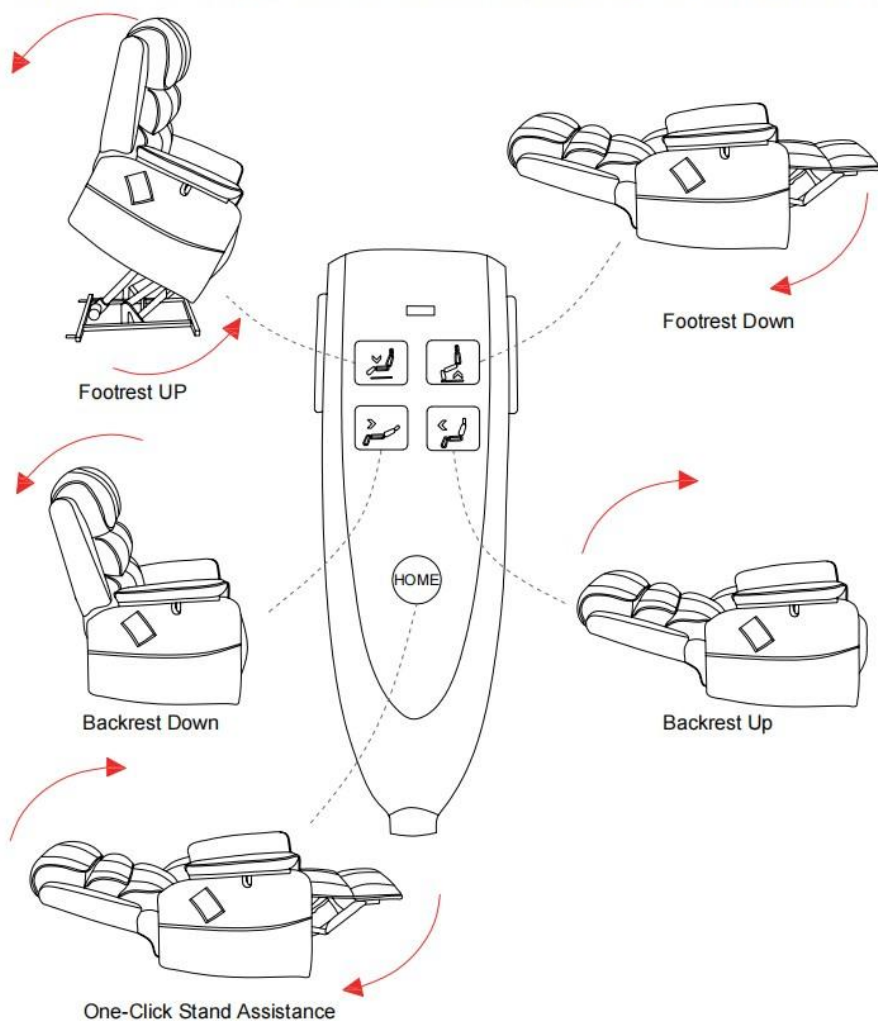

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle	SX- 81541-2
Note(s)	DC29V 1,8A
Sûr Chargement Poids	350 lb
Dimensions du produit (LxIxH)	975*8 3 0*1075mm
Taille de l'emballage (LxIxH)	825*790*710mm
Poids net (kg)	Environ 45 kg
Poids brut (kg)	Environ 50,3 kg

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SESSEL MIT LIFTFUNKTION

BENUTZERHANDBUCH

MODELL NR.: SX-81541- 2

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig


wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

MODELL NR.: SX-81541- 2

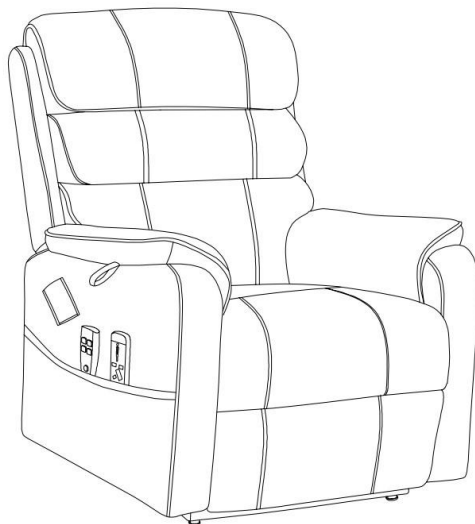

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Die Konformität erfolgt durch eine CE - Sicherheitszertifizierung.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

17. Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
21. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

22. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

23. Montieren Sie den Sessel auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die den Lift-Relax-Sessel sicher tragen kann.

24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

**UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU
VERMEIDEN:**


9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug . Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt oder in dessen Nähe zu spielen.

10. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität . Leeren Sie den Lift-Relax-Sessel, bevor Sie ihn bewegen.

11. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Lift-Relax-Sessel sicher tragen kann.

12. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor jedem Gebrauch überprüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

PACKAGE CONTENTS

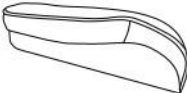Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
B		X1
C		X1
D		x2
E		x4
F		x4

Item no.	Reference Image	Qty.
G		X4
H		X1
I		X1
J		X1
K		X1
L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ4pc



ⓐ1pc

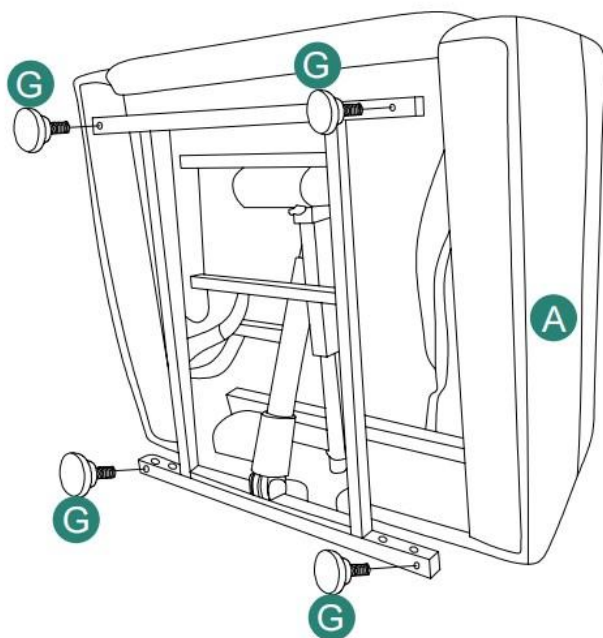

2







Ⓑ 1pc




Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

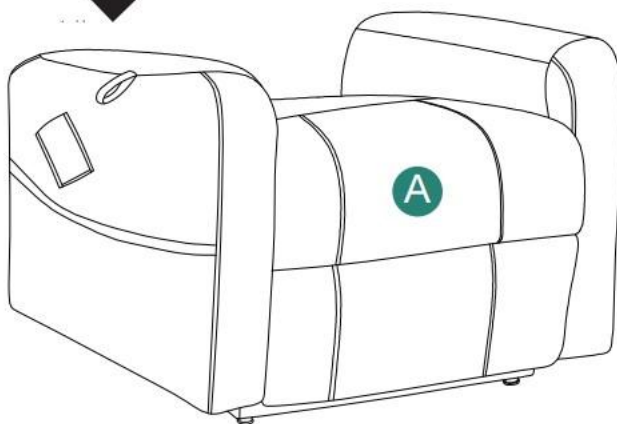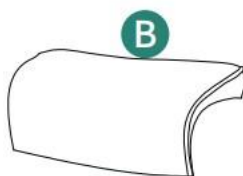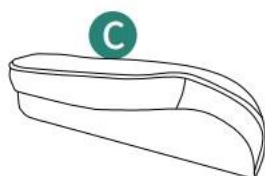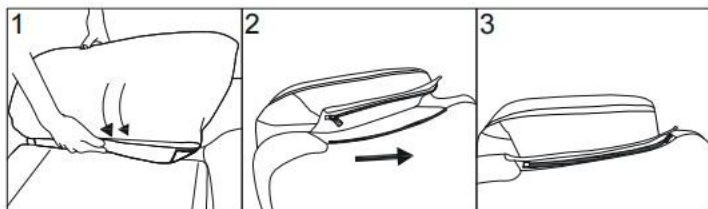

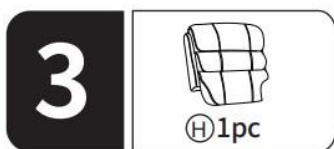

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

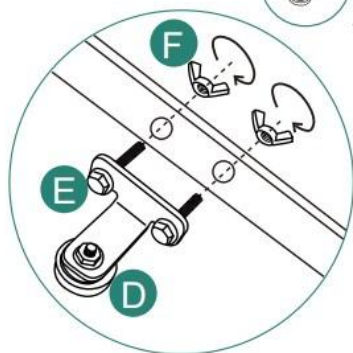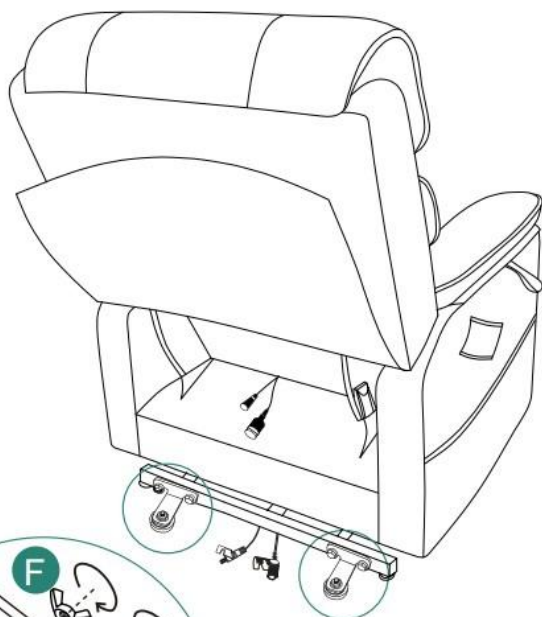

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

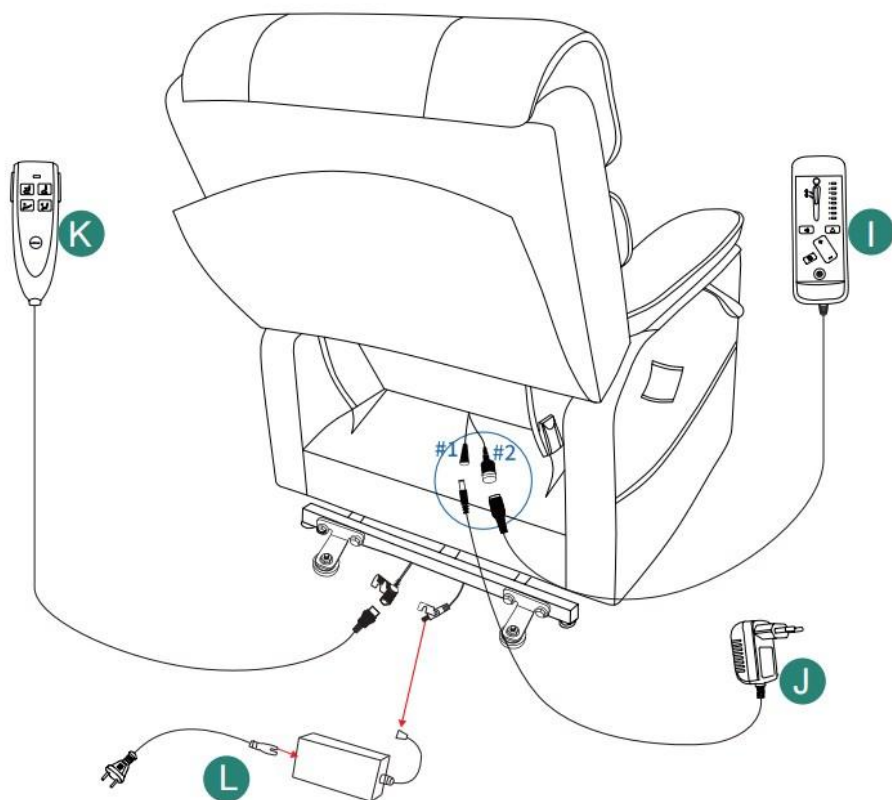


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

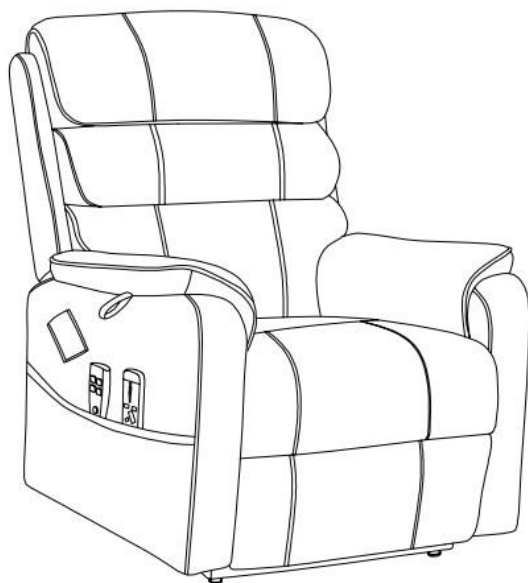


How to use the massage function?

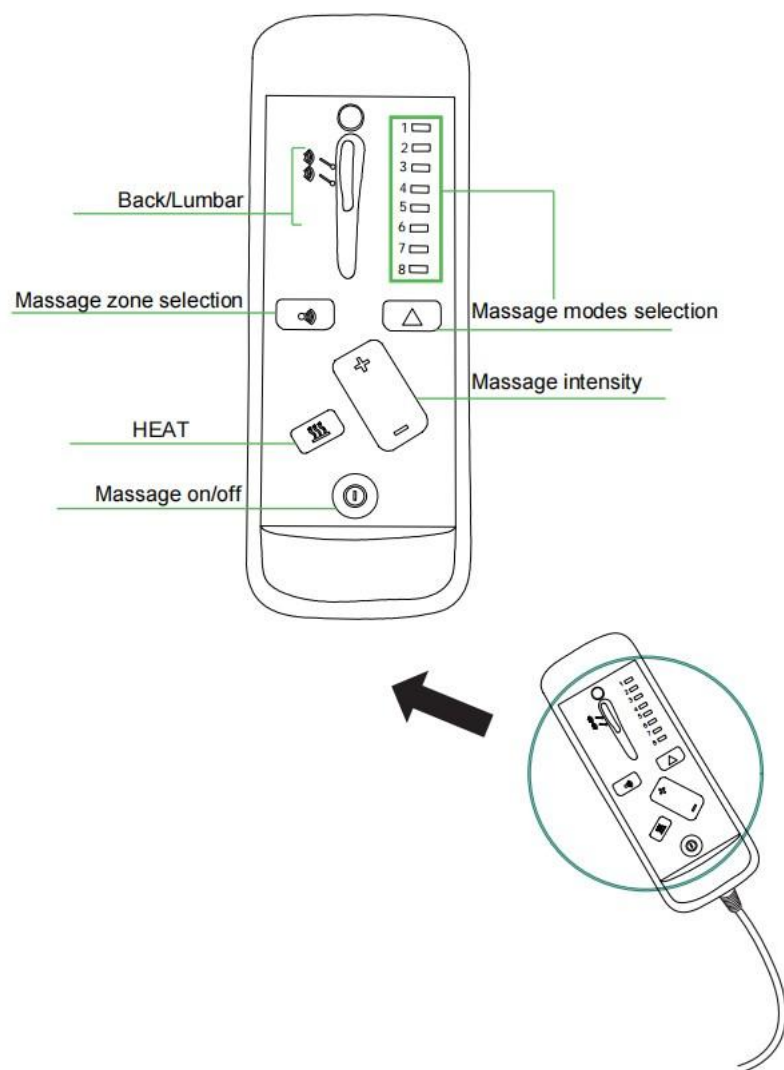

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

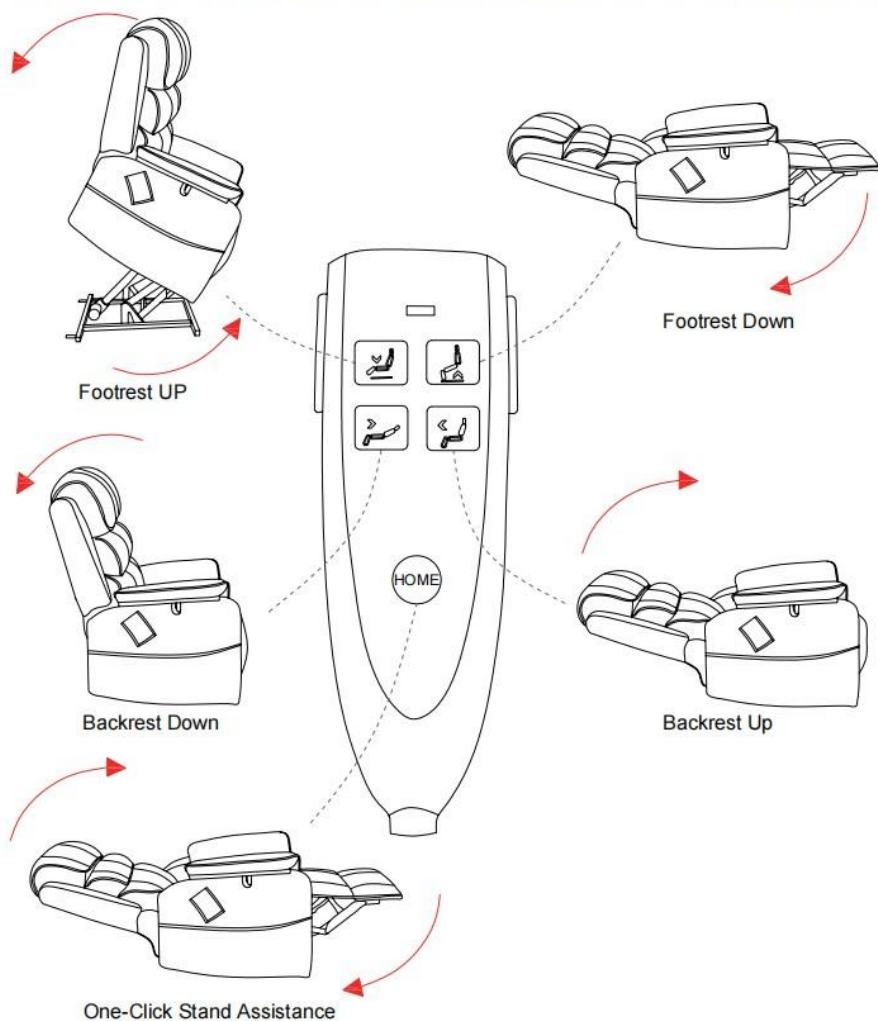

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	SX-81541- 2
Bewertung(en)	DC 29 V, 1,8 A
Sicher Laden Gewicht	350 Pfund
Technische Daten (LxBxH)	975*830*1075 mm
Verpackungsgröße (LxBxH)	825 x 790 x 710 mm
Nettogewicht (kg)	Etwa 45 kg
Bruttogewicht (kg)	Etwa 50,3 kg

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

POLTRONA RECLINABILE ELEVABILE

MANUALE D' USO

MODELLO NUMERO: SX-81541- 2

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente


quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

MODELLO NUMERO: SX-81541- 2

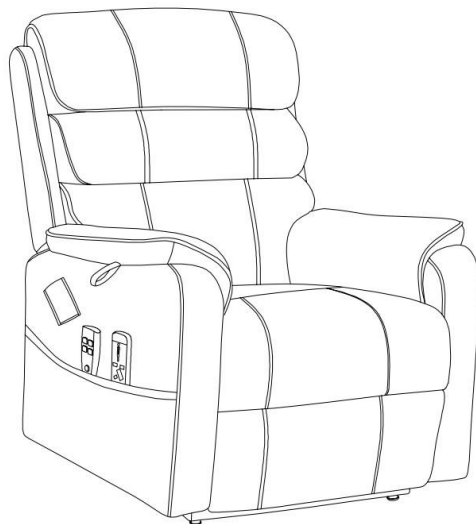

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza C E.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
26. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.

31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro la poltrona reclinabile elevabile.
32. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

13. Questo prodotto non è un giocattolo . Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
14. Non superare la capacità di peso . Svuotare la poltrona reclinabile prima di spostarla.
15. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro una poltrona reclinabile elevabile completamente carica.
16. Utilizzare solo come previsto. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

PACKAGE CONTENTS

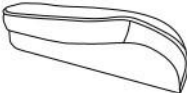Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
B		X1
C		X1
D		x2
E		x4
F		x4

Item no.	Reference Image	Qty.
G		X4
H		X1
I		X1
J		X1
K		X1
L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ4pc



ⓐ1pc

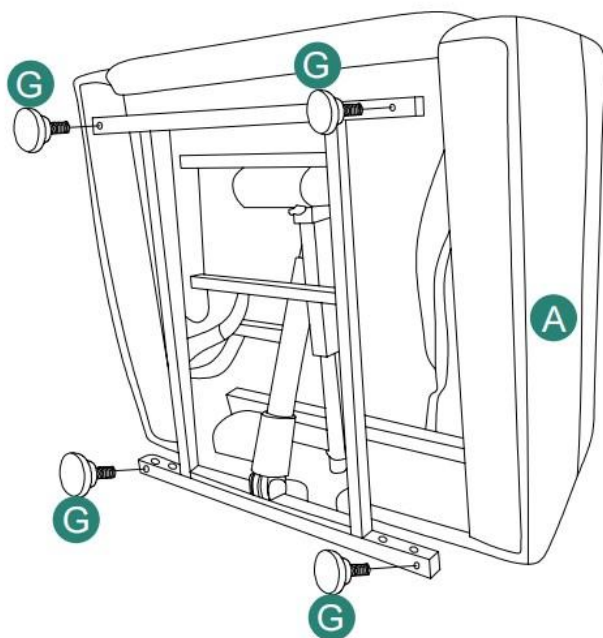

2







Ⓑ 1pc




Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

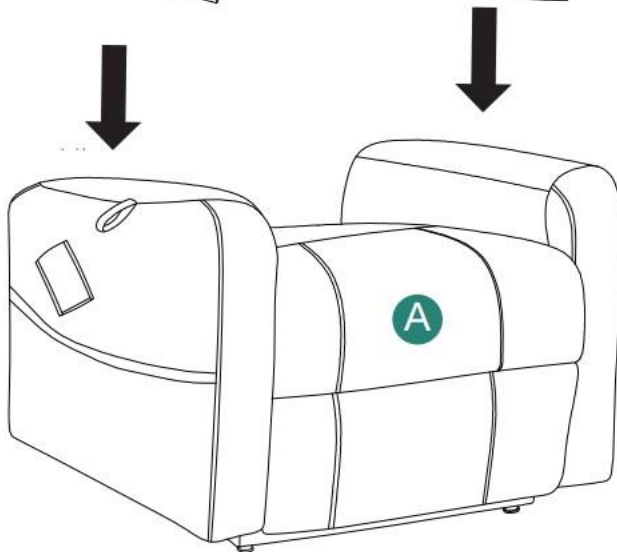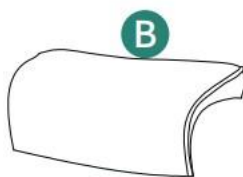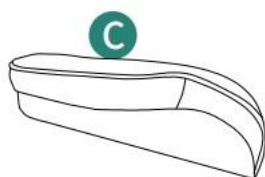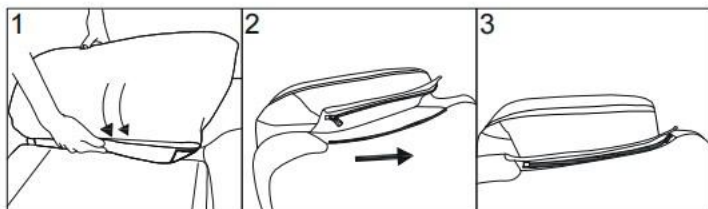

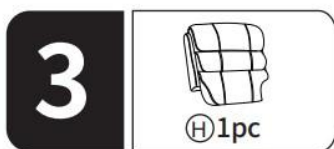

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

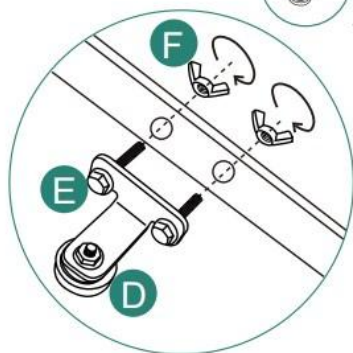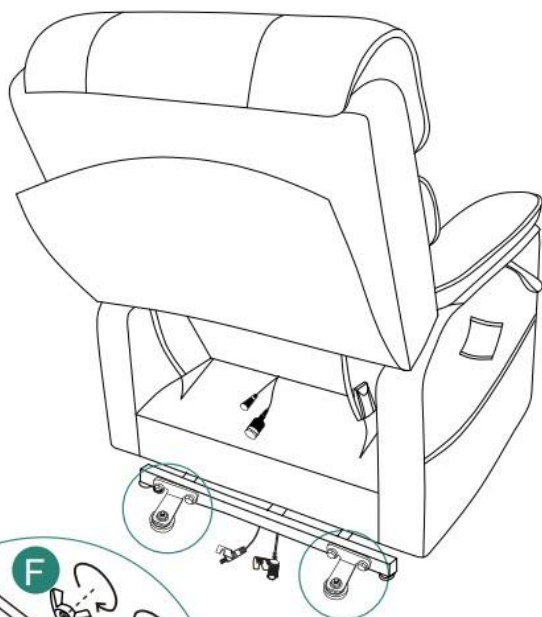

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

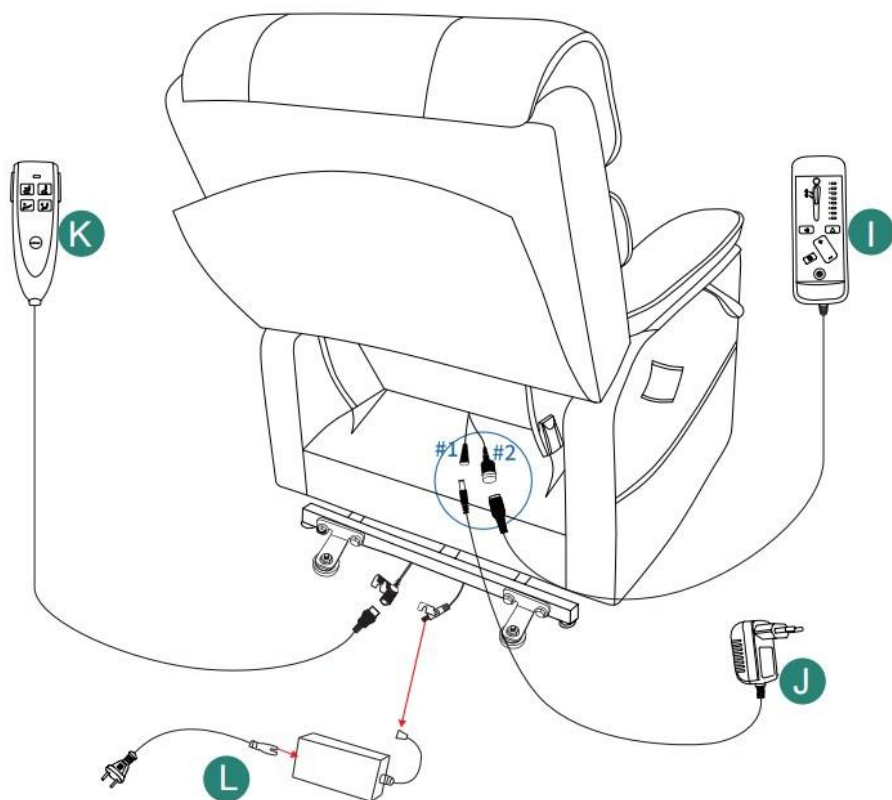


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

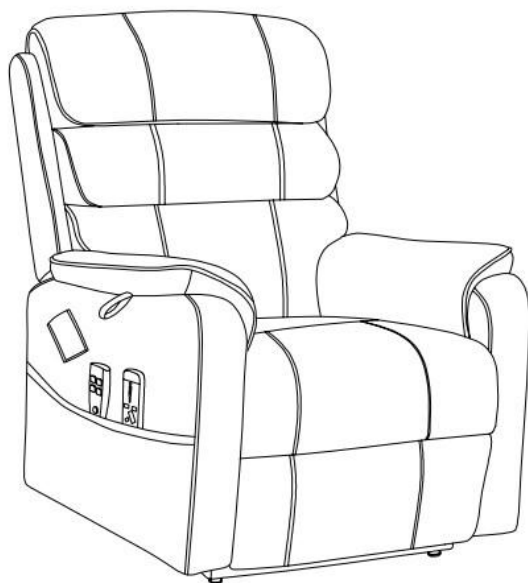


How to use the massage function?

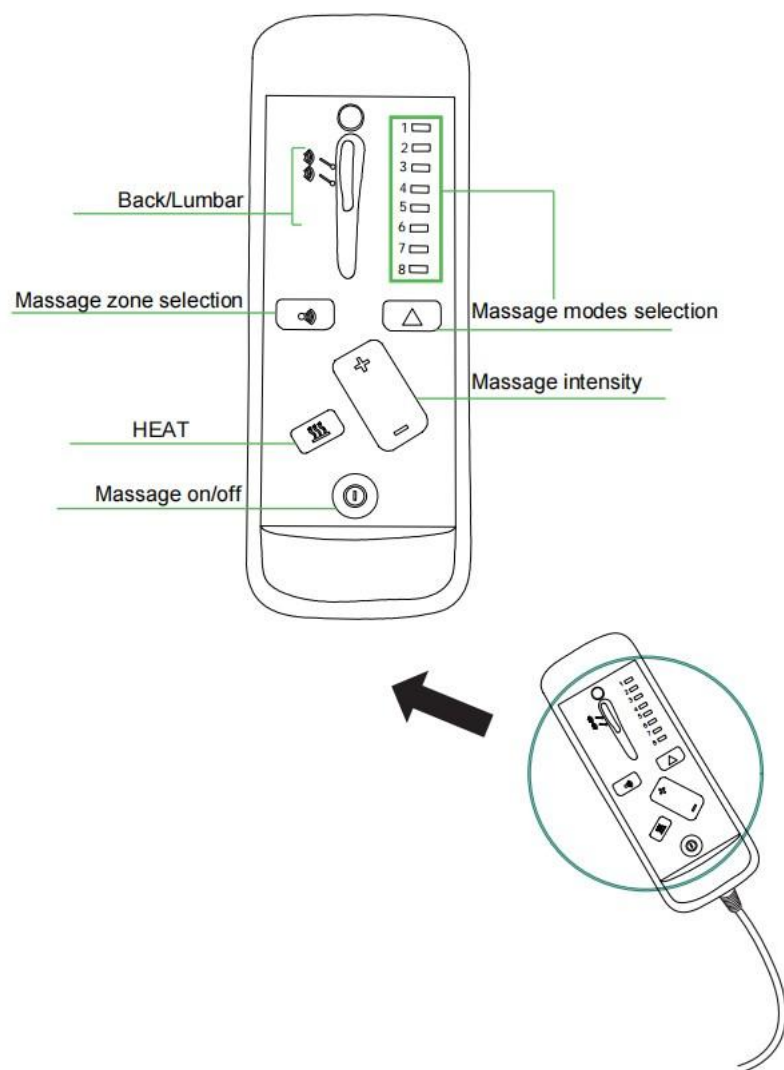

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

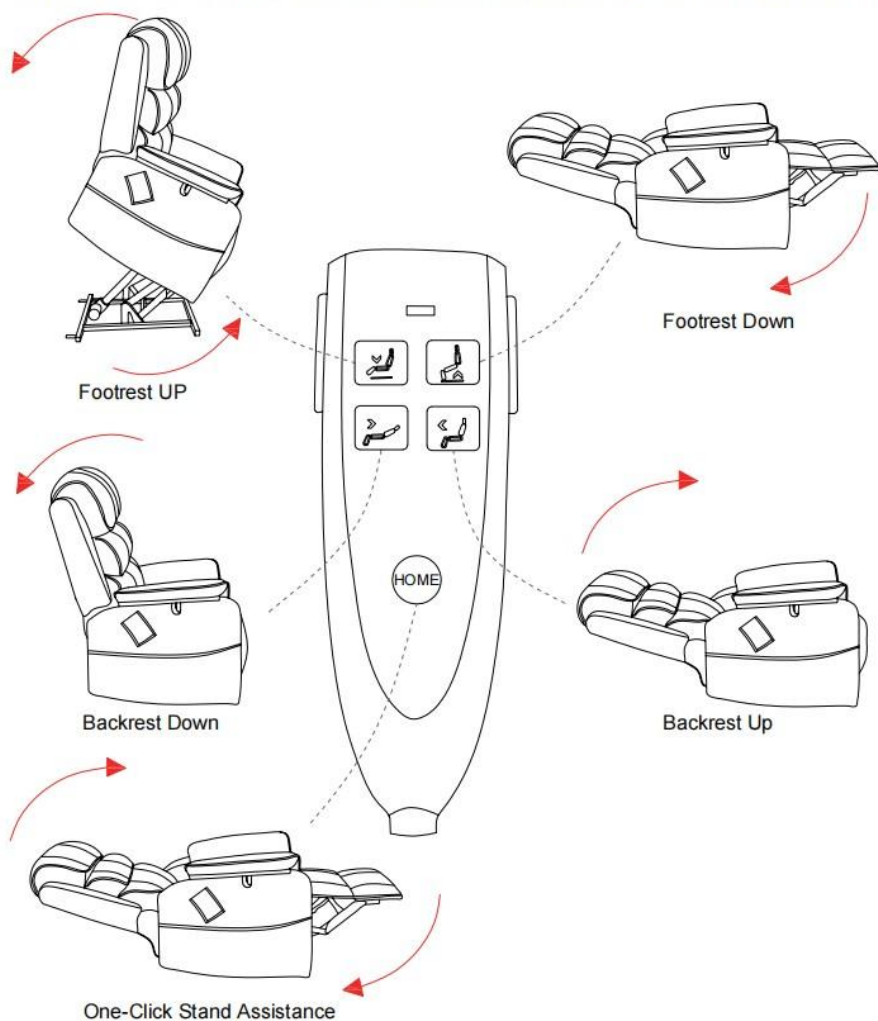

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello	SX-81541- 2
Valutazione(i)	DC29V 1,8A
Sicuro Caricamento Peso	350 libbre
Dimensioni del prodotto (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	975*8 3 0*1075mm
Dimensioni dell'imballaggio (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	825*790*710mm
Peso netto (kg)	Circa 45 kg
Peso lordo (kg)	Circa 50,3 kg

*Specifiche, aspetto e design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SILLÓN RECLINABLE ELEVADOR

MANUAL DEL USUARIO

NÚMERO DE MODELO: SX- 81541-2


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

NÚMERO DE MODELO: SX- 81541-2

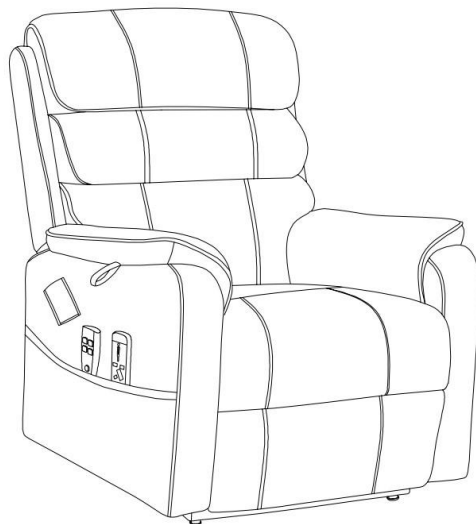

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Compliance es una certificación de seguridad CE .
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

33. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar riesgos.

34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

37. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.

39. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el sillón reclinable elevador.

40. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:


17. Este producto no es un juguete . No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.

18. No exceda las capacidades de peso . Vacíe el sillón reclinable elevador antes de moverlo.

19. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un sillón reclinable elevable completamente cargado.

20. Úselo únicamente según lo previsto. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

PACKAGE CONTENTS

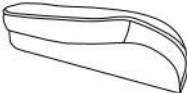Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
B		X1
C		X1
D		x2
E		x4
F		x4

Item no.	Reference Image	Qty.
G		X4
H		X1
I		X1
J		X1
K		X1
L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ4pc



ⓐ1pc

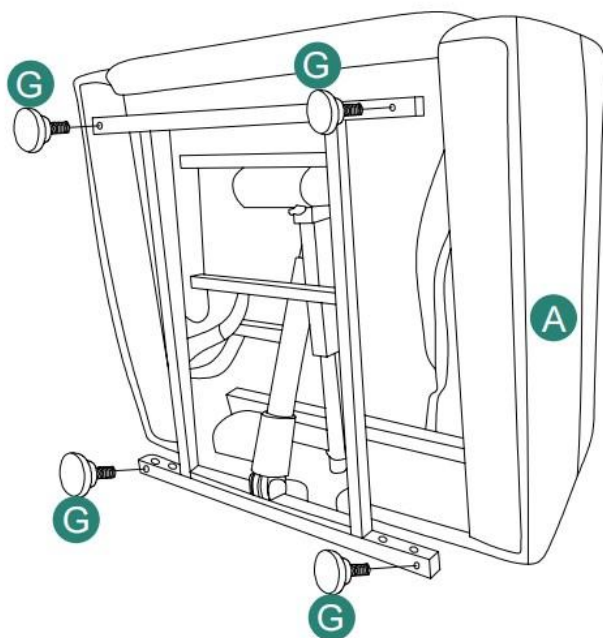

2







Ⓑ 1pc




Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

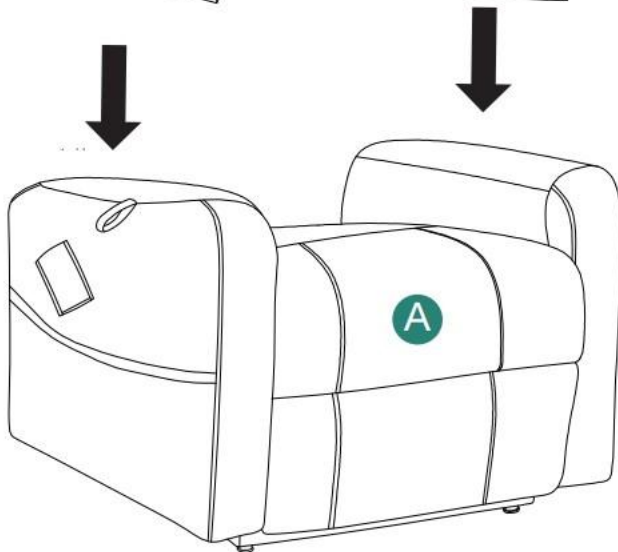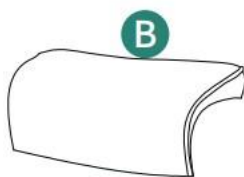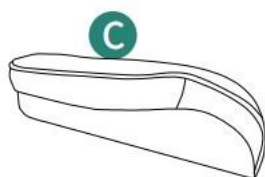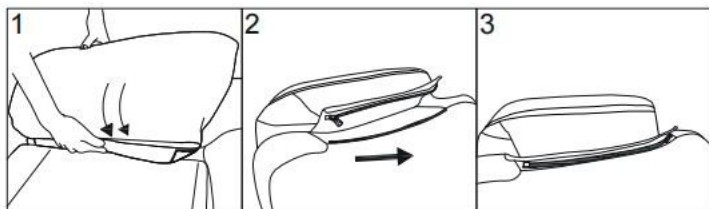

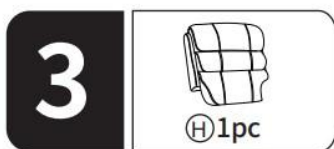

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

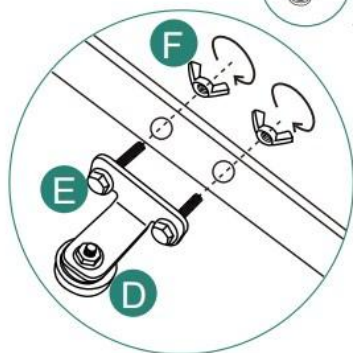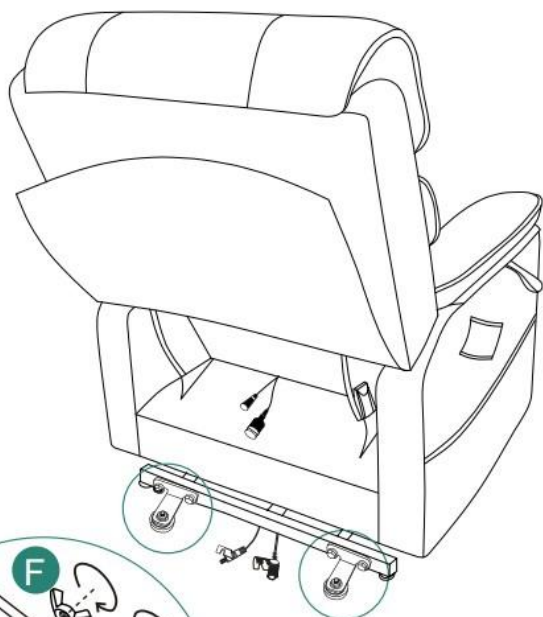

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

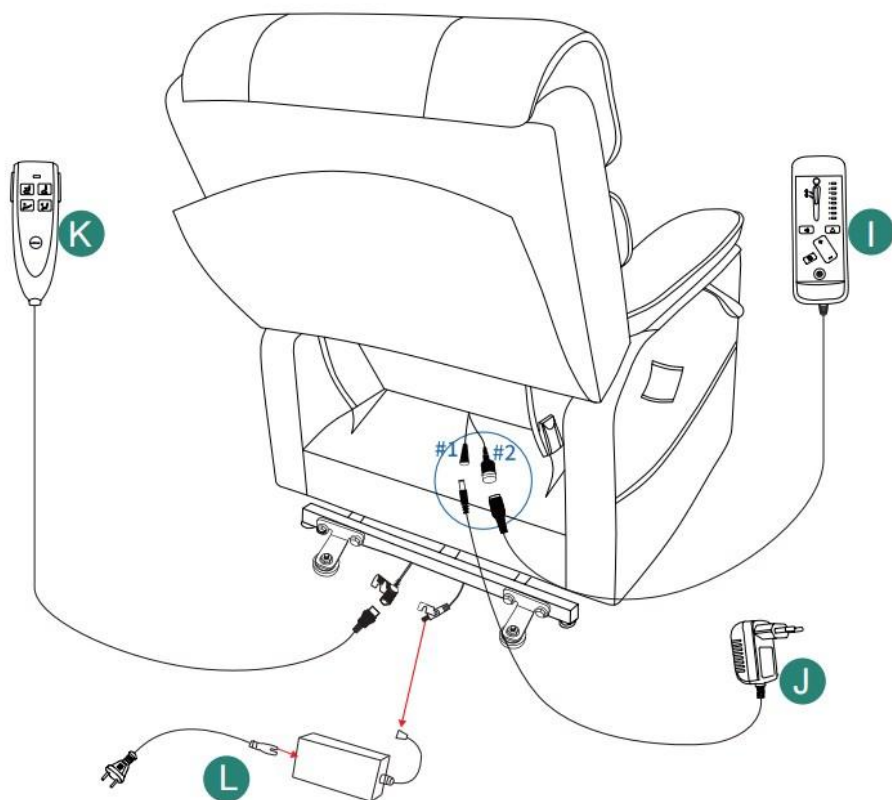


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

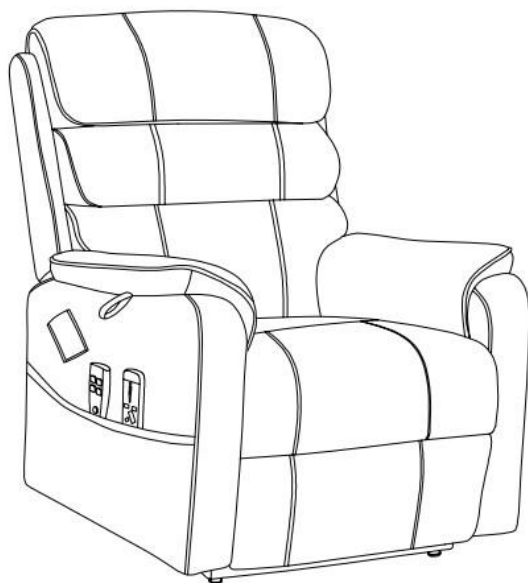


How to use the massage function?

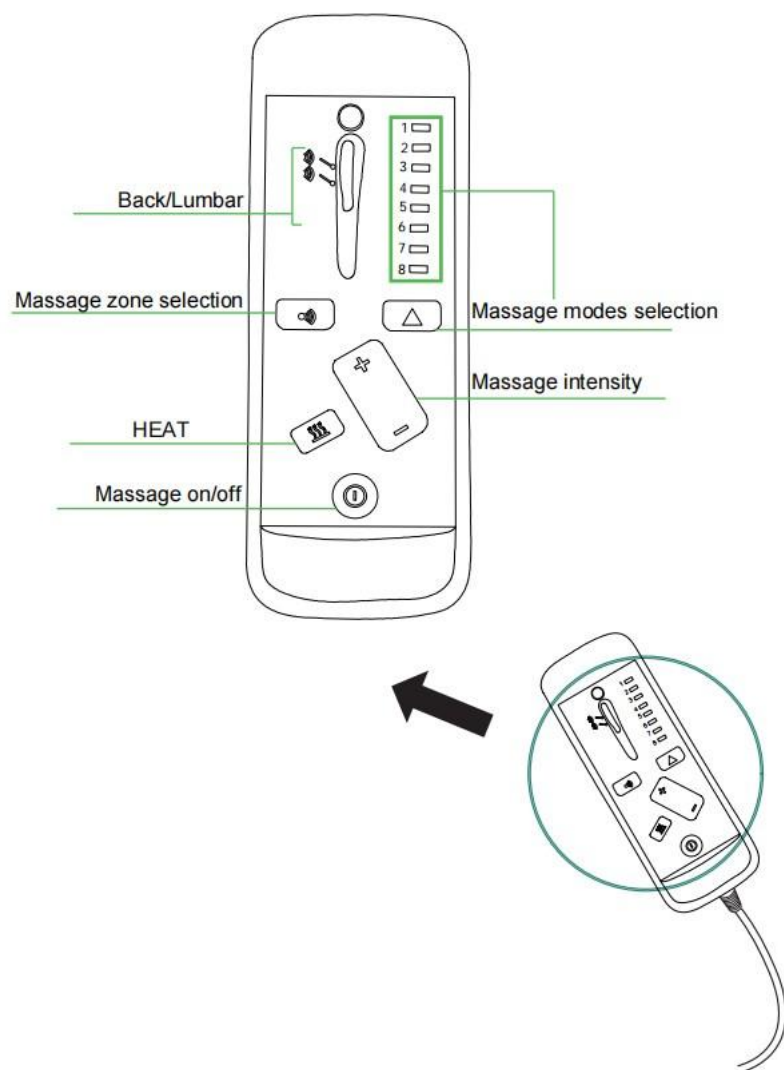

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

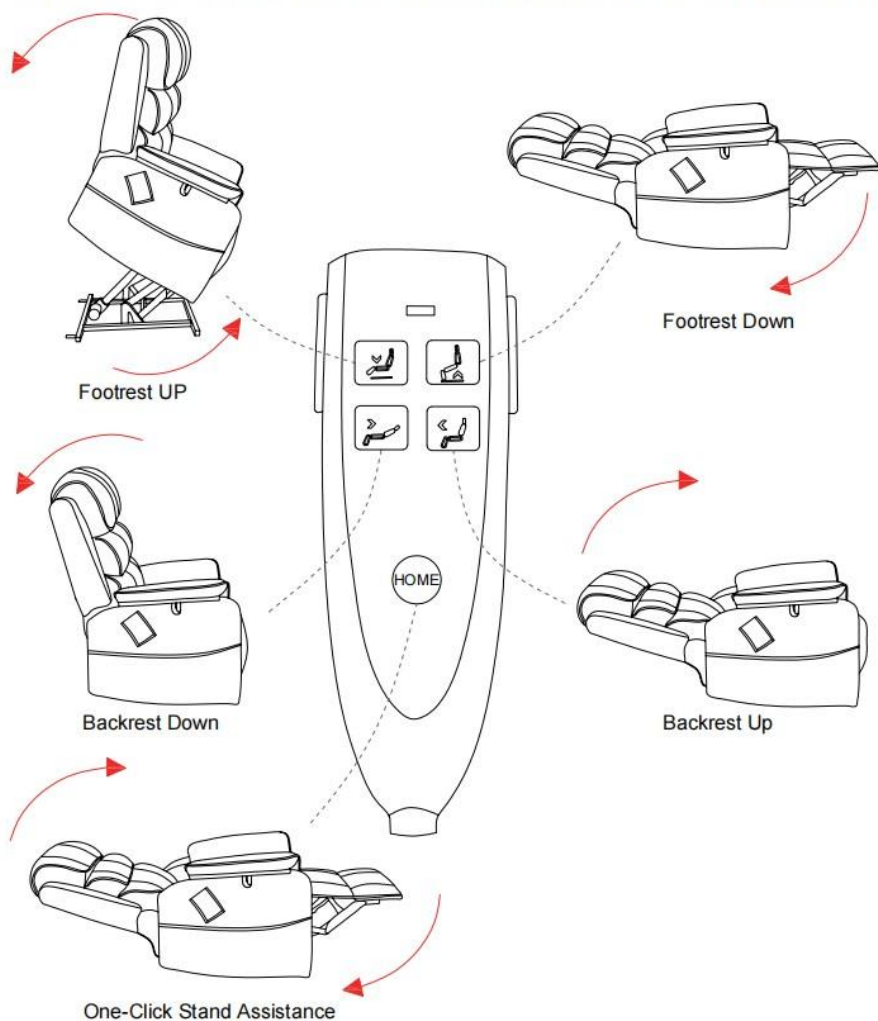

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	SX- 81541-2
Calificación(es)	29 V CC, 1,8 A
Seguro Cargando Peso	350 libras
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	975*830 * 1075 mm
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto)	825*790*710 mm
Peso neto (kg)	Aproximadamente 45 kg
Peso bruto (kg)	Aproximadamente 50,3 kg

*Los productos como especificaciones, apariencia y diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support



Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

FOTEL Z FUNKCJĄ PODNOSZENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: SX-81541- 2


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

NR MODELU: SX-81541-2

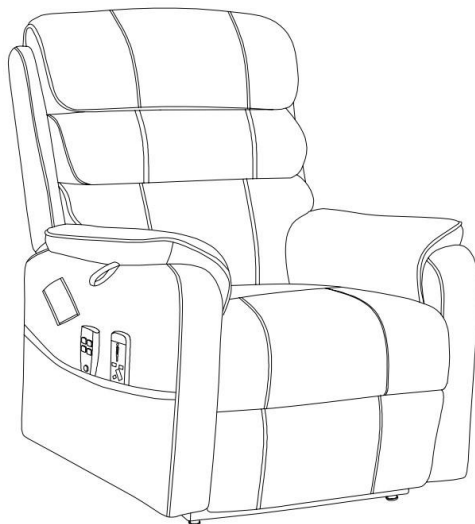

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
45. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.

47. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać fotel Lift Recliner.

48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI
SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:**


21. Ten produkt nie jest zabawką . Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.

22. Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru . Przed przenoszeniem fotela z podnoszonym oparciem należy go opróżnić.

23. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony fotel Lift Recliner.

24. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

PACKAGE CONTENTS

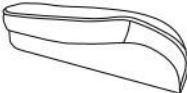Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
B		X1
C		X1
D		x2
E		x4
F		x4

Item no.	Reference Image	Qty.
G		X4
H		X1
I		X1
J		X1
K		X1
L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ4pc



ⓐ1pc

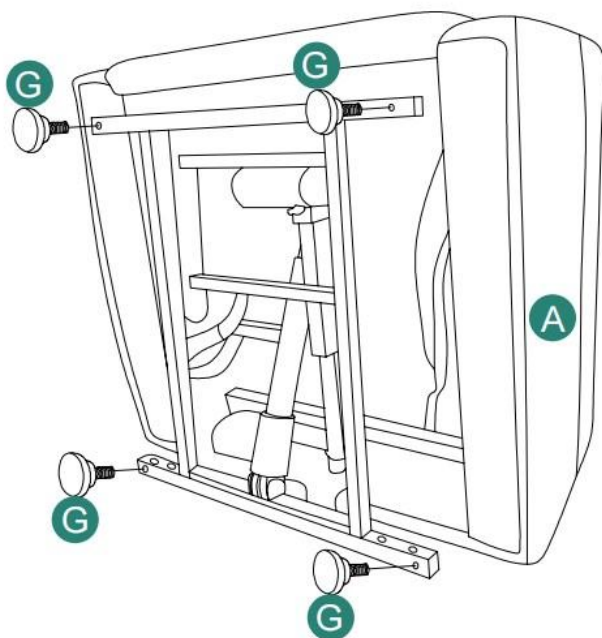

2







Ⓑ 1pc






Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

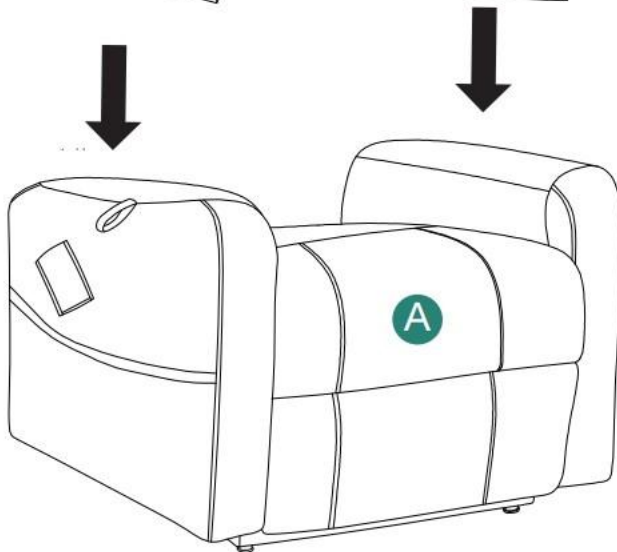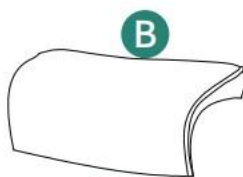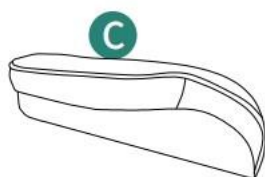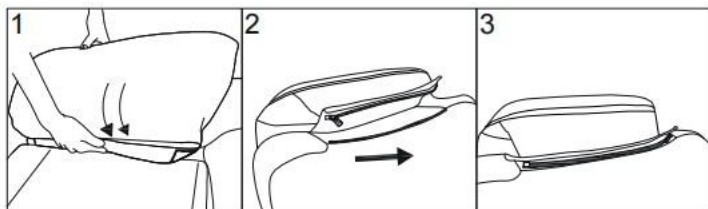

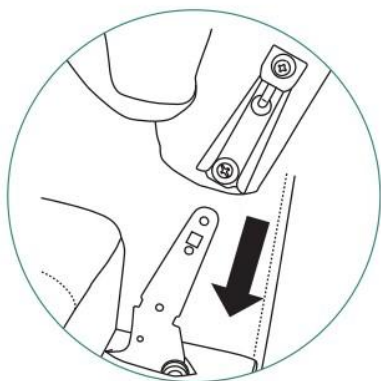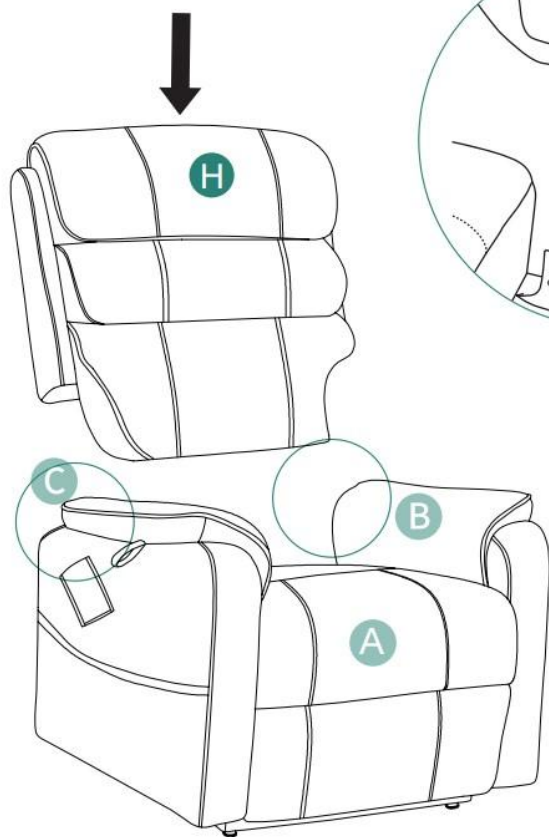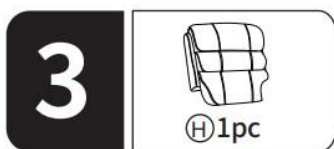

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

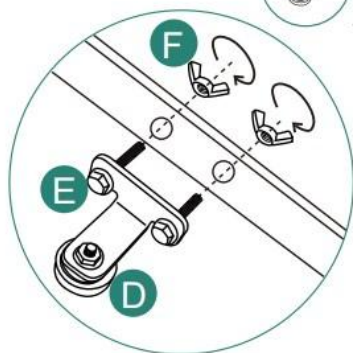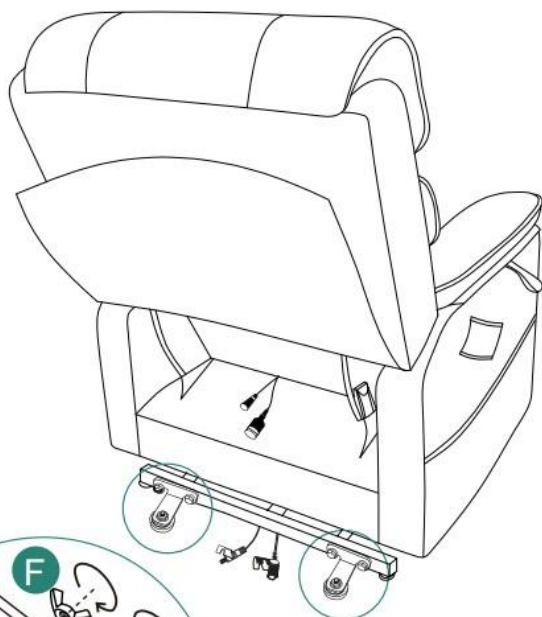

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

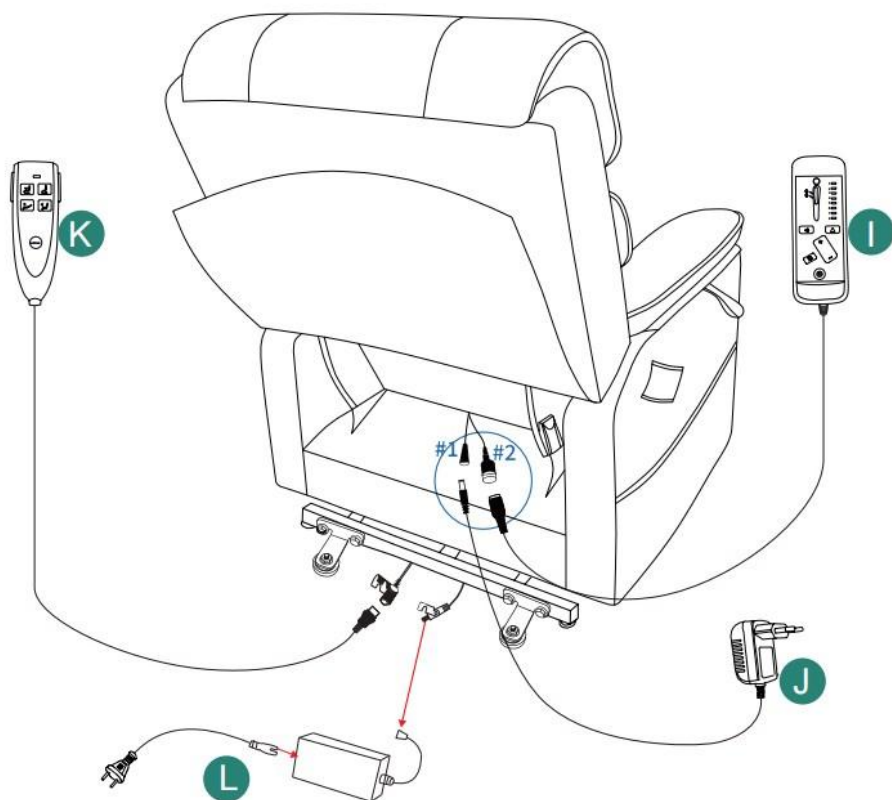


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

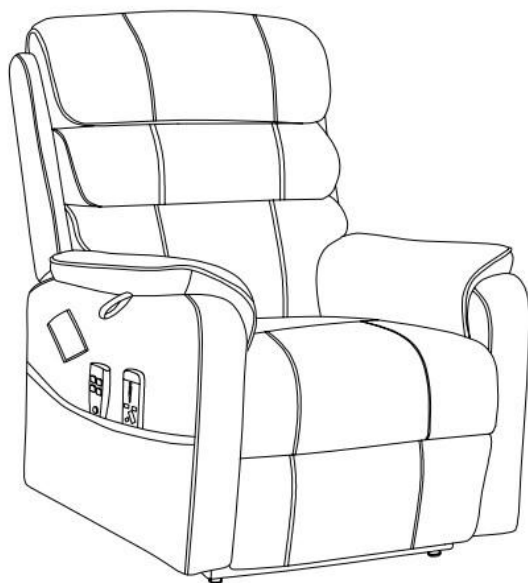


How to use the massage function?

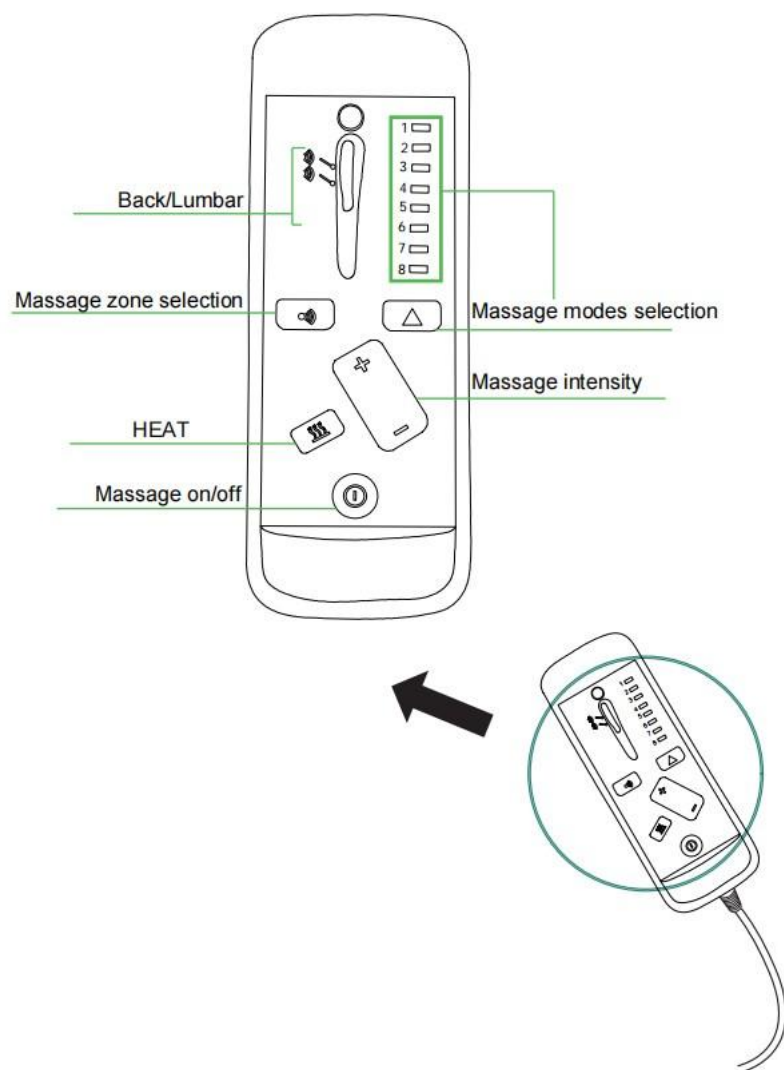

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

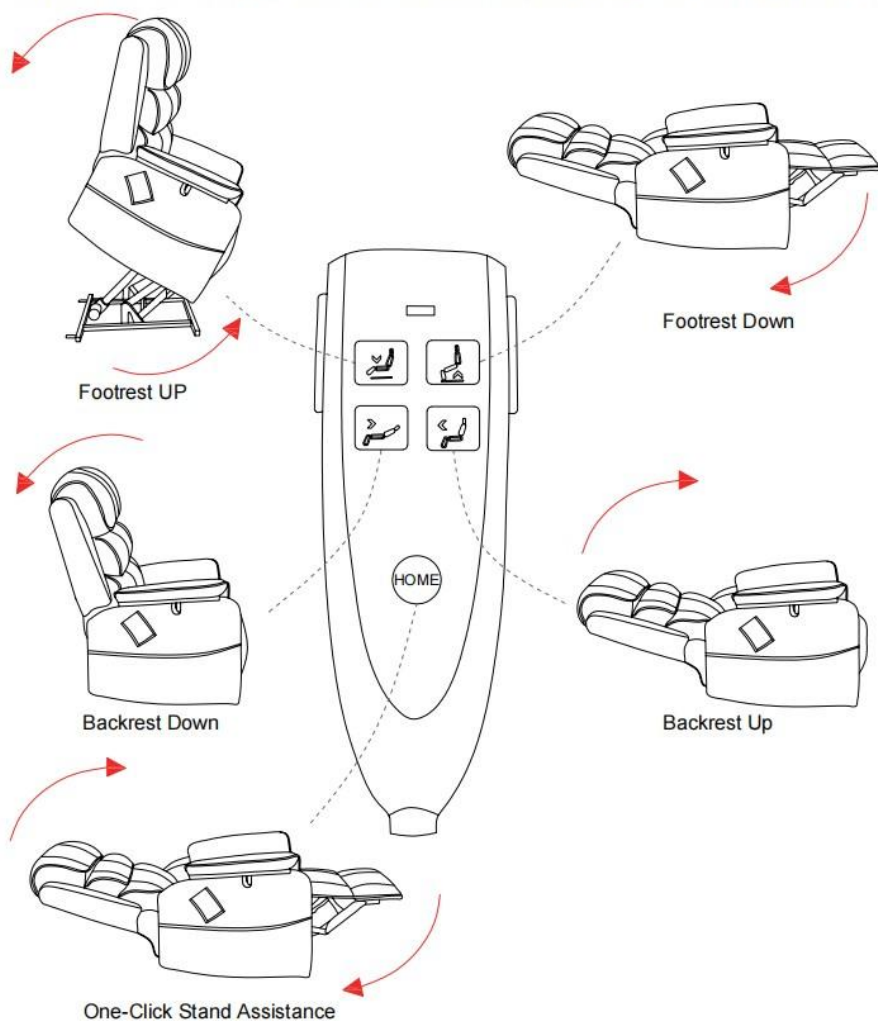

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SX-81541- 2
Ocena(y)	Prąd stały 29 V 1,8 A
Bezpieczna Załadunek Waga	350 funtów
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	975*8 3 0*1075 mm
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.)	825*790*710mm
Masa netto (kg)	Okolo 45 kg
Masa brutto (kg)	Okolo 50,3 kg

*Specyfikacja, wygląd i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LIFT-RELAXSTOEL

GEBRUIKSAANWIJZING

MODELNUMMER: SX- 81541-2

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig


wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

MODELNUMMER: SX- 81541-2

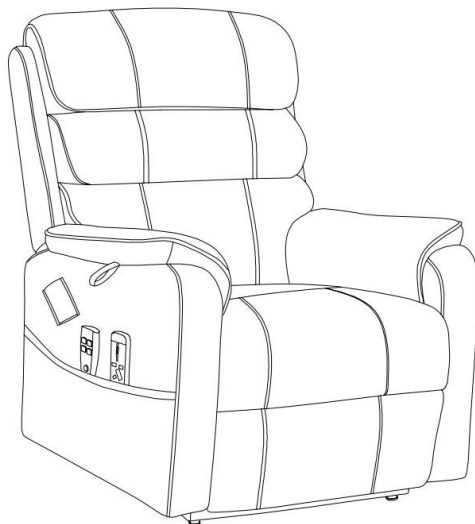

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Compliance is een C E- beveiligingscertificering.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

49. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
50. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
51. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
52. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
53. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.

55. Monteer de stoel op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de Lift Recliner Chair veilig kan dragen.

56. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIK VOORZORGSMATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:


25. Dit product is geen speelgoed . Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.

26. Overschrijd het maximale gewicht niet . Maak de Lift Recliner Chair leeg voordat u hem verplaatst.

27. Gebruik de stoel alleen op een vlakke, egale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen stoel met liftfunctie veilig kan dragen.

28. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

PACKAGE CONTENTS

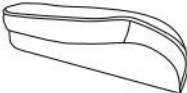Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1
B		X1
C		X1
D		x2
E		x4
F		x4

Item no.	Reference Image	Qty.
G		X4
H		X1
I		X1
J		X1
K		X1
L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



ⓐ4pc



ⓐ1pc

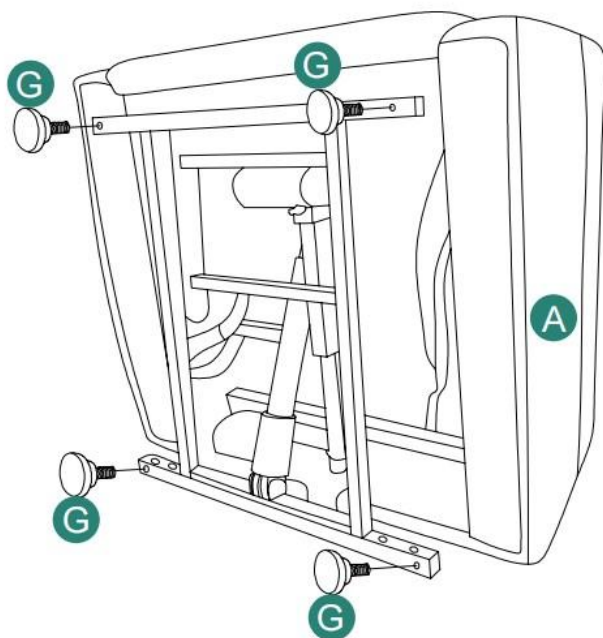

2







Ⓑ 1pc






Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

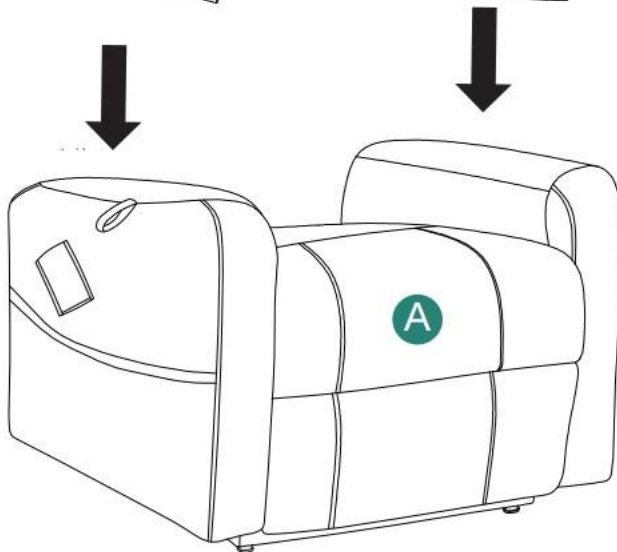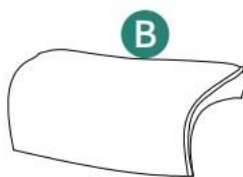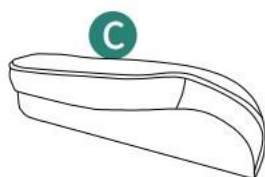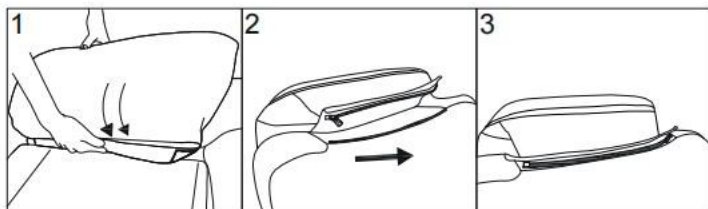

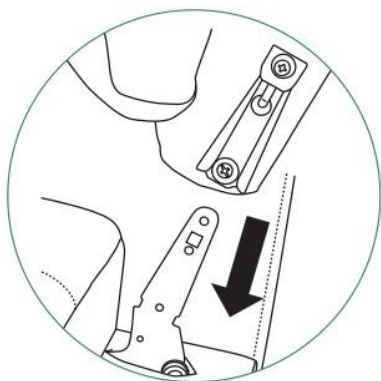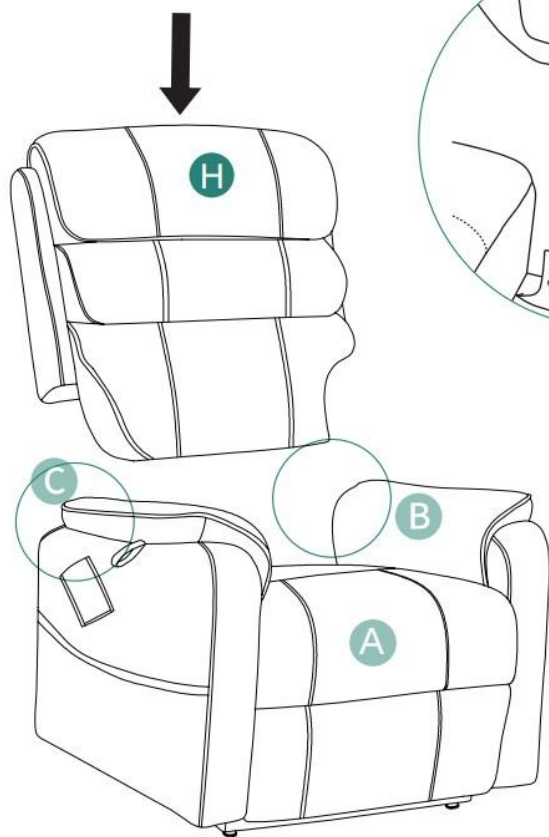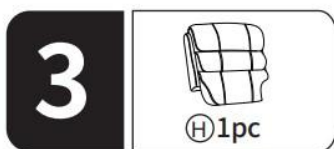

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

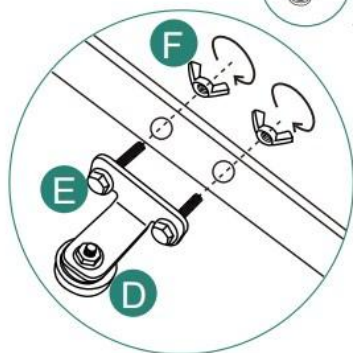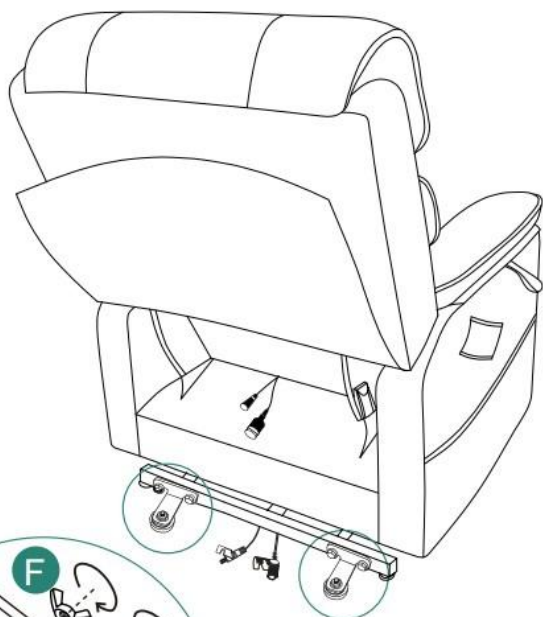

5



① 1pc




② 1pc



③ 1pc




④ 1pc

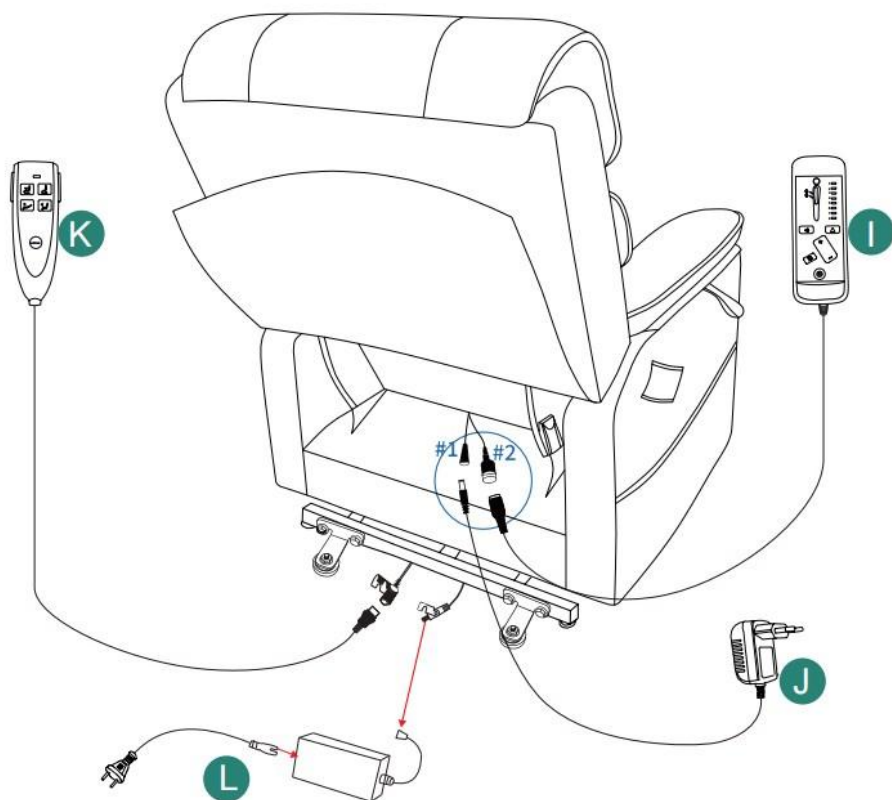


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

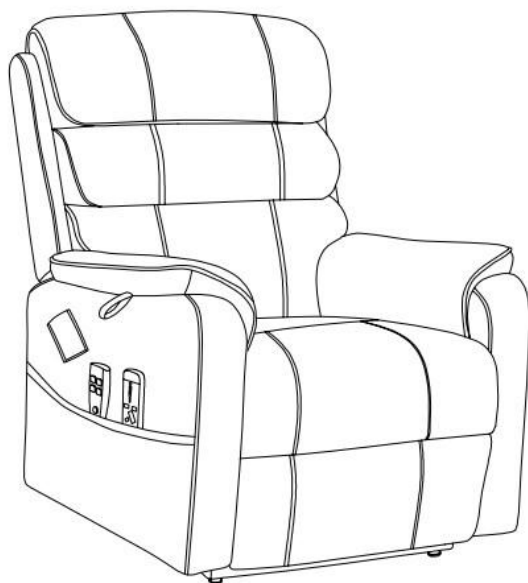


How to use the massage function?

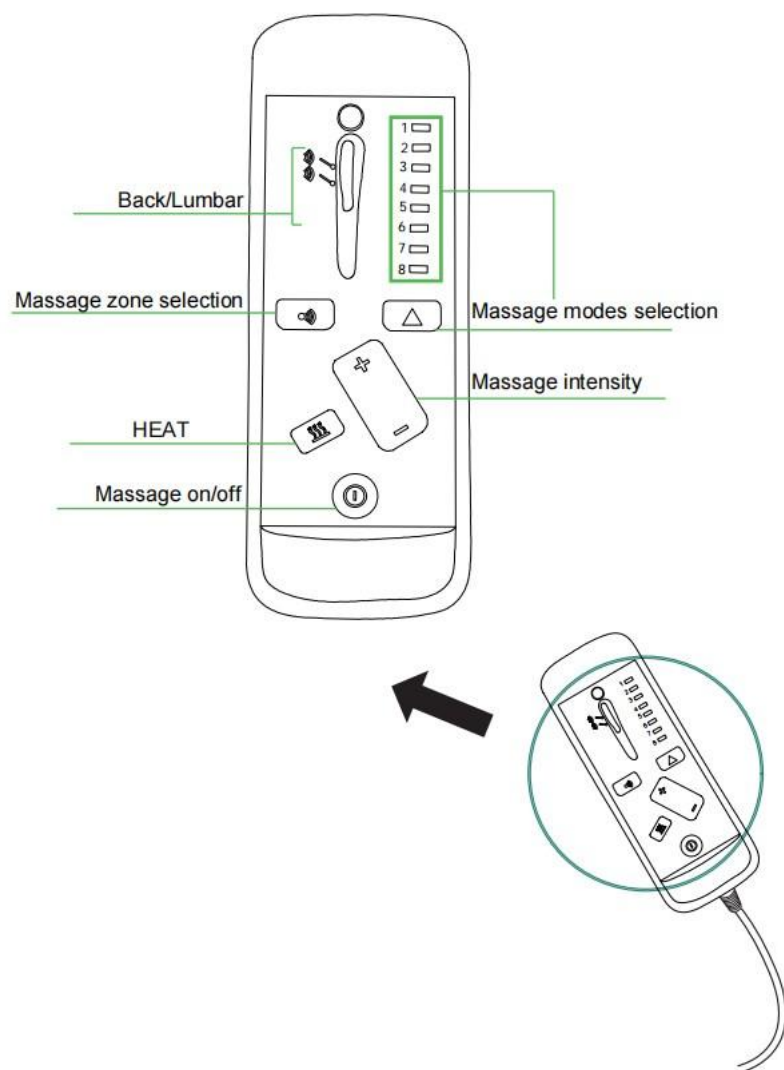

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

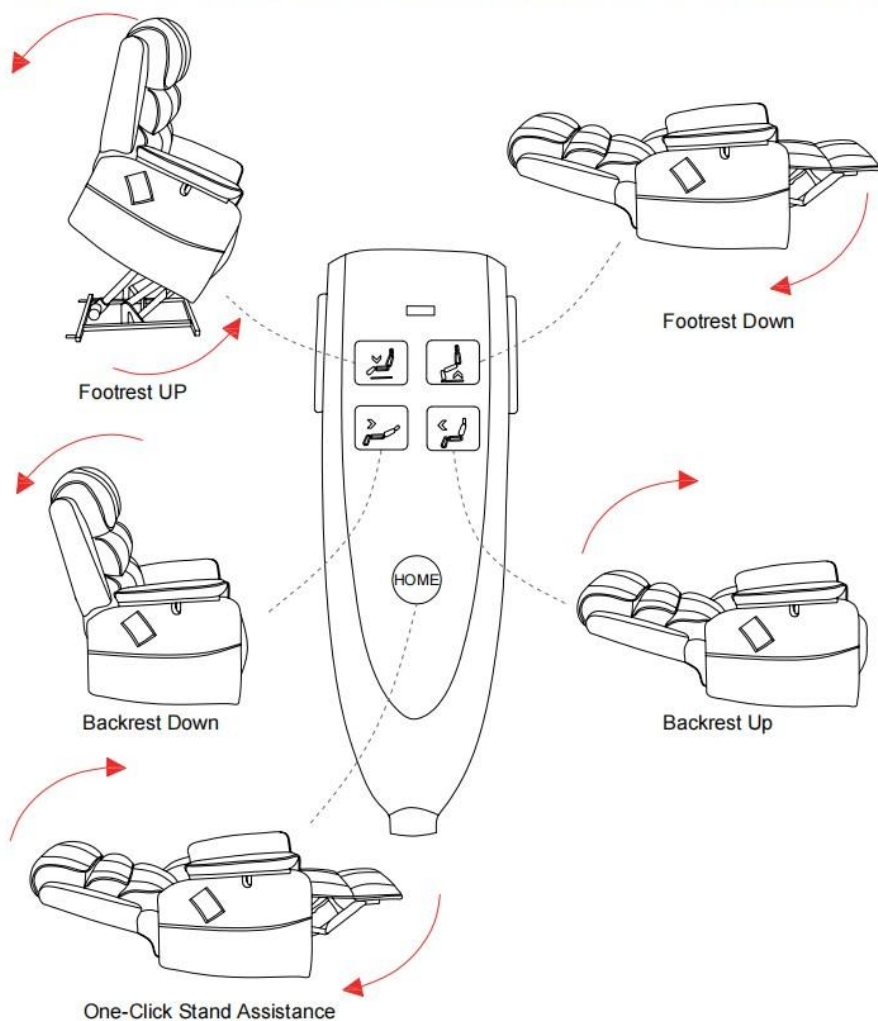

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	SX- 81541-2
Beoordeling(en)	DC29V 1.8A
Veilig Laden Gewicht	350LB
Productafmetingen (LxBxH)	975*830*1075mm
Verpakkingsgrootte (LxBxH)	825*790*710mm
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 45 kg
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 50,3 kg

*Productspecificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LYFT VILSTOL

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: SX-81541- 2


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lift Recliner Chair

MODELLNR: SX-81541- 2

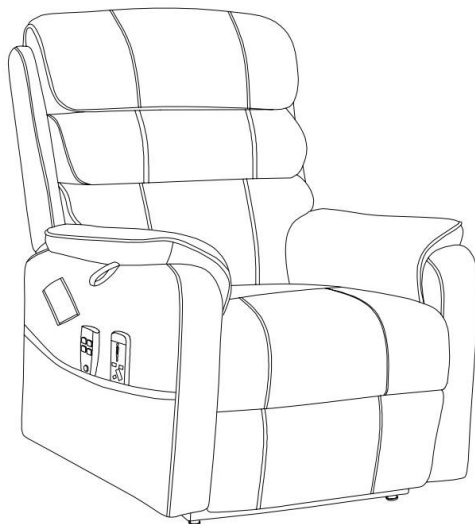

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Compliance är en C E- säkerhetscertifiering.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
59. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktegenskaperna gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.

63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja Lift Recliner Chair.

64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

SPARA DESSA E INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:



29. Denna produkt är inte en leksak . Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.

30. Överskrid inte viktkapaciteten . Töm Lift Recliner Stol innan du flyttar.

31. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad Lift Recliner-stol.

32. Använd endast som avsett. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

PACKAGE CONTENTS

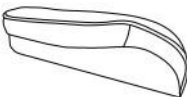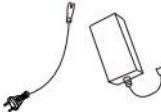Item no.	Reference Image	Qty.	Item no.	Reference Image	Qty.
A		X1	G		X4
B		X1	H		X1
C		X1	I		X1
D		x2	J		X1
E		X4	K		X1
F		X4	L		X1

ASSEMBLY STEPS


1



Ⓒ4pc



Ⓐ1pc

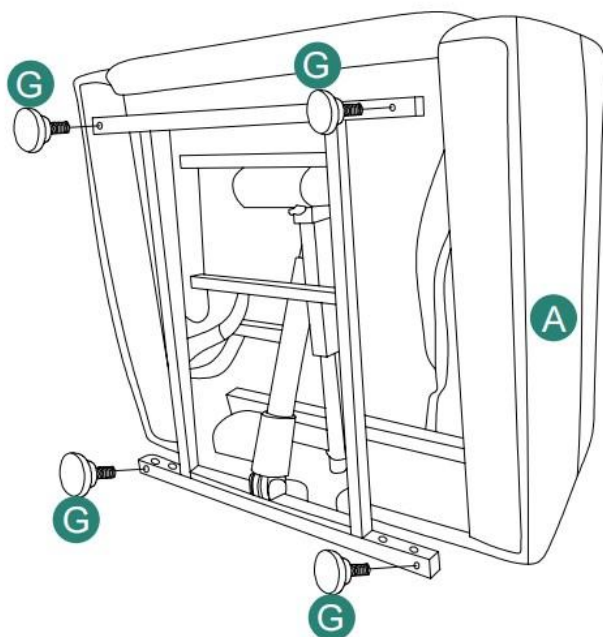

2







Ⓑ 1pc




Ⓒ 1pc



Ⓐ 1pc

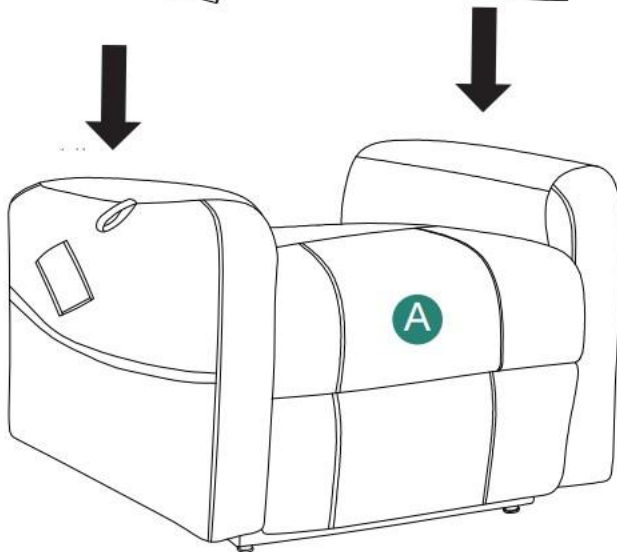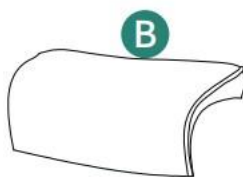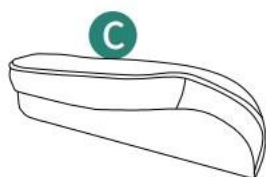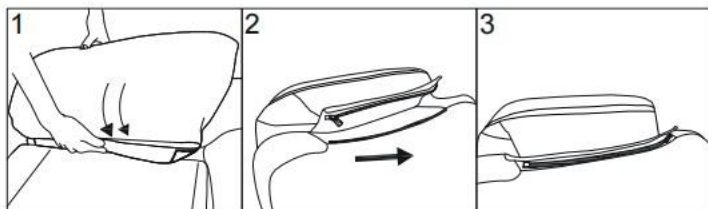

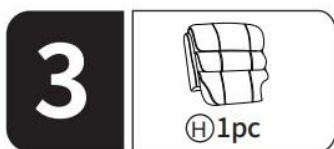

4





Ⓓ2pc



Ⓔ4pc



Ⓕ4pc

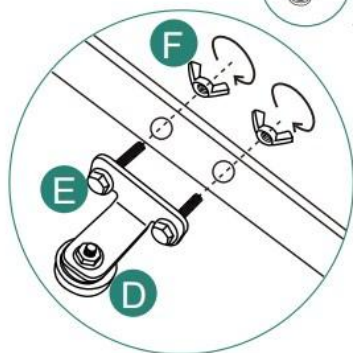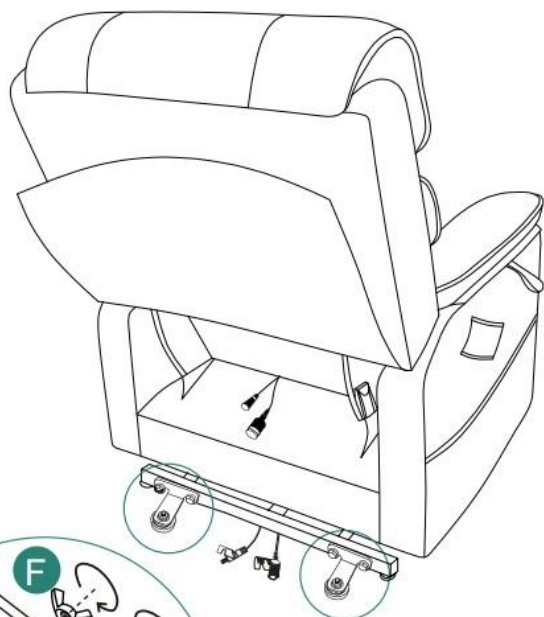

5



① 1pc




④ 1pc



⑤ 1pc




⑥ 1pc

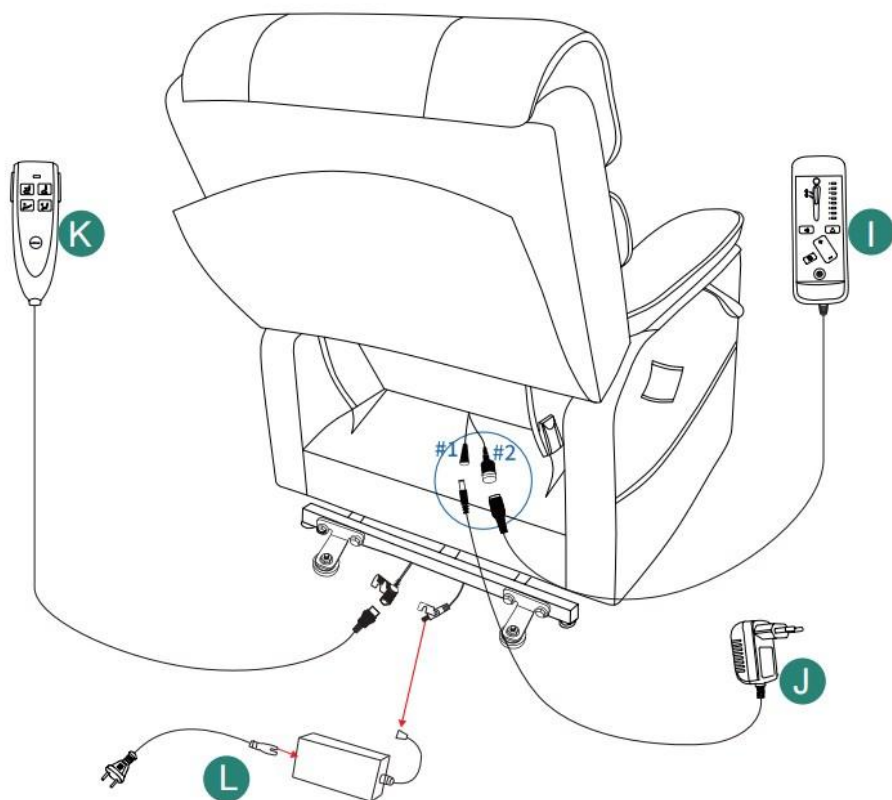


Connect wire #1 to part J, wire #2 to part I.

6

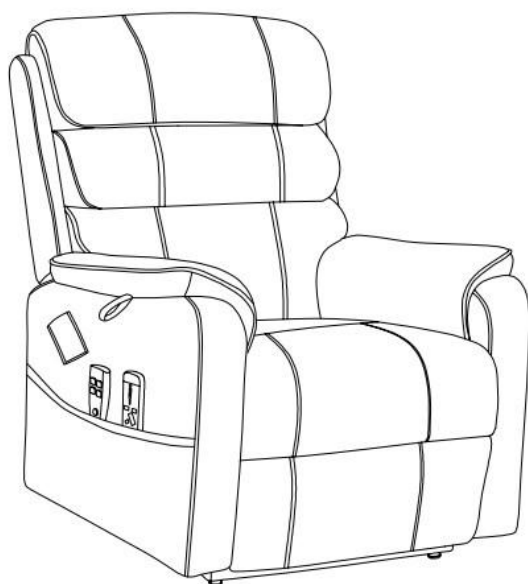


How to use the massage function?

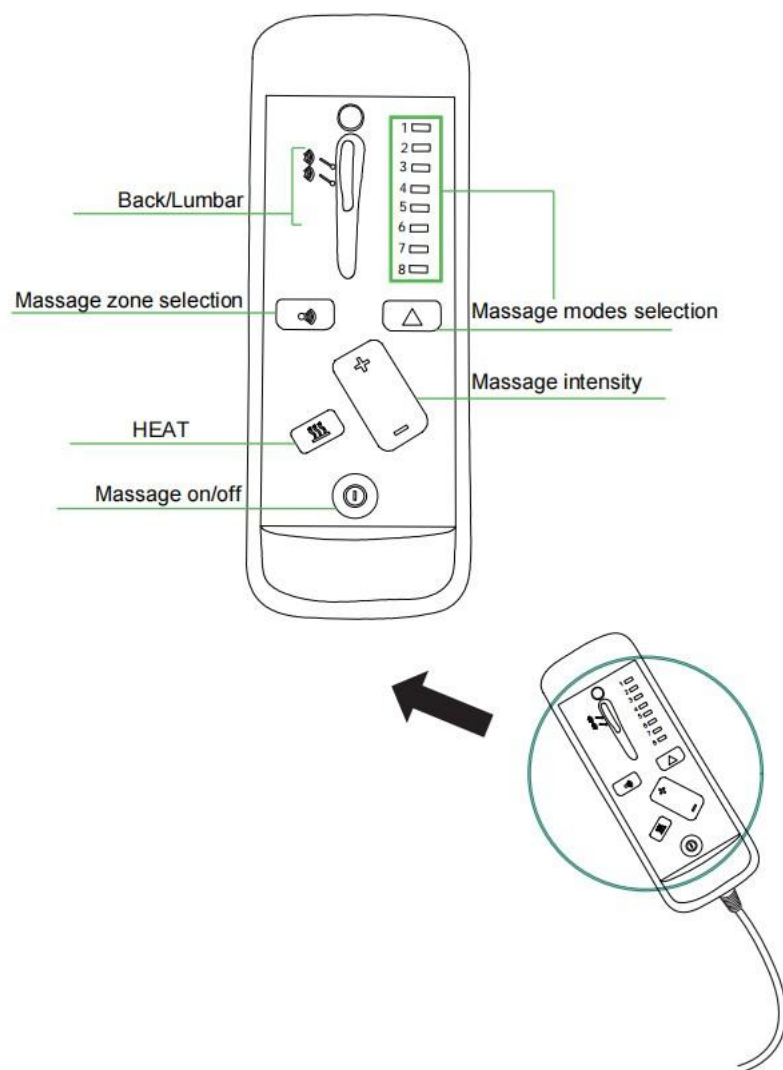

INFINITE POSITION

Adjust the backrest and footrest independently to a full reclining position

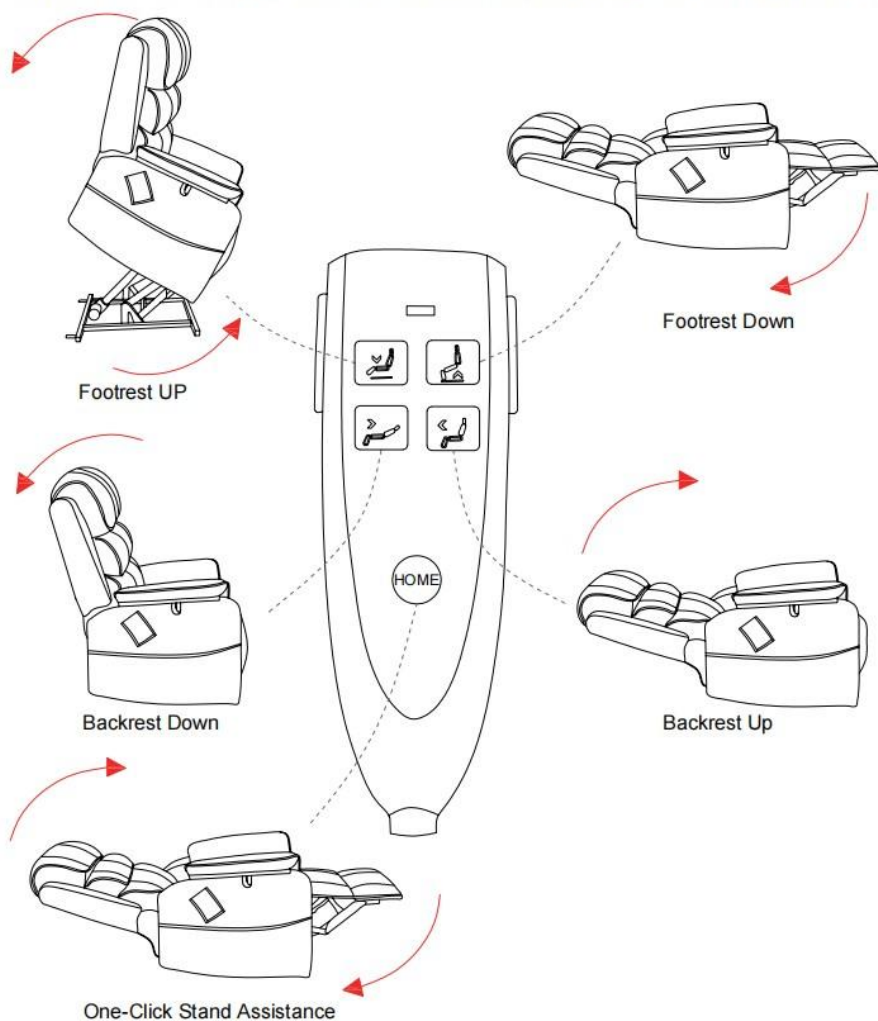

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	SX-81541- 2
Betyg(er)	DC29V 1,8A
Säker Belastning Vikt	350 LB
Produktens mått (LxBxH)	975*830*1075 mm
Förpackningsstorlek (LxBxH)	825*790*710 mm
Nettovikt (kg)	Ca 45 kg
Bruttovikt (kg)	Ca 50,3 kg

*Produkter som specifikationer, utseende och design kan ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

